


機械器具（47）注射針及び穿刺針
管理医療機器 単回使用眼科手術用カニューレ 34899032

トップ眼科針

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

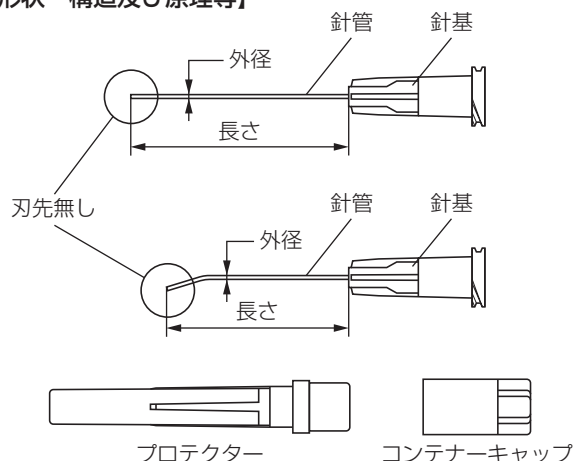

- ・上段が直針、下段が曲針
- ・曲針の折曲げ角度：18度

（材質）

針 管	ステンレス
針 基	ポリプロピレン

眼科針（直・曲）

ゲージ	外 径	品 種	カラーコード	針の長さ
27G	0.40mm	直	ミディアムグレー	26mm
27G	0.40mm	曲	ミディアムグレー	22mm

（仕様）

- ・JIS T 3209（滅菌済み注射針）を準拠する。

【使用目的又は効果】

- ・本品は、眼科手術時に灌流液などの注入及び眼内物質の吸引に使用する。

【使用方法等】

1. ブリスター包装を開封し、本品を取り出す。
2. コンテナーキャップを取り外し、本品をシリンジ等にしっかり取り付ける。
3. プロテクターをまっすぐ引き外して使用する。
滅菌されているので、そのまますぐに使用できる。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・プロテクターをかぶせる場合には、誤刺及びプロテクターからの針の飛び出しに注意して慎重に行うこと。
- ・針管には直接手を触れないように注意すること。
- ・針管内の詰まりや破断の原因となるので、針管を曲げて使用しないこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ※ ・使用前、接続部に緩みがないことを確認すること。
また、使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ※ ・本品の接続に際して、過度の締め付け及び増し締め等には十分注意すること。[接続部が外れなくなったり、破損するおそれがある。]
・接続部に薬液が付着すると、接続部に緩みが生じる場合があるので注意すること。

※ ＜不具合・有害事象＞

- 1) その他の不具合
汚染、包装の損傷、空気混入、漏れ、曲がり、外れ、緩み、穴、折れ、亀裂、切断、詰まり
- 2) その他の有害事象
感染

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜有効期間＞

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証（自社データ）による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ（添付文書の請求先）
TEL 03-3882-3101

発売元 エイエムオー・ジャパン株式会社

※※ TEL 03-4411-4902

