


機械器具（74）医薬品注入器
管理医療機器 単回使用注射用針 30889000

センシテックニードルプラス

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
＜構造図（代表図）＞

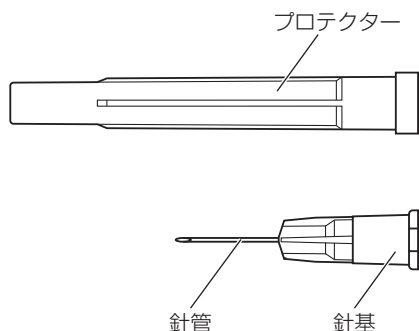

（材質）

針管	ステンレス
針基	ポリプロピレン
プロテクター	ポリプロピレン

（仕様）

- ・JIS T 3209（滅菌済み注射針）を準拠する。

【使用目的又は効果】

- ・本品は、注射筒等を用いて薬液の注入、又は血液若しくは体液等の採取に使用する。

【使用方法等】

1. 本品のプリスター包装を開封する。
2. 本品をシリンジにしっかりつける。
3. プロテクターをまっすぐ引き外して使用する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・プロテクターを外す場合には、針先がプロテクターに接触しないように注意すること。[針先が変形して、切れ味が悪くなるおそれがある。]
- ・プロテクターをかぶせる必要がある場合には、誤刺しに注意し真っ直ぐに被せること。[プロテクター内面に針先が接触すると、針先がプロテクターを貫通して誤刺しのおそれがある。]
- ・針管には直接手を触れないように注意すること。[針刺し及び感染のおそれがある。]
- ・薬液吸引等の際に、アンプル等の壁面に針先が接触しないように注意すること。[針先が変形して、切れ味が悪くなるおそれがある。]

- ・ゴム栓等に刺通する場合は、まっすぐ刺通すると共に、同一部位に繰り返し刺通しないこと。[刺通部位がくり抜かれ（コアリング）、針管の詰りやゴム片等が混入するおそれがある。]
- ・ゴム栓に対して斜めに刺したり、穿通中に横方向の力を加えないこと。[針管又は針基に曲りや破損のおそれがある。]
- ・接続部を汚染しないよう注意すること。
- ・何等かの原因により曲がった針管や、曲がった針管を元に戻して使用しないこと。[針管が折れて体内に残留するおそれがある。]
- ・薬品、薬液等の添付文書又は取扱説明書をよく確認して使用すること。[薬品によっては、注入抵抗が高く、薬剤を注入できないおそれがある。]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・使用前、接続部に緩みがないことを確認すること。
また、使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ・本品の接続に際して、過度の締め付け及び増し締め等には十分注意すること。[接続部が外れなくなったり、破損するおそれがある。]
- ・接続部に薬液や血液等が付着すると、接続部に緩み等が生じる場合があるので注意すること。

* ＜不具合・有害事象＞

1) その他の不具合

汚染、包装の損傷、空気混入、漏れ、曲がり、外れ、
緩み、穴、折れ、亀裂、切断、詰まり

2) その他の有害事象

感染

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜有効期間＞

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ（添付文書の請求先）
TEL 03-3882-3101

