

医療用品（3）手術用手袋及び指サック
管理医療機器 天然ゴム製手術用手袋 40548000

センパーメッド手術用手袋 NR

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

＜適用対象(患者)＞

- ・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者及び患者への使用は禁止

【形状・構造及び原理等】

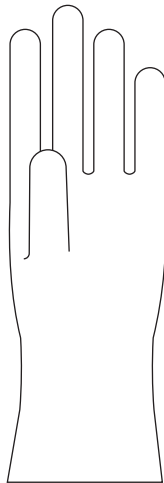

- ・形状：C（曲指型手袋）
- ・表面仕上げ：T（表面が粗面）
- ・パウダ：なし
- ・主材料：天然ゴムラテックス

（仕様）

- ・JIS T 9107(使い捨て手術用ゴム手袋)を準拠する。

【使用目的又は効果】

- ・医科及び歯科の手術において、患者及び使用者を交差感染から保護すること。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、台紙ごと中身を取り出す。
2. 台紙を開き、手袋を取り出して装着する。

【使用上の注意】

＜使用注意(次の患者には慎重に適用すること)＞

- ・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。アレルギー性症状には、Ⅰ型（即時型：天然ゴムラテックスに含まれるたん白による）、Ⅳ型（遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）がある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

- ・天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。

＜重要な基本的注意＞

- ・刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。

＜相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)＞

1. 併用注意

- ・電気メス使用時に高周波回路が形成された場合、手袋の電氣的絶縁性が損なわれることがあるので注意すること。[火傷を起こすおそれがある。]
- ・薬品、薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合があるので確認して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。
- ・天然ゴムはオゾンにより劣化するため、オゾンを発生させる機器の近くを避け、出来るだけ箱包装のまま保管すること。

＜有効期間＞

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証（自社データ）による]

＜使用期間＞

- ・24時間を超えて使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ（添付文書の請求先）
TEL 03-3882-3101

