

機械器具 48 注射筒
一般医療機器 汎用洗浄用注射筒 JMDN コード : 35390000
販売名 **バルブシリンジ**

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はバルブの圧縮・反発により液体の吸引・放出を行うものです。

〈形状〉

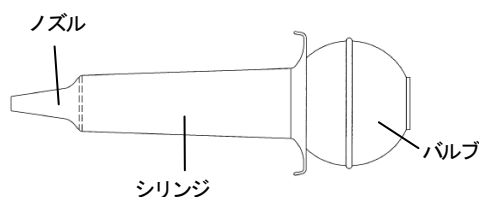

〈原材料〉ノズル及びシリンジ: ポリプロピレン樹脂

バルブ: シリコンゴム樹脂

【使用目的又は効果】

本品は主に体腔の洗浄・フラッシングに使用されるもので、一方の端にゴム球が固定され、もう一方にノズルが付いている硬質プラスチック製の筒からなる器具です。滅菌済みのため開封後すぐに使用できます。

【使用方法等】

1. 包装より取り出し、バルブを握り、圧縮した状態でシリンジ先端のノズルを液体の中に入れ、バルブの圧縮をゆるめて液体を吸引します。
2. シリンジ先端のノズルを目的の部位に向け、バルブを圧縮して液体を放出します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品は滅菌済みのため、使用直前に開封して使用すること。
- ・1 回限りの使用のため再使用しないこと。
- ・開封前には包装に破れ等の破損又は水濡れが無いことを確認し無菌操作の上、包装から取り出し、直ちに使用すること。
- ・刃物等鋭利な器具に触れると破断する恐れがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈貯蔵・保管方法〉

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

化学薬品保管場所、その他ガスの発生する場所を避けて保管してください。

〈有効期間・使用の期限〉

包装に品質有効期限が記載されています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社リブドゥコーポレーション
愛媛県新居浜市観音原町乙 118-1
TEL : 0897-47-5611

製造業者 株式会社リブドゥコーポレーション