

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 薬液調整用針 70379000

OMP スタンドコネクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 使用方法
 - (1) 本品は、有機溶剤（アルコール等）、油性造影剤と併用しないこと。[本品の樹脂素材に影響し、本品が損傷、破損等するおそれがある。]
 - (2) 本品は、脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む製剤の投与時に使用しないこと。[本品の樹脂素材に影響し、本品が損傷、破損等するおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、ディスポーザブルシリリングと接続して使用する。本品の接続口にオムニパークシリリングを接続することにより薬液の移動を可能にする。

以下のディスポーザブルシリリング及びオムニパークシリリングと使用すること。

ディスポーザブルシリリング

届出番号：14B1X00007000008

オムニパークシリリング

承認番号：22000AMX02440

承認番号：22000AMX02442

承認番号：22000AMX02443

承認番号：22300AMX00060

承認番号：22000AMX02444


承認番号：22000AMX02445

承認番号：22000AMX02446

承認番号：22000AMX02447

2. 構造

構造図

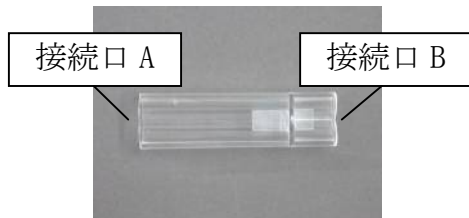

本品の材質：

ポリカーボネート

【使用目的又は効果】

薬剤を容器から他の薬液容器に移すために用いる。

【使用方法等】

1. ディスポーザブルシリリングを造影剤注入装置に取り付ける。
2. ディスポーザブルシリリングの先端を上へ向ける。
3. ディスポーザブルシリリングのダストカバーを外す。
4. 造影剤注入装置の前進スイッチを押し、吸子をディスポーザブルシリリングの先端まで押し出す。
5. ディスポーザブルシリリングに本品の接続口 A をまっすぐ取り付ける。
6. オムニパークシリリングを本品の接続口 B からまっすぐ取り付ける。
7. ディスポーザブルシリリング及びオムニパークシリリングが奥まで挿入され取り付けられているか確認する。
8. 造影剤注入装置にて薬液を吸引する。
9. 吸引を開始したら本品とディスポーザブルシリリング及びオムニパークシリリングの接続部から液漏れがないか確認する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 本品にディスポーザブルシリリング及びオムニパークシリ

ングが奥まで挿入され、本品に緩み、外れがないか確認すること。

2. 本品にディスポーザブルシリリング及びオムニパークシリリングを接続の際は、取り付け方向を確認すること。
3. 使用中は本品の破損、嵌合部より薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
4. ディスポーザブルシリリングを上に向けた状態で吸引動作を実施すること。
5. 本品を使用する際は、強い衝撃をくわえないこと。[ディスポーザブルシリリング及びオムニパークシリリングの破損や接続が外れる可能性がある。]
6. 割れた場合には使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 有効期間

有効期間は本品包装ラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

会社名：株式会社東海メディカルプロダクツ

電話番号：0568-81-7954