

機械器具 26 医療用遠心ちんでん器
一般医療機器 汎用検査室用遠心機 JMDN 36465000


多本架冷却遠心機 AX-511

【禁忌・禁止】

- ・爆発性の試料を遠心しないこと。[本機は防爆仕様ではありません。本機の破損により死亡事故や重傷事故の原因となり危険です]
- ・感染性のある試料を遠心しないこと。[本機はバイオハザード対策仕様ではありません。感染性の試料を使用した場合、人体に重大な影響をおよぼす原因となり危険です]
- ・ローターの回転中は遠心室ドアを開けないこと。[誤って回転中のローターに触れると重傷事故の原因になり危険です]

【形状・構造及び原理等】

《本体外観図》

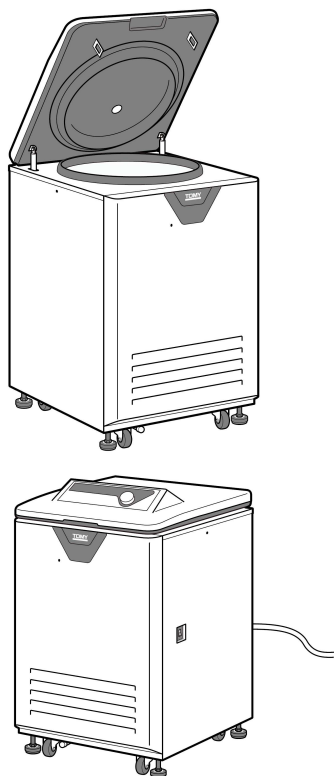

詳細は、取扱説明書の「2-2. 各部の名称と働き」を参照してください。

《本体の寸法及び質量》

- ・外形寸法：510W×567D×858H（mm）
- ・質量：104 kg

《電気的定格》

- ・定格電圧：AC 100V
- ・定格電流：12A
- ・必要な電源：単相 AC 100V 50/60Hz 15A

《作動・動作原理》

運転を始めるとモーターが動き、ローターを回転・加速します。なお、運転開始と同時にタイマーが作動します。ローターの回転が設定回転数まで到達すると、タイマー終了まで回転数を維持します。このとき発生する遠心力で試料が分離されます。設定された遠心時間が経過すると、モーターを減速します。ローターの回転が停止すると全工程が完了となり、ブザーと表示灯で報知します。

なお、電源が入っている間は、冷凍機により遠心室内温度を設定温度になるように冷却しています。

装置に異常が発生すると、より安全な状態に移る動作をするとともに、エラーコードの表示とブザーで報知します。

**《仕様》

- 1) 最高回転数 10000rpm
- * 2) 最大遠心加速度 11740G
- 3) 温度設定範囲 -9～35℃（1℃毎）
- 4) 時間設定範囲 10～50 秒（10 秒毎）、1～99 分（1 分毎）、フリー

**【使用目的又は効果】

遠心力を応用して懸濁液の成分を分離するために用いる。体液等の試料を単独か、又は分析物の測定前に試薬や他の添加物を添加した後に遠心分離することを目的とする。

**【使用方法等】

《設置方法》

詳細は取扱説明書の「3. 設置について」を参照してください。

直射日光の当たらない風通しの良い場所を選び、十分なスペースを空けて設置する。

スパナを使用して高さ調整ボルトを時計回りに回転させ、移動用キャスターが浮くまで本機を上げる。

水準器をモーターシャフトにのせ高さ調整ボルトで本機の水平を調整する。ガタつきの無いことを確認したら、排水キャップを排水口に取り付ける。

《使用環境》

本機を使用する際には、下記の環境をお守りください。

周囲温度：10～35℃（結露なきこと）

相対湿度：30～85%

気圧：700～1060 hPa

《使用方法》

詳細は取扱説明書の「4. 操作の流れについて」及び「5. 操作方法について」を参照してください。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

- ① 電源スイッチ「入」
- ② ローターの取り付け
- ③ ローターの識別
- ④ 遠心試料の準備
- ⑤ 遠心試料の取り付け
- ⑥ BART コードの設定
- ⑦ 運転条件の設定
- ⑧ 運転開始
- ⑨ 運転終了
- ⑩ 遠心試料の取り出し
- ⑪ ローターの取り外し
- ⑫ 電源スイッチ「切」

【使用上の注意】

詳細は取扱説明書の「1. 安全にお使いいただくために」を参照してください。

1. 使用前注意

- ・ 傷、変形、腐食があるローター・バケット・ラック・アダプターを使用しないこと。
- ・ ローターをつけたまま本機を移動しないこと。

2. ローターの取り付け

- ・ モーターシャフトに傷、およびゴミがないか確認すること。
- ・ ローター本体、および遠心室内に異物がないことを確認すること。
- ・ ローターは確実に取り付けること。

3. 遠心試料の準備

- ・ 傷、変形、腐食がある遠心チューブを使用しないこと。
- ・ 遠心チューブの許容遠心加速度を確認すること。
- ・ 試料の量は使用チューブの実容量以下で使用する。
- ・ 試料の密度が 1.2 g/cm^3 をこえる場合は、密度によるローター許容回転数を算出すること。

4. 遠心試料の取り付け

- ・ スイングローターのバケット、ラックは同種類のものをローター本体すべての位置に取り付けること。
- ・ バケット、ラックは確実に装着すること。
- ・ チューブ装着穴、バケット内に水滴や異物がないか確認すること。
- ・ チューブ、試料の取り付けはバランスをとること。
- ・ スイングローターのバケットは、試料取り付け後にスムーズにスイングすることを確認すること。
- ・ 蓋があるローターは、必ず蓋を取り付けること。

5. BART コードの設定

- ・ BART コードは、よく確認して、正しく設定すること。

6. 運転条件の設定

- ・ 遠心チューブの許容遠心加速度をこえる回転数を設定しないこと。
- ・ 試料の密度が 1.2 g/cm^3 をこえる場合は、算出したローター許容回転数をこえる設定をしないこと。

7. その他の注意

- ・ 熱交換器に手を触れないこと。

【保守・点検に係る事項】

《使用者による保守点検事項》

詳細は取扱説明書の「9. 保守点検について」を参照してください。

1. 本体の清掃と消毒
本体外装や遠心室内が汚れたら、排水、清掃、消毒を行なう。
2. ローターの清掃と消毒
ローター、バケット、ラックが汚れたら、清掃、消毒を行なう。
3. 一ヶ月ごとに行なう保守点検
一ヶ月を目安として、本機各部、ローター、バケット、ラックの清掃と点検を行なう。
4. 遠心機械の定期自主検査
一年以内ごとに一回、労働安全衛生規則に定められた自主検査を行なう。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：トミー工業株式会社

住 所：福島県石川郡浅川町大字簗輪字山敷田 62

電話番号：0247-36-3160

製 造 元：トミー工業株式会社

住 所：東京都練馬区田柄 3-14-17

電話番号：03-5987-3350

販売業者の連絡先

**【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

耐用期間 7 年 [自己認証(当社データ)による]