


器具器械 6 9 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科用フラスコ JMDN 42343000

マックフラスコ


【形状・構造及び原理】

1) 形状・構造


①正面図

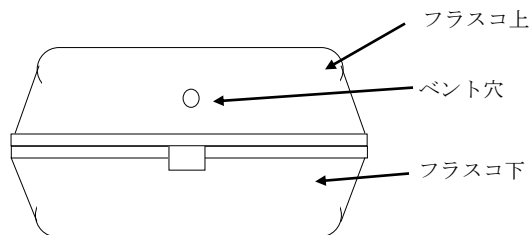

②上面図

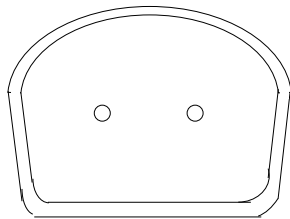

③スプルーキャップ

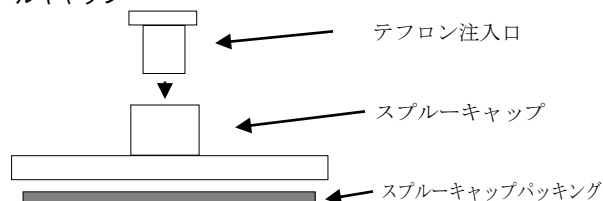

2) 材料：ステンレス・プラスチック・天然ゴム

3) 原理 石膏を保持する容器

【使用目的、効能又は効果】

重合用補綴物を成形する型を保持するための容器で、蠟型模型を石膏で埋没させて使用する。
歯科用床用重合樹脂の義歯を製作するための歯科用フラスコであり、樹脂の充填はプレス本体を使用して行う。

【品目仕様等】

外観：目立った傷及び損傷が無いこと、及び稼動部が正常に稼動すること。

仕様：1) 性能

①本体 寸法：大型サイズ 150(W)×150(D)×125(H)mm

標準サイズ 120(W)×120(D)×90(H)mm

スプルーキャップ 大型・標準

②付属品 テフロン注入口 スプルーキャップパッキング

③重量：大型サイズ 340g 標準サイズ 240g

④内部容量：大型サイズ 620cc 標準サイズ 390cc

【操作方法又は使用方法等】

- ①模型をフラスコ内にセットする。
 - ②上部から石膏を流し込む。
 - ③フラスコを分割し蠟を除去する。
 - ④パッキングを装着したスプルーキャップをフラスコ本体の上にセットする。
 - ⑤マックプレス本体にセットする。
 - ⑥フラスコ内に可塑性樹脂を充填する。
 - ⑦通法に従い重合する。
- 詳細な取扱方法は、取扱説明書を参照すること。

【使用上の注意】

- 1) 歯科医療有資格者かつ、器具の使用に熟知した者以外、使用しないこと。
- 2) 器具を使用する前の注意
 - ① 各部の稼動が正常に作動し、スムーズに動くことを確認すること。
 - ② 異物の付着、マウントゴムの破損等の不具合が無いことを確認すること。
- 3) 故障、不具合が発生時の注意
 - ① 直ちに使用を中止すること。
 - ② 勝手にいじらず適切な指示を行い、修理は専門家にまかせること。

【貯蔵・保管方法】

1)貯蔵、保管方法

- ① 水のかからない場所に保管すること。
- ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン成分が含まれた空気などによる悪影響が生ずる恐れが無い場所に保管すること。
- ③ 科学製品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- ④ 本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

2)使用後の注意

- ① 使用後は、石膏を除去し、付着している、ワックス・薬品等を除去し清掃すること。
- ② 石膏等の除去に、金属スパチュラ、金属たわし等、表面メッキ処理を傷つける恐れのある器具は使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ① 機器及び部品は、必ず定期点検を行うこと。
- ② しばらく使用しなかった機器を使用するときには、使用前に装置が正常且つ、安全に作動することを確認すること。
- ③ 破損、本体の変形があった場合、使用を中止すること。
- ④ 機器は次回の使用に支障が無いように、必ず清掃しておくこと。
- ⑤ 故障したときは、勝手にいじらず適切な指示を行い、修理は専門家にまかせること。弊社以外の修理業者へ修理を依頼した場合は、修理の対象箇所、回数に係らず一切の責任を負いかねます。

【包装】

本体上下 大型

本体上下 標準

スプルーキャップ 大型 テフロン注入口・パッキング 付

スプルーキャップ 標準 テフロン注入口・パッキング 付

【製造販売社及び製造業者の氏名、名称及び住所等】

製造販売業者名：東邦歯科産業株式会社

住所：〒336-0034

埼玉県さいたま市南区内谷 2-10-2

電話番号：048(864)2715

FAX番号：048(866)6969

e-mail：toho@jt7.so-net.ne.jp

許可番号：11B3X00060

取扱説明書を必ずご参照ください。