

機械器具 5 1 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 短期的使用口腔咽頭エアウェイ JMDNコード 70259000

エアウェイ（バーマン型）

【警告】**

適切な大きさのエアウェイを適切な位置に挿入すること。
[大きすぎるエアウェイや、不適切な挿入は軌道を閉塞
させることがあります]

【禁忌・禁止】

本製品は単回仕様の医療機器です、再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 洗浄した後、保管期間の長短に関わらず必ず乾燥をすること。
- (2) 高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。


【製造販売業社及び製造業社の指名又は名称等】

製造販売業者；：有限会社トキオン
TEL：03 (3813) 7240 FAX：03 (3813) 9188

製造：Plaxtron Industrial (M) Sdn. Bhd.（マレーシア）

総発売元：五十嵐医科工業株式会社
TEL：03 (3812) 6101 FAX：03 (3814) 7069

【形状・構造及び原理等】

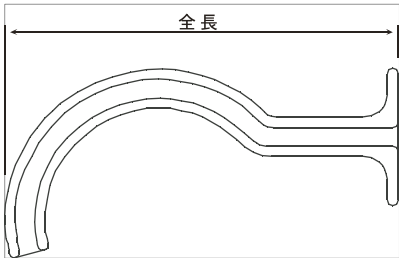

材質：ポリエチレン

バーマン型	50mm	全長 約 50 mm
バーマン型	60mm	全長 約 58 mm
バーマン型	70mm	全長 約 70 mm
バーマン型	80mm	全長 約 77 mm
バーマン型	90mm	全長 約 86 mm
バーマン型	100mm	全長 約 98 mm

【使用目的又は効果】

舌根沈下による気道閉塞を防ぎ、軌道を確保するために使用
する。

【使用方法等】

喉頭鏡もしくは舌圧子を用いて、沈下している舌根を挙上し、
その間にエアウェイを挿入する。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず洗浄及び消毒もしくは滅菌をすること。
- (2) オートクレーブによる滅菌はできません。
- (3) 本製品は単回使用の医療機器です、再使用しないでください。