

類別：機械器具 77 バイブレーター(JMDNコード:34662000)

管理医療機器 一般的名称 家庭用電気マッサージ器

販売名 MOMILUX8 シートマッサージャー


【警告】

- (1) 子供に使用させない及び本体の上で遊ばせたり、上に乗らせないでください。
- (2) 使用前の施療部の縫製品破れの有無の確認及び破れがあるときは使用を中止してください。
- (3) 次の人は、必ず医師と相談の上、ご使用ください。
 - 1) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - 2) 悪性腫瘍のある人
 - 3) 心臓に障害のある人
 - 4) 温度感覚喪失が認められる人
 - 5) 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
 - 6) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 7) 皮膚に創傷のある人
 - 8) 安静を必要とする人
 - 9) 体温38℃(有熱期)以上の人例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。
例2. 衰弱しているとき。
10) 骨粗鬆症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
11) 医師からマッサージを禁じられている人
例. 血栓(塞栓)症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む。)など
- (4) 湿気が多い場所やぬれた身体で使用しないでください。けがや事故の原因となります。
- (5) 使用後は必ず電源ボタンで動作を止め電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や事故の原因となります。
- (6) お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。また濡れた手で抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。
- (7) 絶対に分解したり修理、改造は行わないでください。発火や異常動作、けがの原因になります。

【禁忌・禁止】

- マッサージ以外の目的に使用しない。また頭、胸、腹、骨部(ひじ、ひざなど)へは使用しないでください。けがや事故の原因になります。
- 子供や自分で操作できない方は使用しないでください。また、幼児の手の届く範囲では使用しないでください。けがや事故、故障の原因になります。
- 本体の上に立ったりして使用しないでください。けがや事故、故障の原因になります。
- 金属や燃えやすいものを近づけないでください。感電やショート、火災の原因になります。
- ACアダプターは本品に付属しているもの以外は使用しないでください。
- 車での使用は、しないでください。

【形状・構造及び原理等】

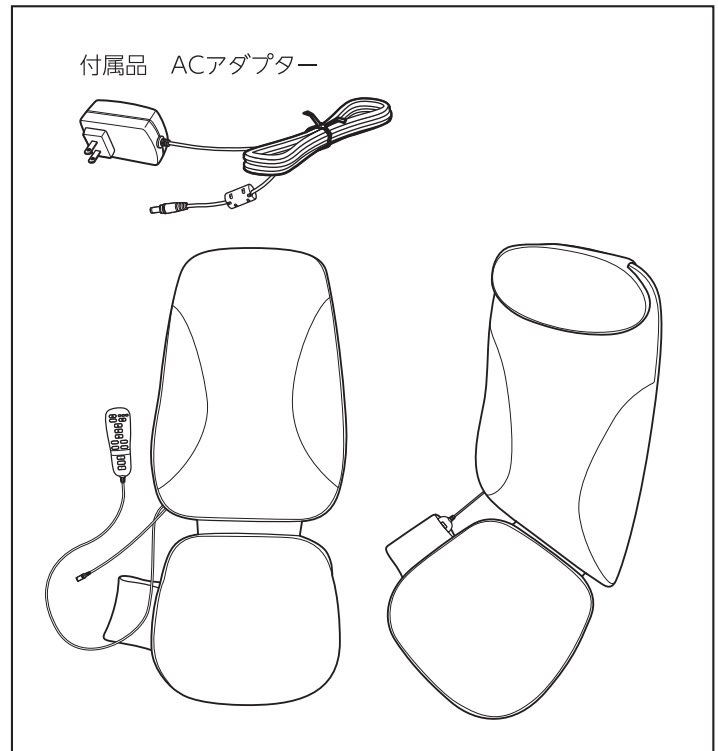

- 1) 機器構成
本体・リモコン・ACアダプター IVP1200-2500P・ヘッドレスト
- 2) 電気定格
電圧: AC100V 周波数: 50/60Hz 消費電力: 30W
- 3) 寸法及び質量
本体寸法
背面/(約) 幅42.5 x 高さ66.5 x 厚み13.5cm
座面/(約) 幅42.0 x 奥行36.0 x 厚み4.0cm
本体重量 (約) 5.1kg 本体のみ
- 4) 動作原理
本体の8つのもみ玉が肩から腰にかけてもみ機能及び指圧機能を持ち、臀部には振動機能がある。マッサージは、指定のもみ範囲を自動的に動くコースと指定場所にもみ位置を設定する手動コースがある。

【使用目的又は効果】

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用するもの。

類別:機械器具 77 バイブレーター(JMDNコード:34662000)
管理医療機器 一般的名称 家庭用電気マッサージ器
販売名 MOMILUX8 シートマッサージャー

【品目仕様】

要求事項	仕様	試験方法
もみ機能をもつ機器	31±3回/分	JIS T 2002 6.3
振動機能をもつ機器	3810±10%回/分	JIS T 2002 6.3
施療部移動機能をもつ機器	1.2～1.4cm/秒	JIS T 2002 6.4

【使用方法等】

1 準備

- 1-1 本体カバーが確実に装着され、破れなどがないことを確認する。
- 1-2 シートマッサージャーを椅子に固定します。
- 1-3 本体にACアダプターをセットします。
- 1-4 スイッチやタイマーボタンなどが正常に動くか確認してください。

2 マッサージ

- 2-1 入切ボタンを押して動作を開始させる。
- 2-2 もみコースボタンを押してもみ範囲を好みに操作する。
- 2-3 タイマーボタンでタイマー時間を設定する。
注意：1回の使用時間は20分以内とし、同一箇所への連続使用は避けてください。
- 2-4 もみ玉を温かくするときは、温感もみ玉ボタンを押してください。
- 2-5 座面のバイブレーションを使用するときは、おしりボタンを押してください。
- 2-6 タイマー設定時間で、マッサージが終了しますので、終了したら電源を切ってください。

【使用上の注意】

- ・ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をお読みください。
- ・1回の使用で20分以内とし、同一箇所への連続使用は避けてください。
- ・使用時間・使用頻度は、取扱説明書の指示を必ず守ってください。
- ・首回りをマッサージするときは、もみ玉の動きに注意し過度に強いマッサージを避けて下さい。
- ・疲労が激しい時・酒に酔っている時・湿疹がでている時のご使用はしないでください。
- ・食前・食後の使用は十分に時間を開けてご使用ください。
- ・アダプターのコードを傷つけたり、破損、加工、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ることはおやめください。
- ・重い物を乗せたり、挟み込むことはしないでください。
- ・コード類を取り外す時はコードを持って引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけないでください。
- ・火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- ・使用中は、眠らないでください。

【使用上の注意】

- ・停電の時はただちに電源を切り、操作部、スイッチなどを元の位置に戻してください。
- ・他の治療器と同時に使用しないでください。
- ・身体に異常を感じた際は使用しないでください。
- ・しばらく使用しなかった機器を使用するときは、機器が正常かつ安全に作動することを確認してください。
- ・もみ玉へ無理な力をかけたり、長時間の連続使用はしないでください。
- ・ストーブなどの火気の近くで使用しないで下さい。
- ・タバコを吸いながら使用しないでください。
- ・故障が見つかった場合は速やかに使用を中止してください。
- ・使用中に電源プラグを抜かないでください。
- ・お手入れの際は、シンナー・ベンジン・アルコール等の溶剤や薬品類、また熱湯は使用しないでください。
- ・浴室などの湿気が高い場所で使用しないでください。
- ・使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・お子様の手が届かないところに保管してください。
- ・お風呂などの水場や湿気の多い場所は避けてください。
- ・保管する際は高温多湿、直射日光のあたる場所は避けてください。故障や変形の原因になります。
- ※本商品はABS樹脂を使用し、生地も有害な素材は一切使用していません。廃棄される場合には各地域のゴミ処理規定に従ってアダプターと分離して燃えないゴミとして処分してください。

【包装】

本体 1台／箱

【取扱上の注意】

取扱を間違えると不具合を生じることがあるので、取扱説明書を参照の上、使用方法及び使用上の注意等を厳守してお使いください。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用者による保守点検事項
常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が認められた場合にはすぐに使用を中止し電源プラグを抜き、取扱説明書に記載されたドウシシャサービスセンターまたはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
また、お手入れの方法は取扱説明書を参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ドウシシャ
住所：東京都品川区東大井1-8-10 東京本社第一ビル
お客様サービスセンター：0120-104-481
製造販売業の許可番号：13B2X10174
外国製造業者：XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
住所：No.228 JIAOSONG ROAD,TAIWANESE INVESTMENT ZONE, ZHANGZHOU CITY,FUJIAN PROVINCE,P.R.CHINA
登録番号：BG10500179