

類別:機械器具 77 バイブレーター(JMDNコード:34662000)

管理医療機器 一般的名称 家庭用電気マッサージ器

販売名 **オットマン型フットマッサージャー**

ご使用の前に取扱い説明書等を必ず参照してください。

【警告】


- (1) 子供に使用させない及び本体の上で遊ばせたり、上に乗らせ
ないでください。
- (2) 使用前の施療部の縫製品破れの有無の確認及び破れがある
ときは使用 を中止してください。
- (3) 医師からマッサージを禁じられている人は、ご使用になら
ないでください。
例.血栓(塞栓)症, 重度の動脈瘤, 急性静脈瘤, 各種皮膚炎
および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む。)など
- (4) 医師の治療を受けてる人や、次の人は必ず医師と相談の上、
ご使用ください。
1)ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内
植込み型医用電気機器を使用している人
2)悪性腫瘍のある人
3)心臓に障害のある人
4)温度感覚喪失が認められる人
5)妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
6)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害の
ある人
7)皮膚に創傷のある人
8)安静を必要とする人
9)体温38℃(有熱期)以上の人
例1. 急性炎症症状[け(巻)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の
強い時期にある人。
例2. 衰弱している人。
1 0)骨粗鬆症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、
急性[とう(疼)痛性]疾患の人
1 1)けんしょう炎の人
- (5) 湿気が多い場所やぬれた身体で使用しないでください。
けがや事故の原因となります。
- (6) 使用後は必ず電源ボタンで動作を止め電源プラグを
コンセントから抜いてください。火災や事故の原因となります。
- (7) お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。
また濡れた手で抜き差ししないでください。感電やけがの原因に
なります。
- (8) 絶対に分解したり修理、改造は行わないでください。
発火や異常動作、けがの原因になります。

【禁忌・禁止】


- マッサージ以外の目的に使用しない。また頭、胸、腹、骨部(ひじ、ひざ
など)へは使用しないでください。けがや事故の原因になります。
- 子供や自分で操作できない方は使用しないでください。また、幼
児の手の届く範囲では使用しないでください。けがや事故、故障
の原因になります。
- 本体の上に立ったりして使用しないでください。けがや事故、故障
の原因になります。
- 金属や燃えやすいものを近づけないでください。感電やショート、
火災の原因になります。
- ACアダプターは本品に付属しているもの以外は使用しないで
ください。
- 車の運転中に使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

付属品
ACアダプター・電源ケーブル

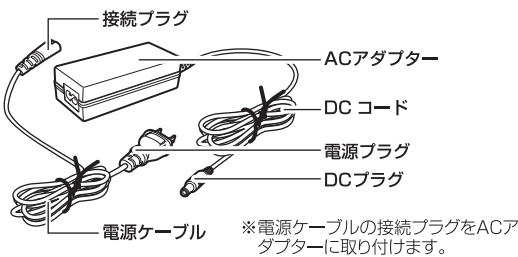

本体

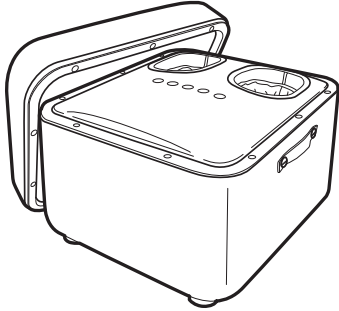

- 1) 機器構成
本体・ACアダプターCGSW65-240-2500 II
- 2) 電気定格
電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 消費電力:50W
- 3) 寸法及び質量
本体寸法
約 幅44×奥行38×高さ34cm
本体質量 (約) 10.83kg (ACアダプター含む)
- 4) 動作原理
本体のモーターにより回転ローラー(ヒーターランプ内蔵)を駆動し、
エアバックを内蔵ポンプにより流入する空気で膨らませ、施療部を
圧迫する家庭用電気マッサージ器。回転ローラー内部には加温機能が
ある。
- 5) 性能

項目	仕様	試験方法
圧迫機能を持つ機器	75.84KPa(±10%)	JIS T 2002:2018 5.1項
円柱側面刺激機能 を持つ機器	30(回/分)、モード1、エア強さ:強 30(回/分)、モード2、エア強さ:強 30(回/分)、モード3、エア強さ:強	JIS T 2002:2018 5.1項

【使用目的又は効果】
あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用するこ

類別:機械器具 77 バイブレーター(JMDNコード:34662000)
管理医療機器 一般的名称 家庭用電気マッサージ器
販売名 **オットマン型フットマッサージャー**

【使用方法等】

1. 使用前準備

- (1) 本体カバーが確実に装着され破れなどないことを確認する。
- (2) 本体にACアダプターをセットします。
- (3) 電源ボタン、モードボタン、強さボタン、温感ボタンなどが正常に動くか確認します。

2. 使用中

- (1) 足部に本体をセットし、電源ボタンをONにします。
- (2) 本体の回転ローラーが駆動し、足裏を刺激しながらエアバックが足を施療部に向かってゆっくりと圧迫→解放→圧迫を繰り返しながらマッサージを開始します。
- (3) 圧迫する強さを調整する場合は、強さボタンを連続して押下すると、弱(水色)⇒中(緑色)⇒強(紫色)の順に強さが切り替わりますので、お好みの強さへ調整してください。
- (4) モードを切り替える事により、回転ローラーとエアバックによる押圧タイミングが変わりますので、お好みのモードで施療してください。
- (5) 温感モードをONにすると、もみ玉内のランプヒーターが点灯し、温めながら施療することができます。
- (6) 緊急停止ボタンを押すことで全ての機能を停止することができます。

3. 使用後

タイマーは、15分でマッサージが終了します。終了したら電源を切ってください。

【使用上の注意】

- ・ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をお読みください。
- ・1回の使用で15分以内とし、同一箇所への連続使用は避けてください。
- ・1日のご使用は3回までとしてください。
- ・使用時間・使用頻度は、取扱説明書の指示を必ず守ってください。
- ・疲労が激しい時・酒に酔っている時・湿疹がでている時のご使用はしないでください。
- ・食前・食後の使用は十分に時間を開けてご使用ください。
- ・アダプターのコードを傷つけたり、破損、加工、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ることはおやめください。
- ・重い物を乗せたり、本体の上に立ち上がったりしないでください。
- ・コード類を取り外す時はコードを持って引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけないでください。
- ・火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- ・使用中は、眠らないでください。
- ・停電の時はただちに電源を切り、操作部、スイッチなどを元の位置に戻してください。
- ・他の治療器と同時に使用しないでください。
- ・身体に異常を感じた際は使用しないでください。
- ・しばらく使用しなかった機器を使用するときは、機器が正常かつ安全に作動することを確認してください。
- ・エアバックへ無理な力をかけたり、長時間の連続使用はしないでください。
- ・ストーブなどの火気の近くで使用しないで下さい。
- ・タバコを吸いながら使用しないでください。
- ・故障が見つかった場合は速やかに使用を中止してください。
- ・使用中に電源プラグを抜かないでください。
- ・お手入れの際は、シンナー・ベンジン・アルコール等の溶剤や薬品類、また熱湯は使用しないでください。
- ・浴室などの湿気が高い場所で使用しないでください。
- ・使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・お子様の手が届かないところに保管してください。
- ・お風呂などの水場や湿気の多い場所は避けてください。
- ・保管する際は高温多湿、直射日光のあたる場所は避けてください。故障や変形の原因になります。
- ※廃棄される場合には各地域のゴミ処理規定に従ってアダプターと分離して燃えないゴミとして処分してください。

【取扱上の注意】

取扱を間違えると不具合を生じることがあるので、取扱説明書を参照の上、使用方法及び使用上の注意等を厳守してお使いください。

【保守・点検に係る事項】

・使用者による保守点検事項

常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が認められた場合にはすぐに使用を中止し電源プラグを抜き、取扱説明書に記載されたドウシシャサービスセンターまたはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
また、お手入れの方法は取扱説明書を参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社ドウシシャ

住所:東京都品川区東大井1-8-10 東京本社第一ビル

お客様サービスセンター:0120-104-481

製造販売業の許可番号:13B2X10174

外国製造業者:XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD

住所:No.228 JIAOSONG ROAD, TAIWANESE INVESTMENT ZONE, ZHANGZHOU CITY,FUJIAN PROVINCE,P.R.CHINA

登録番号:BG10500179