

類別：機械器具 83 医療用物質生成器
管理医療機器 一般名称：連続式電解水生成器（JMDNコード 71024000）

レベラック K8

【警告】

本製品は重量物であり、化学的な物質を生成することから製品の転倒による人身への損傷や製品及び製品周辺物の損壊や酸性電解水生成時に発生する塩素ガスによる中毒等の危険があります。以下の事を必ずお守りください。


- 1) 本体の上に物を置かないで下さい。故障又は、落下事故の原因となることがあります。
- 2) 吐水ホースはふさがず、ネジレ、折れのないことを確認してください。（水漏れ又は電解に支障をきたすことがあります。）
- 3) 吐水ホースは本体より上に設置しないでください。本体内部の残水排出ができなくなります。
- 4) 閉め切った狭い部屋での使用はお避け下さい
- 5) 飲用して身体に異常を感じたとき、または飲用し続けても症状に改善が見られない時は、飲用を中止し、医師に相談してください。
- 6) 医師の治療を受けている人、特に腎臓に障害のある人および、身体に異常を感じている人は、飲用前に医師に相談してください。
- 7) ミルクや乳児用食品に還元水を使用しないでください。

【禁忌・禁止】

- 1) 医薬品をアルカリ性電解水で併飲しないでください。
- 2) じん（腎）不全、カリウム排泄（泄）障害などのじん（腎）疾患の人は飲用しないでください。
- 3) 次のような水は飲まないでください。体調を損なうことがあります。
 - 強酸性水 ○pH（ペーハー）測定液の入った水
 - 酸性水 ○強酸性水生成時の強還元水
 - クリーニング中の水 ○吐水ホース（パイプ）から排出される水

【形状・構造及び原理等】

本製品は、水道などに直結し流水過程においてカルシウムイオンを含んだ飲用適の水を電気分解して、アルカリ性電解水及び酸性電解水を生成する家庭用に設計されたアルカリ性電解水生成器である

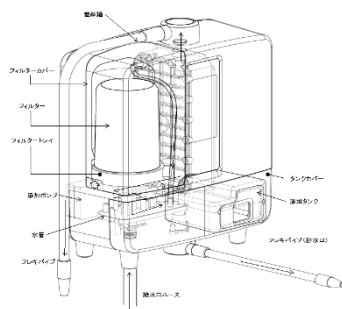

取扱説明書を必ず参照してください。

(1) 本体

- 寸法：幅 280×高さ 345×奥行き 147 (mm)
重量：約 5.0 kg（浄水カートリッジを含む）
外郭：フロントキャビネット、リアキャビネット、ボトム、キャビネット、フィルターカバー、タンクカバー、インプット基板ケース、LCD保護パネル、パネルシート
水系統：給水ホース、水管、浄水フィルター、フィルター、トレイ、電解槽、電解促進液タンク、フレキシブルホース、吐水ホース
電気系統：電源インレット、ヒューズ、ヒューズホルダー、電源基板、制御基板、インプット基板、LCDタッチパネル、流量センサー、熱水センサー、リングポンプ、マイクロスイッチ

(2) 付属品

pH試験液・pH試験紙セット、分岐栓・アダプターセット、電解促進液、取扱説明書、電源コード、クリーニングタンク、クリーニングパウダー、クリーニングキャップ

【使用目的、効能又は効果】

胃腸症状改善のための飲用アルカリ性電解水を生成する。
一般家庭で使用する。

【使用方法等】

(1) 使用の準備

- ① 蛇口に分岐栓を取り付ける。
- ② 給水ホースを分岐栓に取り付け、吐水ホースを流し台シンク部に配設する。
- ③ 平らな場所に出来るだけ水平となるように本体を設置する。
- ④ 電源コードのプラグをコンセントに確実に差し込む。

(2) 操作方法

- ① LCDタッチパネルに触れるとLCDが点灯する。
- ② アルカリ性電解水 pH9.5・pH9.0・pH8.5または、酸性電解水 pH6.0、強酸性水 pH2.5、浄水 pH7.0 のモードをタッチし選択する。
- ③ 専用分岐栓の切り替えを「浄水」位置にあわせる。
- ④ 蛇口を開ける。
- ⑤ アルカリ性電解水モードの場合はフレキパイプより弱アルカリ性電解水が吐出する。
酸性電解水モードの場合には、フレキパイプより弱酸性電解水が吐出し、ブザー音が鳴る。

浄水モードの場合には、フレキパイプより浄水が吐出する。

- ⑥ 水道の蛇口を閉めると、吐出が止まり待機状態に戻る。
- ⑦ 使用終了時には、ユーザが設定したオート OFF 時間経過後、LCD が消灯する。

【使用上の注意】

（１）飲用について

- ① 強還元水（アルカリ性電解水）を飲用に用いるときは、pH9.5 を適値とし、pH10 以上は飲用不可であり直接飲用しないでください。
- ② 酸性水（酸性電解水）は飲用しないで下さい。
- ③ 飲用して身体に異常を感じたとき、又は飲用し続けても症状に改善が見られないときは、飲用を中止し、お医者様に相談してご使用ください。
- ④ 初めて飲用する方は、pH の中性に近い範囲で、少量から飲用ください。還元水（アルカリ性電解水）の飲用量は、1 日当たり 500～1 000 mL 程度を適量として使用ください。

（２）適用対象（患者）

- ① じん（腎）臓に障害があるかた及び、身体に異常を感じているかたは飲用前にお医者様に相談してください。
- ② 肌の弱い人及びアレルギー体質の人はサンセイ水（酸性電解水）を使用する前にお医者様にご相談してください。

（３）使用方法

- ① 還元水（アルカリ性電解水）を飲用に用いるとき、使用開始時と、その後 1 か月に 1 回以上、比色法によって pH 値を確認し、飲用範囲であることを確認してから飲用ください。
- ② 機器に供給する水は、飲用適の水を使用ください
- ③ 電解促進液、グリセロリン酸カルシウム等補助剤を使用する場合は、指定されたものを使用し、添加量、添加場所をお守りください。
- ④ 指示薬溶液及び pH の確認に使用した生成水は飲まないように願います。
- ⑤ 電源コードは容易に離脱しないように正しく確実に接続されていることを確認して使用ください。

【取扱上の注意】

消耗品、残留物など、並びに寿命の終わった機器及び付属品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

（１）保管方法

温度湿度に関する保管基準は一般家庭で使用されることを想定しています。4℃以下、60℃以上の温度や20%以下、80%以上の湿度での保管はご遠慮ください。

（２）有効期間

- ① アルカリ電解水、酸性電解水ともに電極材料の

使用可能期間が有効期間となります。想定される使用期間については、取扱説明書に従って対処ください。

- ② 浄水器のみの寿命については、取扱説明書に従ってご使用ください。

【保守・点検に係る事項】

（１）アルカリ性電解水の pH 値の確認

アルカリ性電解水を付属の pH 試験液セットの専用カップに深さ 2 cm 程度とり、付属の pH 試験液を 1～2 滴加えて良く混ぜ合わせ、直ちに付属の比色紙表を用いて比色して pH 値を確認する。

（２）洗浄機能

機器には以下の洗浄機能が設定されています。

- ① 還元水・酸性水の使用時間が積算 10 分以上経過し、止水すると約 10 秒間電気分解の極性を反転し電解槽の洗浄を行う。
 - ② 強酸性水を使用し還元水・酸性水に移行すると約 30 秒間電気分解の極性を反転し電解槽の洗浄を行う。
 - ③ 24 時間以上使用しなかったときも 30 秒間電気分解の極性を反転し電解槽の洗浄を行う。
- いずれの場合もブザー音と LCD による表示にて洗浄中であることをお知らせいたします。

（３）故障した場合の取扱い方法

故障した場合は勝手にいじらず、販売店もしくは弊社（株）エナジックに連絡願います。

（４）長時間使用しない時の機器の取扱い

設置後数日間以上使用しなかった場合は 30 秒以上水を流してから使用願います。

（５）お客様で行っていただく機器の清掃、点検、保守

- ① 浄水カートリッジは半年に一度交換下さい。
 - ② 水の電気分解を補助する為にカルシウムを原水に添加する場合には、専用のタンクにカルシウム剤と水を入れタンクのキャップをしてからよく振り混ぜ合わせ製品本体のタンクカバーを取り外し所定の場所にセットしタンクカバーを取り付けて下さい。
- その後タッチパネルのメイン画面の設定からミネラル添加を選択してください。

【主要文献および文献請求先】

株式会社エナジックインターナショナル
住 所 : 大阪府交野市星田北一丁目 40 番 1 号
電 話 : 072-893-2290

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社エナジックインターナショナル
住 所 : 大阪府交野市星田北一丁目 40 番 1 号
電 話 : 072-893-2290