

類 別：機械器具 9 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
 一般医療機器 一般の名称：X線平面検出器 JMDNコード：70029000

特定保守管理医療機器

X線フラットパネルディテクタ FDX3334RF


【形状、構造及び原理等】

1. 構成


- (1) センサユニット
- (2) 制御ユニット
- (3) 電源ユニット

2. 各部の名称


(1) センサユニット

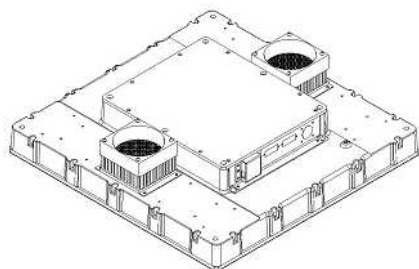

(2) 制御ユニット

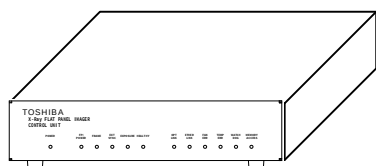

(3) 電源ユニット

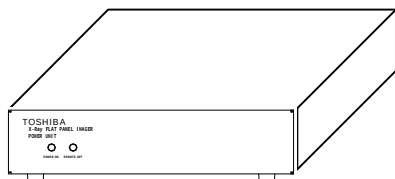

3. 電氣的定格

(1) 電源定格

入力電圧 AC100～240V
 電源周波数 50/60Hz
 消費電力 100VA

(2) 電撃の危険に対する保護

電撃の危険に対する保護の形式 クラスⅠ

(3) 電磁両立性の規格

本装置は、JIS T0601-1-2 に適合しています。


4. 寸法および質量

単位 寸法；mm、質量；kg

- (1) センサユニット
435 (幅)、426 (奥行)、106 (高さ)、20 (質量)
- (2) 制御ユニット
264 (幅)、201 (奥行)、60 (高さ)、3 (質量)
- (3) 電源ユニット
264 (幅)、201 (奥行)、60 (高さ)、3 (質量)

5. 原理

- (1) X線管焦点から放射されたX線は被写体を透過し、X線フラットパネルディテクタの入力蛍光面にX線像を作ります。
- (2) X線像は入力蛍光面で光像に変換され、フォトダイオード・TFTアレイ部で電荷の大小に変換されて、画素ごとに蓄積されます。
- (3) TFTスイッチの選択信号に応じて、画素ごとの電荷が順次読み出され、電圧信号処理部にて電圧信号に変換・増幅・デジタル化されます。
- (4) デジタル化された信号は制御ユニットに送られ、画像信号となります。
- (5) 画像信号は画像補正処理され、光信号に変換され光出力端子から出力されます。

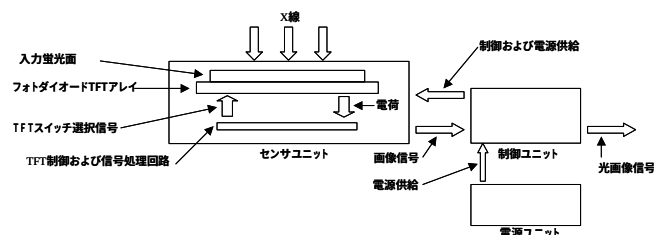

【使用目的、効能又は効果】

平面状のX線入射面をもち、人体を透過したX線を検出し画素毎に電気信号に変換し、順次外部にデジタル形式で出力するX線検出器をいいます。入射するX線は、蛍光体又は光導電体によって吸収され、画素毎に内部で電気信号に変換された後、順次外部にデジタル形式で出力されます。電子管方式の検出器に比べて小型であり、平面状の入射面をもつことを特徴とします。主にX線透視撮影診断装置で使用されます。

【品目仕様等】

項 目	仕 様	適合規格
解像度	3.4 lp/mm 以上	JIS Z 4721:2000 7.8 項を参考とした自社基準による。
量子検出効率 (DQE)	70%以上	IEC62220-1-3:2008 を参考とした自社基準による。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

(1) 使用環境条件

使用時温度	: 10 ~ 35℃
使用時相対湿度	: 30 ~ 85%
使用時気圧	: 70 ~ 106 kPa

(2) 組み合わせて使用する医療機器

本装置はX線透視撮影診断装置などに組み込んで透視、撮影に使用します。操作方は組み込んで使用する装置の取扱説明書を参照してください。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

本装置に異常が生じた場合には、直ちに電源を切断して使用を中止し、組み込んで使用する装置メーカーに連絡してください。

【使用上の注意】

<警告>

X線フラットパネルディテクタは寿命、あるいは不測の故障により、突然動作が停止する場合があります。本装置の使用にあたっては、動作停止が患者の危険をまねく恐れがあることを十分考慮の上使用してください。

<禁忌・禁止>

- (1) 本装置の使用にあたっては不必要なX線の照射を避けてください。
- (2) 引火性ガスや有毒なガスにさらされる雰囲気中では使用しないでください。
- (3) 患者を危険な状態にすると判断された場合は、検査を行わないでください。

<重要な基本的注意>

- (1) 最大透視管電圧は、下記の値を越えないでください。電源電圧の変動などにより、この値を超えて使用することのないように、余裕をもった低めのX線管電圧で使用してください。

最大透視管電圧: 125 kV

- (2) 本装置は、X線入射線量率によっては使用不能になる恐れがあります。下記の最大X線入射線量率を超えないようにご注意ください。

最大X線入射線量率: $8.73 \times 10^{-3} \text{ Gy/min}$ [1R/min]

- (3) 本装置は入射するX線量に応じて感度設定を行ってください。

- (4) 本装置は下記の「X線管焦点とX線フラットパネルディテクタX線入射面の最小距離」および上記の「最大透視管電圧」を遵守してください。また、本装置のX線入射面近傍からのX線漏洩を防止するため、本装置X線入射面へのX線照射野は取扱説明書 (Technical Data) で指定する有効視野寸法内に制限してください。

X線管焦点とX線フラットパネルディテクタX線入射面の最小距離: 73cm

- (5) 本装置の各ユニットの保護接地端子にはアース線を確実に接続し、必ず接地してから使用してください。
- (6) 指定以外の電源を使用すると感電や火災の原因となります。指定された電源以外は使用しないでください。
- (7) 本装置の近くでは、携帯電話等の電波を発する機器のスイッチは必ず切ってください。機器が発する電波により装置が誤動作したり、画像に影響が出たりすることがあります。

<その他の注意>

- (1) 本装置にはガラスが用いられています。また、本装置には精密電子部品も用いられています。運搬や取扱の際には衝撃、振動を与えないよう注意してください。
- (2) 輸送する場合、本装置が破損しないように、出荷時に施した包装または同等の包装を使用してください。
- (3) 本装置の筐体内部にはX線遮蔽のため鉛が貼られています。鉛の粉末、蒸気は人体に入り込むと有害であるため本装置の廃棄は法令に従って処分してください。
- (4) 本装置についているねじ類は強度管理をしてねじ込まれていますので絶対にゆるめたり、外したりしないでください。

- (5) 筐体の加工は強度の低下、故障などの原因となりますので絶対に行わないでください。
- (6) 本装置の電子部品の改造は画像の劣化、故障などの原因となりますので絶対に行わないでください。
- (7) 本装置には冷却用ファンが使用されています。ファンおよび通風口を塞がないようにしてください。
- (8) 本装置のX線入射面は薄いカーボン樹脂 (CFRP) で作られています。このため、X線入射面は衝撃や力を与えないでください。また、被検者や被写体がX線入射面に直接触れないようにしてください。
- (9) 警告ラベルは本装置を安全に使用するために必要です。絶対に剥がさないでください。
- (10) 本装置は、X線管装置と組み合わせて使用するため、X線作業の法的有資格者のみ使用してください。また、組み込み、調整、保守、点検には十分な専門知識を有する技術者、または専門のサービス担当者が取扱うようにしてください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

輸送及び保管条件

輸送及び保管温度	: -15 ~ 55℃
輸送及び保管相対湿度	: 10 ~ 90%
輸送及び保管気圧	: 50 ~ 106 kPa

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

日常点検

電源を入れる前に、配線、外観等に異常がないことを確認してください。また、使用環境条件が適切であることを確認してください。

電源を入れた後は、動作が正常であることを確認した後、使用してください。

詳しくは組み込んで使用する装置の取扱説明書を参照してください。

<業者による保守点検事項>

1年を超えない一定期間ごとに、組み込んで使用する装置製造業者等による定期点検を行ってください。詳しくは組み込んで使用する装置の取扱説明書を参照してください。

【包装】

ダンボール箱による個装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: 東芝電子管デバイス株式会社
住所: 〒324-8550
栃木県大田原市下石上1385番地
TEL: (0287) 26-6531
製造業者: 東芝電子管デバイス株式会社