

類別：機械器具 78 家庭用電気治療器
管理医療機器 一般的名称：家庭用温熱治療器（JMDN コード 71017000）
リブホット

＊【禁忌・禁止】

次の人は、医師と相談の上、ご使用ください。

- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・温度感覚の喪失が認められる人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- ・安静を必要とする人
- ・体温 38℃以上の人

例 1：急性炎症症状「倦（けん）怠感、悪寒、血圧変動など」
の強い時期

例 2：衰弱しているとき

- ・脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性疾患の人
- ・低温やけどをしたことのある、または、おそれがある人
- ・子供には使用させないでください。（保護者または専門家の指導
下で使用する場合は、その限りではない。）

（４）作動原理

パッドに内蔵した発熱体に交流電源を供給することで電気エネルギーを熱に変換し、この熱をパッドを介して身体に伝えて治療します。パッドの温度を検知する機能を有し、電気エネルギーの供給量を可変することで温熱パッドの温度を調節する温度調節機能を有しています。

【使用目的又は効果】

電熱による温熱効果。一般家庭で使用する。

【使用方法等】

ご使用に当たっては、取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。

使用時間又は使用頻度は、1 部位に対して 1 日 1 回、60 分以内にしてください。

1 使用前準備

（１）各部構成部品に異常がないことを確認して下さい。

（２）操作つまみ、ダイヤル、スイッチ等が正常に作動することを確認してください。

（３）電源コードを AC100V コンセントに正しく接続して下さい。

2 使用開始

（１）人体に固定する部位に合ったバンドの大、小を選定し、パッドを人体に正しく固定して下さい。

（２）タイマーの設定（15 分、30 分、60 分）を行ってから本体の電源を入れて下さい。その後、温度調整を行って下さい。

3 使用終了

（１）タイマーの設定時間が経過すると温熱パッドの加温が終了し、選択したタイマーの表示灯（緑）が消灯します。


（２）電源スイッチを切して下さい。電源表示灯（橙）が消灯します。

4 異常発生

（１）温度過上昇を検知した場合、出力が停止します。

【形状・構造及び原理等】

（１） 本体

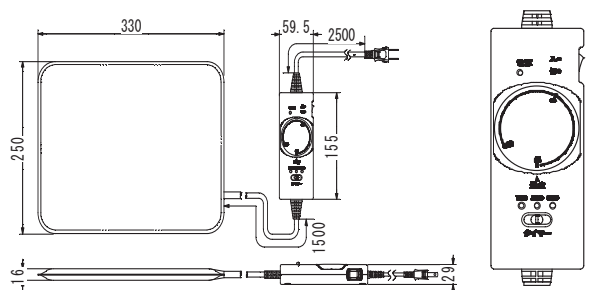

単位：mm ±10%の寸法誤差があります。

（２） 付属品

	A	B
バンド大	1200	100
バンド小	600	100

単位：mm ±10%の寸法誤差があります。

（３） 電氣的定格

- 1) 定格電圧 AC100V
- 2) 定格周波数 50/60Hz
- 3) 定格消費電力 30W
- 4) 感電に対する保護の形式 クラス 0 機器
- 5) 水の浸入に対する保護 IPX1 パッド

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【使用上の注意】

（１）使用環境および使用条件

- 1) 浴室など湿気の高い所、水のかかりやすい所での使用は危険ですでおやめください。
- 2) 低温やけどのおそれがありますので、睡眠薬等を服用した人酩酊状態の人は使用しないでください。
- 3) 身体の自由の利かない人、幼児には、付き添いなしでは使用しないでください。
- 4) 治療目的以外には使用しないでください。
- 5) 他の治療器と同時に使用しないでください。
- 6) しばらく使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。
- 7) 本体および付属品にピンを刺したり、刃物で傷をつけたりしないでください。
- 8) パッドが濡れている場合には使用しないでください。
- 9) 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。
- 10) 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 11) 本品の使用によって発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には、使用を中止し、医師に相談してください。

＊＊12) 本製品は一人用です。複数の人では同時に使用できません。

＊＊13) 本製品の導子（パッド）は、皮膚に直接当てず衣服や布等を介して使用してください。

（２）使用前の注意事項

- 1) しばらく使用しなかった時には、もう一度、取扱説明書をよく読み、正常に、かつ安全に作動するか確認してからご使用ください。
- 2) 操作つまみ、ダイヤル、スイッチ、タイマーなどが正しく作動するか確認してください。
- 3) パッドを正しく装着してください。

（３）使用中の注意事項

- 1) 使用中に身体の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師もしくは販売店までご連絡ください。
- 2) 機器に異常又は故障が発見された場合、すぐ使用を中止し、電源を切り、弊社までご連絡ください。
- 3) 低温やけどのおそれがありますので、温度調節が高めの目盛りで、長時間使用しないでください。
- 4) 停電のときは直ちに電源を切り、操作つまみ、ダイヤル、スイッチなどを元の位置に戻してください。
- 5) パッドを強制的に曲げたり、丸めたり、無理な状態にして使用しないでください。

（４）使用后および保管の注意事項

- 1) 使用後は必ず操作つまみ、ダイヤル、スイッチなどを元の位置に戻した後、電源を切ってください。

- 2) コード類を取り外す場合は、コードを持って引き抜くなどしコードの接続部に無理な力をかけないでください。

- 3) 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ない所に整理、保管してください。

- 4) お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。

（５）機器の故障及び改造の注意事項

- 1) 機器に故障が発見された場合は、勝手にいじらず、販売店までご連絡ください。

- 2) 改造は絶対にしないでください。

- 3) サービスマン以外の人は、分解したり、修理しないでください。

（６）取扱上の注意事項

- 1) 取り扱いを間違えると不具合を生じることがあるので、使用方法、使用上の注意などを厳守してください。

【保守・点検に関わる事項】

- （１）常に使用前後の点検を励行し、故障または異常が認められた時には販売店にお問い合わせください。
- （２）パッドの損傷または断線があるときは使用を中止し、修理してください。
- （３）故障した場合は、勝手にいじらず、販売店に連絡してください。
- （４）機器は改造しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

トヨスター株式会社

TEL 048-770-3531

製造業者

トヨスター株式会社関東工場