

## カフチェッカーキッズ

### 【警告】

- ・本品の使用前に、この添付文書の全てを熟読すること。
- ・本品は、医師および医師の指示を受けた医療従事者のみが使用すること。

### 【禁忌・禁止】

- ・接続チューブは同一患者に対してのみ使用し、再使用禁止。使用後は廃棄し、再滅菌したり再使用したりしないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造等


本品は、大容量・低圧カフ付きの気管内チューブ又は気管切開チューブと併用し、カフの拡張、収縮及びカフ内圧を制御するためのインフレーターである。

#### 1) 構成

- (1) 本体
- (2) 接続チューブ（付属品）


#### 2) 形状

- (1) 本体

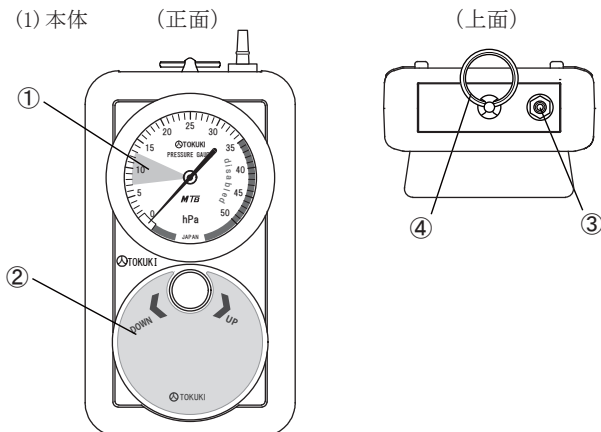

- ① 圧力計
- ② ポンプ駆動ハンドル
- ③ ルアー接続部
- ④ 吊り具

#### (2) 接続チューブ

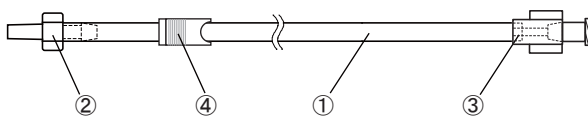

- ① チューブ（約 100cm）
- ② ルアースリップコネクタ（気管チューブ側）
- ③ ルアーロックメスコネクタ（本体側）
- ④ 開閉クランプ

### 【使用目的、効能又は効果】

気管内チューブ又は気管切開チューブが体内にある場合、チューブのカフに空気を注入するために用いる。空気を送るポンプと、カフの過膨張を防ぐために圧力を表示する圧力計を備えている。

### 【品目仕様等】

1. 測定範囲：0～35hPa
2. 測定精度：±2hPa（5～35hPa）
3. リーク：-1.5hPa 未満（40hPa で 3 分間放置した場合）

### 【操作方法又は使用方法等】

1. 本体に接続チューブを取り付け、開閉クランプを閉じる。
2. 圧力計が 30hPa を示すまでポンプ駆動ハンドルを時計方向に回して加圧し、加圧した値が 2～3 秒間維持されることを確認する。

本品の使用前に、カフに異常がないことを確認すること。挿管及び抜管の際には、あらかじめシリンジ又はバキュームを用いてカフの空気を完全に抜くこと。

3. 接続チューブを介して気管内チューブ又は気管切開チューブのカフインフレーションラインを接続する。次に、開閉クランプを開く。
4. ポンプ駆動ハンドルを時計方向に回して 30～35hPa までカフを拡張させる。これによりカフが気管壁と密に接触した状態となる。
5. すぐにポンプ駆動ハンドルを反時計方向に回して、圧力計の目盛が緑色の範囲内に入るまで空気を放出し調整する。
6. 所定のカフ圧に調整したら、気管チューブ側のコネクタを外す。
7. 気管チューブのカフインフレーションラインに接続することにより本品はモニターとしての機能をする。圧力上昇をモニターしたり、ポンプ駆動ハンドルを回すことにより調整することができる。

穿刺または肺炎のリスクがあるため、体内に入った際のカフ内圧 7hPa 以上が推奨される。また気管粘膜の虚血症のリスクのため、13hPa 以下を推奨する。

5～35hPa の範囲において測定精度は ±2hPa である。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 1) 本品と併用する医療機器に関しては、その医療機器に付属の添付文書等を参照すること。
- 2) 医師の指示以外で使用しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. クリーニング

本体のクリーニングは必要に応じて行うこと。柔らかく毛羽立ちのない布を用い、石けん水で湿らせて拭き上げること。本品を液体に浸さないこと。本品の表面の消毒清拭の際は、市販のアルコール性消毒液で拭き上げること。本品は、滅菌したり機械的に洗浄することはできない。

### 【包装】

本体：1 個／箱

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：トクソー技研株式会社

住所：〒879-0232 大分県宇佐市大字大根川 318 番地

電話番号：0978-33-5595

取扱説明書を必ずご参照ください。