

2014年12月 1日 改訂（第6版）
 2016年12月 1日 改訂（第7版）
 2019年 9月 1日 改訂（第8版）

機械器具 80 はり又はきゆう用器具
 一般医療機器 非能動型接触鍼 JMDNコード70613001


SOMARESON (ソマレゾン)

ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように保管してください。

長時間のご使用はかぶれの原因になります。
 かゆみ等を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
 当社では、最長12時間以内のご使用を推奨しています。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

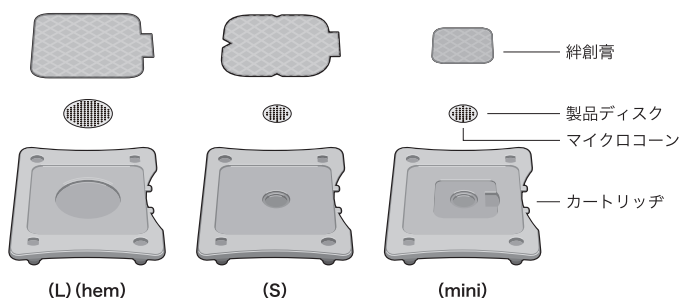

【使用目的、効能又は効果】

外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果を促進するため皮膚内に挿入せず、皮膚への接触によって末梢神経を刺激する非能動型器具をいう。

【品目仕様等】


	タイプ			
	L	S	mini	hem
製品ディスクの原料	樹脂			
カートリッジ原料	樹脂			

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- (1) 貼る前に、汗などをよく拭いてください。
- (2) 痛みのある部位周辺を指で押します。
 その中でも、より痛いと感じる点や、気持ちいいなと感じる点に貼ってください。

※絆創膏はカートリッジから、ゆっくりと取ってください。

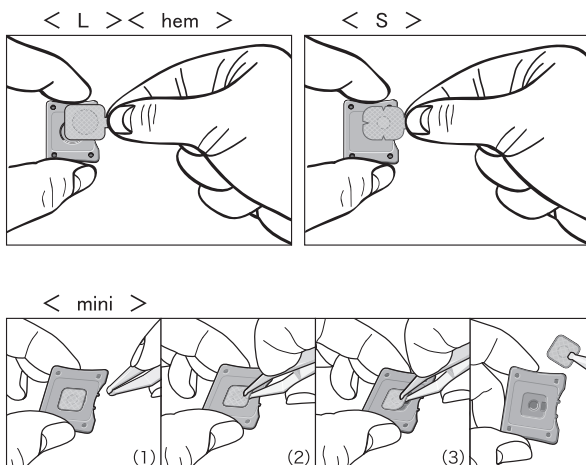

【使用上の注意】

1. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家とご相談の上ご使用ください。
 - (1) 悪性腫瘍のある方
 - (2) 妊娠している方
 - (3) 救急治療や手術を必要としている方
 - (4) 湿疹、皮膚炎のある方
 - (5) 貼付箇所に感染症又は創傷のある方
2. 他の医療機器と同時に使用しないでください。
3. 使用する前には次のことにご注意ください。
 - (1) 本品に異常がないか確認してからお使いください。
4. 使用中には次のことにご注意ください。
 - (1) 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
 - (2) 貼付部に、発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止して下さい。
 - (3) かぶれ防止のため、当社では、12時間以内のご使用を推奨しています。
5. 使用後には次のことにご注意ください。
 - (1) 使用後は、誤飲等防止のため、すぐに捨ててください。
 - (2) 破棄方法は、お住いの区市町村の破棄方法に従って破棄してください。
 - (3) マイクロコーンは微細な突起となっております。1回のご使用で、マイクロコーンが曲がったり、皮脂などが付着し目詰まりし、本来の性能が発揮できないことが考えられます。製品のご使用は単回限りのご使用を推奨いたします。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 水濡れ、直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。

2. LOTナンバー

- (1) LOTナンバーは外箱に記載しています。

3. 使用期限

- (1) 使用期限は外箱に記載しています。

【包装】

	タイプ			
	L	S	mini	hem
1箱 100個入	○	○	○	○
1箱 10個入	○	○	○	○

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：東洋レヂン株式会社
 住 所：〒419-0201 静岡県富士市厚原2104-1
 電 話 番 号：0545-71-2023
 受付時間 平日 9時～17時

製造業者：東洋レヂン株式会社 比奈工場
 住 所：〒417-0847 静岡県富士市比奈1929-2

☐ **SOMANIKS** オフィシャルサイト

<http://somaniks.jp>