

2018年12月6日作成

医療機器製造販売届出番号 22B3X10002000008

器具器械 80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 非能動型接触鍼 JMDNコード 70613001

SOMASTICK® (ソマスティック)

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

【ソマスティックについて】

- ソマスティックは皮膚刺激を与えるための器具です。
- 若草色の柄の部分を持ち、痛みやコリのある部分を中心に、突起部で皮膚を軽くトントンと刺激して下さい。
- 突起の太さが2種類あり、お好みの刺激の強さを選べます。〈黄色:太/ピンク色:細〉
- 皮膚刺激を与える際には、強く押し当て過ぎない様、フルボトムでの押圧は避け下さい。

【品目仕様】


項目	製品
柄	ポリエチレン
突起部	ポリプロピレン
パネ	ポリプロピレン
製品長	86mm

カラーコード

項目	カラー
柄	若草色
突起部(太)	黄色
突起部(細)	ピンク色

【使用目的、効能又は効果】

ソマスティックは皮膚から接触し外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果を促進するため、皮膚内に挿入せず、皮膚への接触によって末梢神経を刺激する非侵襲式器具である。

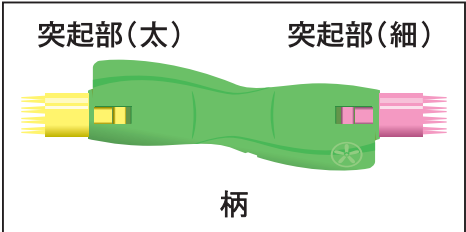

【禁忌】

妊婦、悪性腫瘍、出血性疾患のある患者には使用しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に適用すること。

【貯蔵と使用期限】

- ソマスティックは梱包状態のまま使用までの間、湿気を避けて保管して下さい。
- 小児及び監督を必要とする方の手の届かない場所に保管して下さい。
- 直射日光や水漏れ、化学物質との接触は避けて下さい。
- 使用期限は製品箱側面に表示しています。使用期限をお守りください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：東洋レヂン株式会社 受付時間 平日9時～17時
住 所：〒419-0201 静岡県富士市厚原2104-1
電 話 番 号：0545-71-2023(代表)

製 造 業 者：東洋レヂン株式会社 比奈工場
住 所：〒417-0847 静岡県富士市比奈1929-2

■ SOMANIKS オフィシャルサイト <http://somaniks.jp>

【使用上の注意】

- 梱包箱が著しく破損していた場合や、製品に破損等の異常が認められる場合にはご使用にならないでください。
- 他の治療機器とは併用しないで下さい。
- 感染症の疾患がある場合や、炎症の可能性のある部位には使用しないで下さい。
- 製品の使用により不具合を感じた場合は直ちに使用を中止し担当の医師又は医療従事者にご相談ください。
- 1回の使用時間は5分程度を目安として下さい。
- 使用後は必ず皮膚接触面に皮脂などの付着がない状態を維持し、適切な衛生状態を維持することを推奨致します。
- 衛生状態を維持可能な場合には再使用可能ですが、衛生状態の維持が不可能な場合は単回使用を推奨致します。
- 製品の改造や分解はしないでください。
- 使用に際し、異物の付着等がないかを確認の上ご使用ください。