

燦ラスカル

【警告】

1. 本機を取り扱う際は、必ず付属の取扱説明書に従い行うこと。
2. 使用時、庫内には人が入っていないことを確認した上で扉を閉めること。
3. ガスの種類が異なっていると、異常燃焼により火災や一酸化炭素中毒がおこる恐れがあります。
4. 煙突は高温になります。火傷をしますので直接触れないこと。
5. ガス漏れに気付いたときは、ガス事業者（供給業者）などの処置が終了するまで、火をつけたり、電源プラグの抜き差しなどをしないこと。
炎や火花で引火して爆発事故を起こすことがあります。
6. 火災の原因にもなりますので本機の周囲には燃えやすい物を置かないこと。
7. 制御盤に触れる時は、必ずコンセントから電源プラグを抜くか、元電源を切ること。

＜外形寸法＞

幅 : 850mm
奥行き : 1800mm
高さ : 1710mm

＜仕様＞

*必要電源 : 三相AC200V

パネル : SUS304、SUS430
排気ダクト : φ80 ボイラー排気ダクト
給湯器燃料 : LPG、13A

＜原理＞

本機は、洗浄後蒸気を10分以上噴射させることにより除染を行う機械である。

【使用目的又は効果】

再使用可能な器具等の除染・消毒のために用いる


【禁忌・禁止】

1. 本製品は使用目的以外に使用しないこと。
2. 使用に先立ち、必ず本添付文書、本製品の『取扱説明書』を熟読し、その内容を十分に理解し、その指示に従って使用すること。
3. 消毒中及び直後、室内は高温になります。直接触れる時は注意すること。
4. 使用時には、ガスコック開を確認すること。また長期間使用しない場合はコックを閉めておくこと。
5. 運転中は、処理室の扉を開けないこと。

【使用方法等】

1. 運転前の準備
 - (1) 運転中に給水量が不足しますと、ポンプの故障原因となりますので、水道栓は全開にして使用して下さい。
 - (2) ガスの元栓を開けてください。
 - (3) コンプレッサーからのエアーの確認を行って下さい。
 - (4) 洗剤が入っていることを確認して下さい。
 - (5) 排水口が詰まっていないことを確認して下さい。
※ 詳細については、取扱説明書をご覧ください。
2. 処理対象物のセット方法
※ 取扱説明書をご覧ください。
3. 運転方法
 - (1) 電源スイッチを“ON”にします。
 - (2) 給湯器のリモコンの“運転”ボタンを押し、電源を入れます。
 - (3) 電源”スイッチをONにするとモード選択画面が表示されます。
 - (4) “パターン1”～“パターン4”の中からモードを選択してそれぞれのボタンを押してください。
 - (5) モードを選択すると運転準備画面が表示されます。
 - (6) 設定、車椅子のセット及び洗浄室の扉が閉まっていることを確認し、よろしければ“スタート”ボタンを押してください。運転を開始します。
※ 詳細については、取扱説明書をご覧ください。

【形状・構造及び原理等】

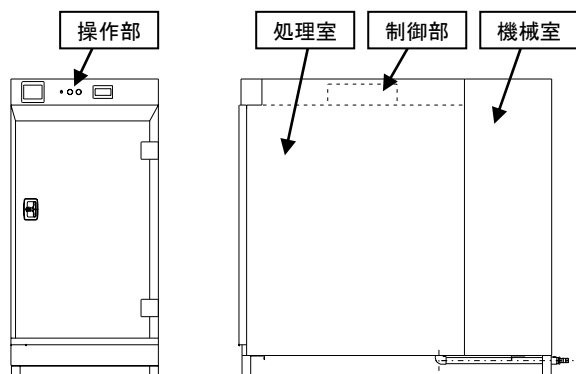

※取扱説明書を必ずご参照下さい。

*【使用上の注意】

1. 処理対象物の材質により、その物の劣化又は破損等が生じる場合がありますので、ご注意願います。
又、設定温度及び時間の数値を下げてご使用されますと、消毒効果が得られない恐れがありますので、ご注意願います。
2. 運転中、パイプ、ホース類の接続部から水漏れ等が無いかなどを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

使用後は、装置（処理室内など）の清掃を実施し保管すること。

<耐用期間>

1. 耐用期間
本機の耐用期間は製造出荷後（納入後）4年とする。
（自社認証による）
2. 条件
耐用期間の間に『添付文書』及び『取扱説明書』に示す使用前点検及び、使用后点検を実施し、メーカーによる保守点検、修理、オーバーホールを実施すること。

【保守・点検に関わる事項】

<1>使用者による保守点検事項

『取扱説明書』別添、日常点検記録表の記載事項

<2>業者による保守点検事項

1. 給湯器の着火・燃焼状態確認
 2. 噴射される蒸気の圧力確認
 3. 洗浄水の吐出圧力確認
 4. 各ノズルの噴霧状態確認
 5. 制御部（一連動作）確認
 6. その他
- ※. 点検頻度は1回／年 以上を推奨

【製造販売業者及製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

東海機器工業株式会社

TEL 0568-68-7111

※取扱説明書を必ずご参照下さい。

