

機械器具（32）医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用ボトル（38476000）
リユーザブル吸引器用ボトル

***【禁忌・禁止】**

1. 滅菌方法に記載されている以外の方法で滅菌しないこと。
[本品が劣化するおそれがあるため。]

***【形状・構造及び原理等】**

<種類>


本品は、ボトルと専用のふたからなり各種サイズの違いにより以下の種類がある。また、ふたには回収した体液等の逆流防止の弁が付いている。

ボトル大：4 種類（1L, 2L, 3L, 5L）

ボトル小：2 種類（0.25L, 0.5L）

ふ た：3 種類（大、小、トラップボトル用）

<形状>

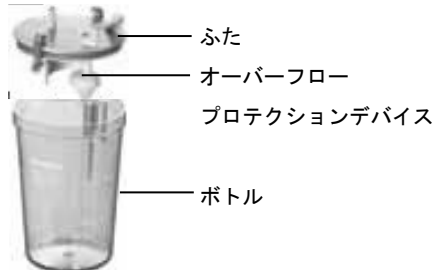

【使用目的又は効果】

ボトルはふたによって密閉でき、体液の回収のために吸引器とともに使用する用具をいう。本品は再使用可能である。

****【使用方法等】**

<一般的な使用方法>

本品は、Medela 社製品と組み合わせて使用すること。

1. ボトル及びふたを準備する。
2. ボトルにふたをはめてロックする。
3. 吸引チューブを接続し、使用する。

***【使用上の注意】**

1. 使用前に本品に異常があった場合は使用しないこと。
2. 廃液には直接触れないこと。感染のおそれがある。
3. 本品を取り扱う際には、医療用手袋などを必ず着用すること。触れてしまった場合は、各施設の手順に従って処置し、必要に応じて医師の診断を受けること。また、他の機器などにこれらが付着した場合はただちに拭き取ること。
4. 使用後は、廃液を廃棄物処理に関する規則に従って感染性廃棄物として廃棄すること。
5. 本品は、使用後、必要に応じて消毒用アルコールや中性洗剤などを用いてボトル及びふたの汚れを取り除くこと。
6. アルコールなどの有機溶媒を吸引しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所及び水がかからない場所に保管。

****【保守・点検に係る事項】**

1. 本品使用前に、損傷、汚れ等がないことを確認すること。
2. 本品使用後はできるだけ洗浄・すすぎ等の汚染除去を行い、血液等異物が付着していないことを確認したのち、次に示す滅菌条件で滅菌を行うことができる。

<滅菌方法>

滅菌方法：高圧蒸気滅菌

滅菌条件：圧力 1.05kg/cm²

温度 134℃ 時間 10 分

3. 本品をフェノール系の洗浄剤で清拭しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社トータルメディカルサプライ

TEL：078-302-5595 FAX：078-302-5596

外国製造業者：メデラ エージ（スイス）

Medela AG