

機械器具（32）医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用ボトル（38476000）

新ディスポバッグ専用ボトル

【禁忌・禁止】

1. 新ディスポバッグと新ディスポバッグ専用ボトルは、同容量の製品を使用すること。[異なる容量の製品を使用すると新ディスポバッグが破裂することがあるため。]

*【形状・構造及び原理等】

<種類>


本品は、容量の違いにより 1. 5L 用と 2. 5L 用の 2 種類がある。

<形状>

新ディスポバッグ

届出番号：28B1X10009320004

新ディスポバッグ専用ボトル

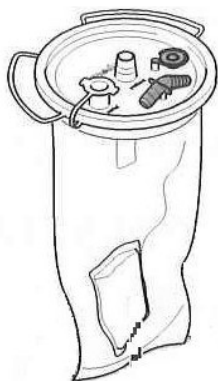

【使用目的又は効果】

ボトルはふたによって密閉でき、体液の回収のために吸引器とともに使用する用具をいう。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

この製品の仕様に合ったバッグ（販売名：新ディスポバッグ 届出番号：28B1X10009320004）と組み合わせること。それ以外の製品との組み合わせで使用した場合、機能を確保することができず、人体への傷害や機器の破損につながるおそれがある。


<一般的な使用方法>

注意：この製品を取り扱う際には、医療用手袋などを必ず着用すること。廃液に触れると、感染するおそれがある。

1. 本品専用の新ディスポバッグを準備する。
2. 新ディスポバッグを下図のとおり本品に挿入し嵌め込むこと。

注意：バッグとボトルを取付ける際は蓋が確実に閉まっていることを確認すること。[蓋が閉まっていないと十分に吸引できない場合がある。]

3. トップ部分の接続口に吸引チューブ等を接続し、使用する。

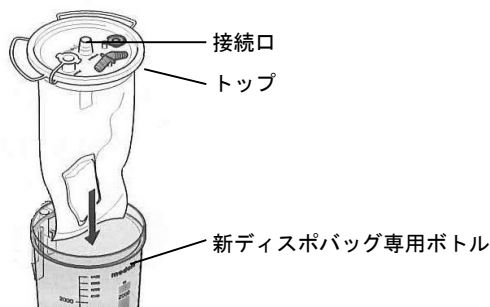

*【使用上の注意】

1. 使用前に本製品に異常があった場合は使用しないこと。
2. 廃液には直接触れないこと。感染のおそれがある。
3. この製品を取り扱う際には、医療用手袋などを必ず着用すること。触れてしまった場合は、各施設の手順に従って処置し、必要に応じて医師の診断を受けること。また、他の機器などにこれらが付着した場合はただちに拭き取ること。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所及び水がかからない場所に保管。

【保守・点検に係る事項】

本品使用後は、必要に応じて、消毒用アルコールや中性洗剤などを用いてボトル及びふたの汚れを取り除くこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社トータルメディカルサプライ

TEL：078-302-5595 FAX：078-302-5596

外国製造業者：メデラ エージー（スイス）

Medela AG