

機械器具 21 内臓機能検査用器具
管理医療機器 肺機能検査用フィルタ (70086000)

スピン IE フィルター

再使用禁止

【警告】

1. 本品内に、液体や分泌物が溜まっている場合は、直ちに交換すること。[流量抵抗の上昇、あるいは閉塞により、適切な換気が行えない場合がある。]


【禁忌・禁止】

1. 再使用しないこと。
2. 滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

- (1) スピン IE フィルター TK-01 (2) スピン IE フィルター TK-02+

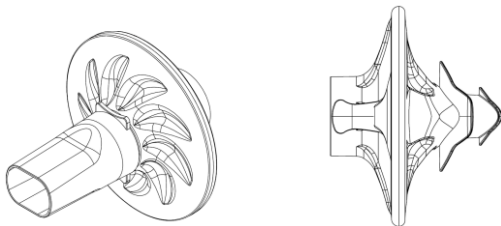

No.	機器側接続口	バクテリア除去率	ウイルス除去率
(1)	内径：30mm 外径：32mm	>99.99	>99.9
(2)	内径：30mm 外径：32mm		

原材料：ポリプロピレン、ABS樹脂

2. 原理等

被験者の呼吸から排出される唾液、喀痰等を本品のろ過作用により除去する。唾液や喀痰等の大きな粒子はフィルタ繊維層の網目で捕集し、静電気を帯びやすい細菌やウイルスの小さな粒子は、帯電したフィルタ繊維の静電気で引き付けて吸着する。

【使用目的又は効果】

本品は、肺機能検査における唾液、喀痰等の除去に用いること。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 1) 包装開封し、本品を取り出す。
- 2) 併用する医療機器の接続口外径30mmに本品を接続する。

2. 使用中

- 1) 併用する医療機器の検査手順に従う。

3. 使用后

- 1) 本品は単回使用のため併用する医療機器より本品を取り外し破棄する。

【使用上の注意】

1. 使用前に、肺機能検査装置の添付文書等を必ず参照すること。
2. 本品と肺機能検査装置の接続は、形状が適合する相手方に対して行い、適度な力でしっかりと接続すること。
3. 使用前に、本品に破損や汚れなどが無いことを確認し、異常が認められた場合は使用しないこと。
4. 使用中に本品に唾液、喀痰等が多量に付着した場合は交換すること。
5. 使用中は本品の破損及び接合部のゆるみなどについて、定期的に確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

包装ラベルに記載されている表示を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社トータルメディカルサプライ

TEL：078-302-5595 FAX：078-302-5596

外国製造業者：ハンドックメディカルカンパニー（大韓民国）

HANDOK MEDICAL COMPANY

販売業者：TCM 株式会社

〒501-5303 岐阜県羽島市舟橋町本町 5-49

Tel:058-260-8826 Fax:058-260-8825