

機械器具(16) 体温計

管理医療機器 一般的名称：電子体温計(JMDN14032010)

販売名：電子体温計 TO-150


【警告】

・お子様だけでご使用にならないください。

【禁忌・禁止】

・測温部を噛まないでください。
・人以外の検温にはご使用にならないでください。
・測定結果の自己判断や治療は危険ですので、医師の診断に従ってください。

【形状・構造及び原理等】

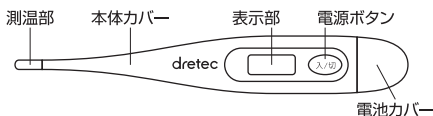

測温部にあるサーミスタが温度により、電気的抵抗値が変化する特性を応用して、抵抗値の変化を集積回路で演算処理し、体温として表示部に表示します。

<付帯機能>

初期動作確認告知、実測検温終了告知、測定温度範囲外告知、自動電源遮断機能

【使用目的、効能又は効果】

測温部を部位に接触させて、脇下又は口腔(舌下)の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示する。

【品目仕様】

- ・種類 : 一般用
 - ・方式 : 実測式
 - ・温度測定範囲 : 32.0℃～42.9℃
31.9℃以下になると「Lo」表示
43.0℃以上になると「Hi」表示
 - ・測定精度 : ±0.1℃
 - ・温度表示 : 3桁デジタル
 - ・最小表示単位 : 0.1℃
 - ・応答特性 : 30秒以内
 - ・定格電圧 : DC1.5V
 - ・電源 : アルカリボタン電池(LR41)
 - ・最高温度保持機能 : 実測した最高温度の測定値を保持する。
 - ・測定値メモリー : 前回測定した測定値を記憶保存する。
- 本品は、EMC規格：JIST0601-1-2：2012に適合している。

【操作方法又は使用方法等】

- 1) 電源ボタンを押す。
- 2) 「ビップ」音の後に表示部の全セグメントが表示される。
その後、表示部右下に「M」が表示され、前回測定値が2秒間表示される。
- 3) その後、「C」の点滅が開始し、測定可能となる。
- 4) 測温部を口腔(舌下)または脇下に密着させ安静にする。
- 5) 「ビー・ビー」音が連続10秒間鳴ったら、測定が終了に近づいた合図である。体温を正確に測定するためにはさらに口腔(舌下)で約2分、脇下で約3分以上続けて測定する。
- 6) 表示部に測定された体温が表示される。
- 7) 測定が終わったら、電源ボタンを押せば、表示が消え電源OFFになる。

- 8) 電源ボタンを押さなかった場合、約9分後に自動的に電源OFFになる。

【使用上の注意】

- (1) 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
また、お子様にご使用の際は、先端の測温部で目を突いたり、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
- (2) 運動・食事・入浴の後には十分な時間をおいてから体温を測定してください。
- (3) 口腔(舌下)の体温を測定する時は、指定の場所に挿入し測定中は動かないでください。本体を強く噛まないでください。
- (4) 体温以外の測定及び、人以外の検温に使用しないでください。
- (5) 口腔(舌下)の体温を測定する場合は、ご使用前に消毒用アルコールを染み込ませた布等で測温部を拭き、清潔にご使用ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- (1) 高温や直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。

【取り扱い上の注意】

- (1) 分解・改造・修理は絶対行わないでください。
- (2) 電池カバーク一部分は防水性がありません。電池カバーク一部分に水等をかけたり、本体に水等をつけたりしないでください。
- (3) 熱湯消毒はしないでください。
- (4) 丸洗いや超音波洗浄はしないでください。
- (5) 極端に曲げたり落としたり強い衝撃を与えないでください。
- (6) 体温を測定する時、周囲温度が体温より高いような場合は測温部に水をかけ、測温部を冷やしてから測定し、終了のお知らせ音が鳴ったらすぐ表示値を読み取ってください。
- (7) 電池が消耗した場合、表示部の右下に電池低圧マークが表示されます。このような場合、電池を交換してください。[R]
- (8) 電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。[R]

【保守・点検に関わる事項】

- (1) 使用前に清潔な状態にし、作動するか(電源が入るか)を確認してからご使用ください。
- (2) 汚れは、中性洗剤又はアルコールを染み込ませた布でよく拭いてください。

【包装】

本体・1台

【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 : 株式会社ドリテック
埼玉県越谷市流通団地2-3-9
製造元 : VEGA TECHNOLOGIES INC.(中国)
東莞東冠電子製品有限公司

連絡先

株式会社ドリテック お客様相談センター
フリーコール 0120-875-019
受付時間: 月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00
(祝祭日および当社指定休日を除く)

取扱説明書を必ずご参照ください。