

販売名：パルスオキシメータ OX-102

【警告】

- ・高圧酸素装置内や高圧酸素装置との併用はしないでください。(誤動作や破損、故障の誘因の可能性があります)
- ・可燃性(麻酔ガス、高濃度酸素、ガソリンなど)や引火性の蒸気のあるところでは使用しないでください。(火災の原因になります)

【禁忌・禁止】


- ・電磁影響を受ける機器(携帯電話、テレビ、無線機器などの電化製品、電気メス、除細動器などの医療機器)の近くで本製品を使用しないでください。
- ・放射線機器、MRI(磁気共鳴画像診断装置)の管理領域での使用はしないでください。(誤動作や破損、故障の誘因の可能性があります)
- ・ペースメーカーをお使いの方が、パルスオキシメータを使用する場合、医師とご相談の上、使用してください。
- ・アラーム機能はありませんので、アラームの必要な場合には使用しないでください。

使用対象者

- ・乳幼児に使用しないでください。
- ・長時間装着したまま、連続使用しないでください。
- ・傷等の存在する指に装着しないでください。

【形状・構造及び原理等】

(1) 各部の名称

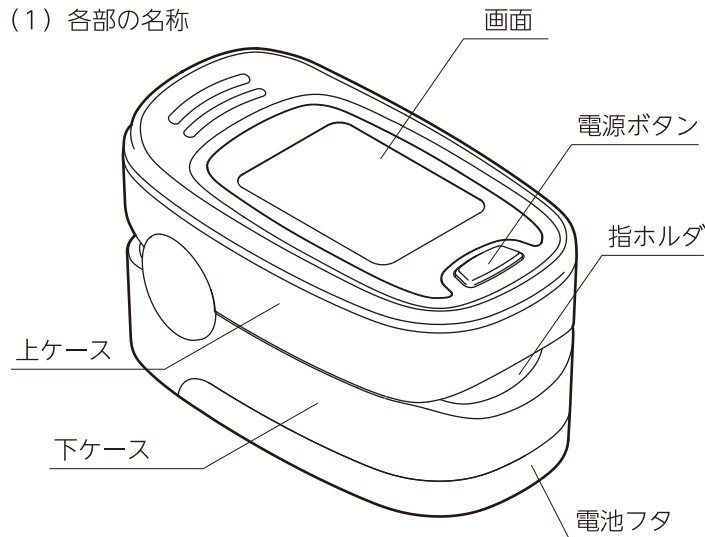

(2) 付属品

取扱説明書(保証書付)	1枚
医療機器添付文書	1枚
ストラップ	1個
単4形乾電池(動作確認用)	2個

(3) 本体の寸法及び質量

本体寸法	約横60mm 縦34mm 高さ33mm
本体質量	約25g(電池含まず)

(4) 電気的定格

電源	単4形アルカリ乾電池2個(DC3V)
電撃に対する保護の形式による分類	内部電源機器(乾電池)
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	BF形装着部

(5) 動作原理

動脈血中の酸素飽和度(SpO₂)および脈拍数と光学的な原理にて、非観血的に測定します。酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの赤色光と赤外光の吸光度が異なる2波長のLED光源を経皮的に照射します。酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの吸光度の比を演算する事により、血中酸素飽和度パーセントを求めます。脈拍数は赤外光による各脈波のピーク間隔を求めて1分間あたりの心拍数に変換して測定します。

(6) 品目仕様

測定範囲	SpO ₂ ：35%~99% 脈拍：30bpm~250bpm
測定精度	SpO ₂ ：70%~99%：±2% (70%未満は規定なし) 脈拍：30bpm~100bpm ±2bpm 100bpm~250bpm ±2%

【使用目的又は効果】

動脈血の経皮的酸素飽和度を測定し、表示すること。

【使用方法等】

1. 使用前

- (1) 電池フタを外します。
- (2) 単4電池2個を表示の向きにセットします。
- (3) 電池フタをセットします。

2. 使用中

- (1) 電源ボタンを押すと前回測定値が表示されます。
- (2) 指ホルダを開いて指ホルダに指の腹を下側にして奥に触れるまで入れます。
- (3) 指を入れ固定すると測定を開始します。
- (4) 脈を検知するとSpO₂及び脈拍数の値を画面に表示します。
- (5) 測定中に電源ボタンを押すと、画面表示が切り替わります。

3. 使用后

指ホルダから指をはずすと、測定が終了し、自動的に電源が切れます。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

(1) 使用条件及び基本的な注意事項

- ①使用する前に取扱説明書の内容に従ってください。
- ②血中酸素飽和度測定・脈拍数測定以外に使用しないでください。
- ③修理・改造はしないでください。
- ④手指以外で使用しないでください。
- ⑤装着する指は清潔にしてください。

(2) 使用中の注意事項

- ①機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止してください。
- ②身体に及び機器に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- ③電気メスなどの治療器と同時に使用しないでください。
- ④測定中は、指や体を動かさないでください。
- ⑤次のような場合には、正しく測定できない場合があります。
 - ・異常ヘモグロビン(一酸化炭素ヘモグロビンなど)の量が多いとき
 - ・血液中に色素(メチレンブルーなど)が存在するとき
 - ・測定部位の血流循環が不足しているとき
 - ・血圧計と同じ腕に本製品を装着しているとき
 - ・照明や蛍光灯、直射日光などの周囲の光が強すぎる時
 - ・爪にマニキュアをしているときやハンドクリームを塗っているとき
 - ・本製品を指に正しく装着されていないとき
 - ・激しい体動があるとき
- ⑥ストラップを持って本製品を引っ張らないようにしてください。

(3) 使用後の注意

- ①ご使用後は、消毒用アルコールを含ませた布で指ホルダを拭いてください。
- ②お手入れの際は、水か中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 長時間ご使用にならない場合は、お子様の手の届かない、湿気の少ない場所に保管してください。
- (2) 長期間ご使用にならない場合は、電池を取り外してください。
- (3) 化学薬品を保管している場所やガスの発生する場所に保管しないでください。
- (4) 耐用年数：4年(当社自己認証による)
- (5) 使用環境：10℃～40℃ 30%～85%RH
- (6) 輸送保管環境：-10℃～60℃ 10%～85%RH

【取り扱い上の注意】

- (1) 取り扱いを間違えると不具合を生じることがあるので、使用方法、使用上の注意等を厳守してください。
- (2) 本製品を廃棄する際は、地域で定める条例に従って廃棄してください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 本製品に故障または異常が認められた時には連絡先にお問い合わせください。
- (2) しばらく使用していなかった本製品を使用するときには、正常・安全に作動することを確認してからご使用ください。
- (3) 本体の清掃は水またはぬるま湯を浸し、良くしぼった布等でふき取ってください。
- (4) 清掃の時に、センサー部に傷がつかないように注意してください。製品を無理に開かないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社ドリテック
住所	埼玉県越谷市流通団地2-3-9
製造業者	Contec Medical Systems Co., Ltd.
国名	中華人民共和国
発売元	株式会社ドリテック お客様相談センター 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9 電話：0120-875-019 (月～金10:00-12:00, 13:00-16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

取扱説明書を必ずご参照ください。