

機械器具 24 知覚検査または運動機能検査用器具
一般医療機器 歯科用咬合力計（JMDN コード70699000）

口腔機能モニター Oramo-bfの付属品


口腔機能モニター Oramo-bf /カバー

禁忌・禁止

- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

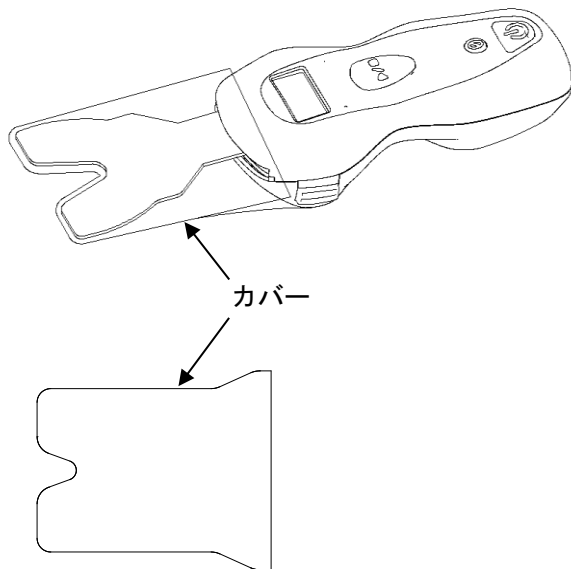

2. 寸法

約130×79mm 厚み1mm以下

3. 材質

合成樹脂

【使用目的又は効果】

口腔内に挿入するセンサーシートで患者の咬合力を検出する歯科用咬合力計 口腔機能モニター Oramo-bfにおいて、衛生管理および他の患者との感染防止のためセンサーシートに被せて使用する。


【使用方法等】

ご使用にあたっては口腔機能モニター Oramo-bf 本体の取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。

1. 使用方法

1) 計測前

センサーシートを本体部に取り付けた後、センサーシートにカバーを被せます。カバーはしっかりとディスプレイ手前まで取り付けてください。

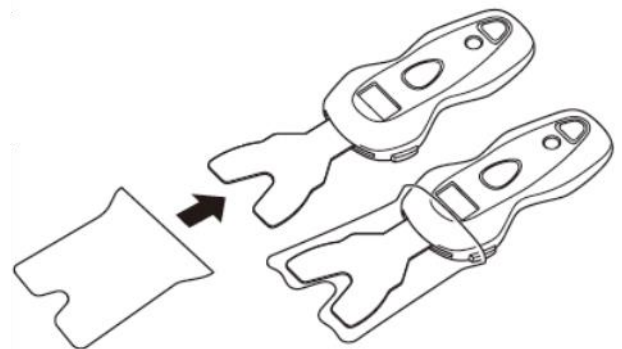

2) 計測後

カバーをセンサーシートからはずし廃棄してください。

【使用上の注意】

1. 注意事項

- ① カバーはご使用前に、穴が開いていないか、汚れがないかをご確認の上、ご使用ください。汚れ等が見られた場合は、清拭するか別のカバーをご使用ください。
- ② カバーを必ずセンサーシートにかぶせてからご使用ください。
- ③ カバーは一度使用したら廃却し、新品のものと交換してください。
- ④ 計測の際は、必ず専用のカバーをご使用ください。
- ⑤ アレルギー反応が見られた場合は、患者の安全を確保し、使用を中止してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ① 水や高湿度が及ばないように保管すること。
- ② 直射日光が長時間あたらない場所に保管すること。
- ③ 開封後は清潔性を保って保管してください。

2. 有効期間

- ① カバーの有効期間は製造後3年です。**
- ② 有効期間を過ぎたカバーは使用しないでください。

【保守・点検に係る事項】

カバーを使用後は、医療廃棄物として地方自治体の条例に従って廃棄してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売業者〕

住友理工株式会社
愛知県小牧市東三丁目1番地
TEL : 0568-77-2975
FAX : 0568-77-2976

〔製造業者〕

住友理工株式会社 テクノピアA棟
愛知県小牧市東三丁目1番地
TEL : 0568-77-2975
FAX : 0568-77-2976

〔製造業者〕*

淀川サンセイ株式会社
滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘17番4（近江水口第2
テクノパーク内）
TEL : 0748-63-8860
FAX : 0748-63-8825