

成形型副木

THERMAL GIPS®

サーマルギプス

単回使用

取扱説明書

【警告】

知覚異常(糖尿病、麻酔管理など)がある患者には、慎重に局所管理すること。

【禁忌・禁止】

- (1) 本品を装着したまま磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)を使用しないでください。
- (2) 本製品の材料にアレルギーまたは過敏症の既往歴のある方は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 種類・規格

品番	サイズ(縦×横×厚み)	適用
010	200mm×70mm×2mm	指用 (手指骨折用)

2. 構造

本製品は、アルミニウム含有熱可塑性樹脂を成型した成形型副木です。

3. 原理

本製品は、アルミニウム含有熱可塑性樹脂を用いているため、お湯で加温すると柔らかくなり手指に添わせて成形できます。放冷後固くなり固定できます。


【使用目的又は効果】

骨折部位の保護・固定。アルミニウムを含有しているため熱伝導性が良く、放熱しやすくなっています。

【使用方法】

1. 指のサイズに合わせて野線を選び、余分な部分をはさみでカットします。
2. お湯の入った容器に指先部分を上側にして本製品を入れて、2～3分待ちます。お湯は85℃～95℃が最適です。
3. 本製品をお湯から取り出して、タオル等で水分を拭き、フラップ部分を折り返し中央で合わせます。
4. 同様に、指先部分をお湯に浸け2～3分待ちます。
5. 本製品を取出してタオル等で水分を拭き、指の腹側(指紋側)と両側面を覆うように成形します。指先の余った部分を、つまんで合わせます。
6. 一旦本製品をはずし、合わせて余った部分を、はさみでカットします。切り口が丸くなるよう整えます。
7. 再び製品を装着し、テープなどで固定します。

※詳しくは、裏面をご覧ください。

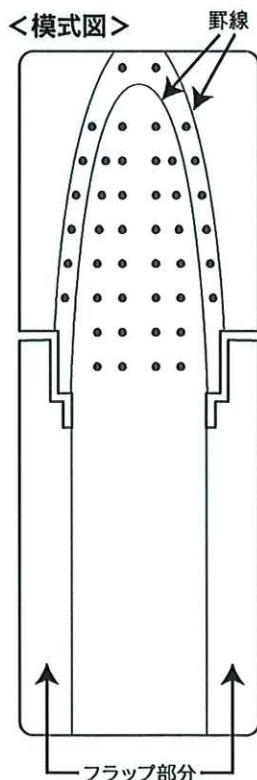

【使用上の注意】

1. 次の患者には慎重に適用してください。

患部に皮膚障害(感染創、潰瘍、発疹、腫脹など)がある患者には局所管理を十分に行い慎重に使用してください。症状を悪化させる恐れがあります。

2. 重要な注意事項

(1) 本製品使用中、患部に痛み、しびれ、知覚異常などが認められた場合には、直ちに医師に連絡するよう患者に指導してください。

(2) 本製品使用中、患部に皮膚障害と思われる症状が認められた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置をしてください。

3. 不具合・有害事象

本製品の類似品において、以下の不具合が報告されております。

- 長期間使用する場合、発汗などにより、皮膚障害(皮膚剥離、浸軟、水泡、発赤)を発生させる可能性があります。発汗などで湿った状態が続く場合は、汗を拭き取るなど適切な処置をしてください。また、異常を感じた場合は、直ちに医師に連絡するよう患者に指導してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び高温多湿を避けて、常温で保管してください。

2. 使用期限

パッケージに表示しています。

【使用方法に関する注意】

1. 本製品が熱くなっている間は、熱傷に十分注意してお取り扱いください。
2. カットした際、切り口にするどい凹凸がないことを確認の上、ご使用ください。
3. 本製品の温度が室温程度まで低下した状態で成形すると割れが発生しやすくなります。
4. 本製品は、再度お湯に浸すことによって再び柔らかくなり、再成形することが可能です。再成形する際は、上記の使用方法、使用方法に関する注意の通り、お取り扱いください。割れが発生した場合は使用しないでください。

【包装】

指用:1箱10入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者


東洋アルミニウム株式会社
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号
御堂筋ダイワビル

2. 連絡先


東洋アルミニウム株式会社
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号
御堂筋ダイワビル

お客様窓口:06-6271-3151(内線517)


使用方法＜指全体＞

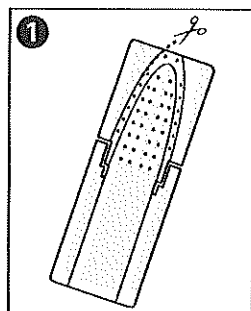


① 指のサイズに合わせて野線を選び、余分な部分をはさみでカットします。

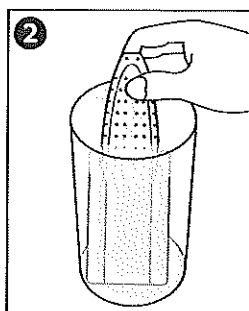


② お湯の入った容器に指先部分を上側にして本製品を入れて、2～3分待ちます。お湯は85℃～95℃が最適です。

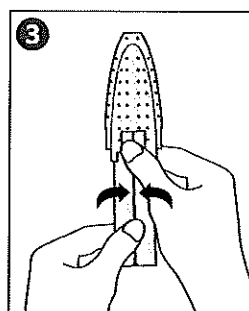


③ 本製品をお湯から取り出して、タオル等で水分を拭き、フラップ部分を折り返し中央で合わせます。

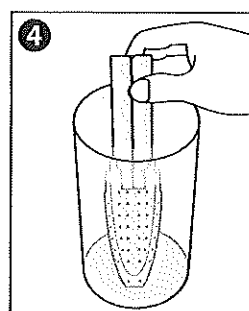


④ 同様に、指先部分をお湯に浸け2～3分待ちます。

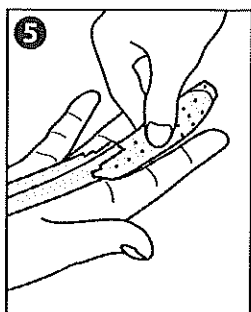

⑤ 本製品を取出してタオル等で水分を拭き、指の腹側（指紋側）と両側面を覆うように成形します。指先の余った部分をつまんで合わせます。

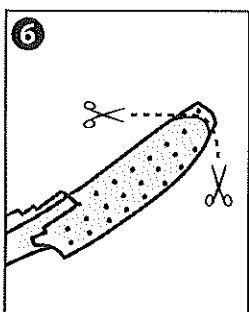


⑥ 一旦本製品をはずし、合わせて余った部分をはさみでカットします。切り口が丸くなるよう整えます。

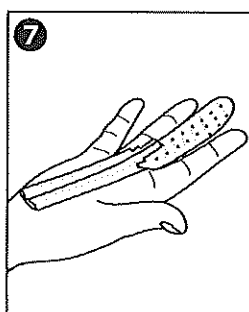


⑦ 再び本製品を装着し、テープなどで固定します。


使用方法＜指先＞

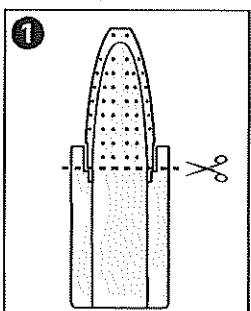


① 指のサイズに合わせて野線を選び、余分な部分をはさみでカットします。

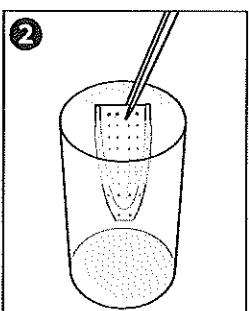


② お湯の入った容器にピンセットなどで本製品を入れて、2～3分待ちます。お湯は85℃～95℃が最適です。

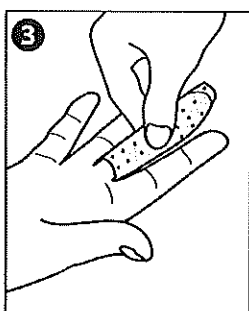

③ 本製品を取出してタオル等で水分を拭き、指の腹側（指紋側）と両側面を覆うように成形します。指先の余った部分をつまんで合わせます。

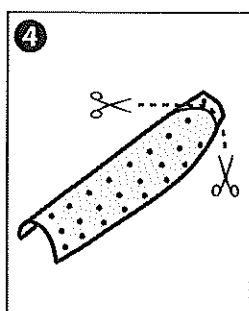

④ 一旦本製品をはずし、合わせて余った部分をはさみでカットします。切り口が丸くなるよう整えます。

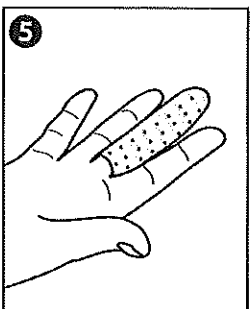

⑤ 再び本製品を装着し、テープなどで固定します。



＜使用方法動画＞