

成型型副木

THERMAL GIPS®

サーマルギプス

単回使用

取扱説明書

【警告】

知覚異常(糖尿病、麻酔管理など)がある患者には、慎重に局所管理すること。

【禁忌・禁止】

本製品の材料にアレルギーまたは過敏症の既往歴のある方は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 種類・規格

品番	サイズ(縦×横×厚み)	適用
020	450mm×300mm×5mm	手指、上肢、 下肢、鼻
021	90mm×300mm×5mm	手首

2. 構造

本製品は、アルミニウム含有熱可塑性樹脂を成型した成型型副木です。

3. 原理

本製品は、アルミニウム含有熱可塑性樹脂を用いることで、お湯で加温すると柔らかくなり部位に添わせて成形することができます。


【使用目的又は効果】

骨折部位の保護・固定。

【使用方法】

1. 固定部位の形状に合わせて、はさみでカットします。
2. お湯(60℃以上)の入った容器に本製品を3秒程度浸漬し、軟化させます。
3. お湯から取り出して、タオル等で水分を拭き、火傷に注意しながら部位に沿わせて成形します。
4. 余分な部分をはさみでカットし、切り口や端部が丸くなるよう整えます。端部を折り返したり、2重に重ねるなど固定強度を調整します。
5. 弾力包帯などで固定します。

<模式図>

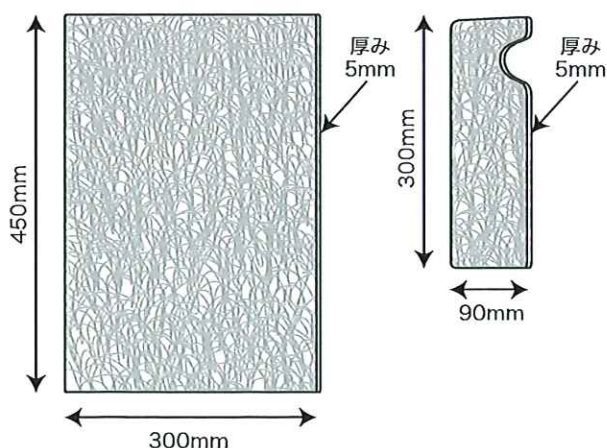

【使用上の注意】

1. 次の患者には慎重に適用してください。

患部に皮膚障害(感染創、潰瘍、発疹、腫脹など)がある患者には局所管理を十分に行い慎重に使用してください。

2. 重要な注意事項

(1)本製品使用中、患部に痛み、しびれ、知覚異常などが認められた場合には、直ちに医師に連絡するよう患者へ指導してください。

(2)本製品使用中、患部に皮膚障害と思われる症状が認められた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置をしてください。

3. 不具合・有害事象

本製品の類似品において、以下の不具合が報告されております。

●長期間使用する場合、発汗などにより、皮膚障害(皮膚剥離、浸軟、水泡、発赤)を発生させる可能性があります。発汗などで湿った状態が続く場合は、汗を拭き取るなど適切な処置をしてください。また、異常を感じた場合は、直ちに医師に連絡するよう患者に指導してください。

【使用方法に関する注意】

1. 本製品が熱くなっている間は、熱傷に十分注意してお取り扱いください。
2. カットした際、切り口にするどい凹凸がないことを確認の上、ご使用ください。
3. 本製品の温度が室温程度まで低下した状態で成形すると割れが発生しやすくなります。
4. 本製品は、再度お湯に浸すことによって再び柔らかくなり、再成形することが可能です。再成形する際は、上記の使用方法、使用方法に関する注意の通り、お取り扱いください。
5. 成形時及び使用中に割れが生じた場合は、使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び高温多湿を避けて、常温で保管してください。

2. 使用期限

パッケージに表示しています。

【包装】

フリータイプ:1パック1入

手首用:1パック5入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

東洋アルミニウム株式会社

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号
御堂筋ダイワビル

2. 連絡先


東洋アルミニウム株式会社

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号
御堂筋ダイワビル

お客様窓口:06-6271-3151


使用方法＜手首用＞

① サイズに合わせる

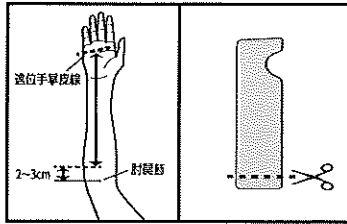


遠位手掌皮線と肘関節までの長さより2~3cm短くなるようにカットします。

② エッジモルディングを行う

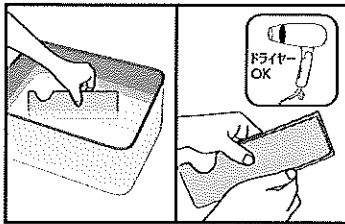


端部を60℃以上のお湯につけて、火傷に注意しながら、なめらかにします。

③ 全体を軟化させる

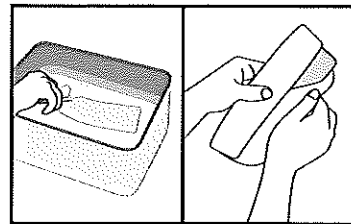


全体をお湯に3秒程度つけて軟化させ、タオルで拭きます。

④ 成形する

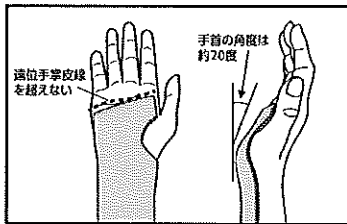


火傷に注意しながら、成形します。

⑤ 包帯を巻く

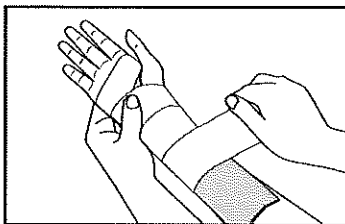

弾力包帯などで巻きます。

＜補強する場合＞

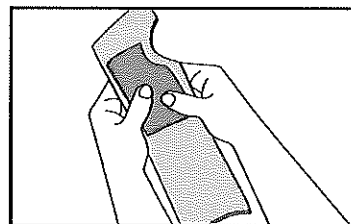

補強部材を軟化させ、水分を取った後、圧着します。



＜使用方法動画＞