

機械器具 32 医療用吸引器

管理医療機器 電動式可搬型吸引器（コード：36616030）

電動鼻水吸引器 SUUPY

【警告】


- ・機器の操作は必ず取扱説明書に従い、正しく使用してください。
- ・吸引がうまく行えない場合は、医療従事者等の指導に従ってください。
- ・必ず専用 AC アダプタ、専用 Li-ion 電池または 006P 形 9V 乾電池を使用してください。
- ・必ず専用 Li-ion 電池は、専用充電器を使用してください。
- ・専用 Li-ion 電池と専用充電器は、必ず取扱説明書に従い、正しく使用してください。
- ・乳幼児の手の届くところに保管しないでください。
- ・鼻ノズルの誤飲や誤食にはくれぐれもご注意ください。
- ・専用 AC アダプタのコードやシリコンチューブが首などにかからないようにしてください。
- ・使用後は取扱い説明書に従い、必ず洗浄と消毒を行ってください。
- ・使用中に異常や不安を感じた場合は、直ちに使用を中止し、専用 AC アダプタをコンセントから抜くか、スイッチをお切りください。

【禁忌・禁止】

- ・機器は本書に記載されている使用目的以外の用途では、絶対に使用しないでください。
- ・鼻ノズルが接触する部分に傷口や出血がある場合は、使用しないでください。
[症状が悪化する恐れがあります]
- ・本体や専用 AC アダプタ及び専用 Li-ion 電池は絶対に分解しないでください。
[感電事故や火災など、安全上重大な影響を及ぼす可能性があります]
- ・濡れた手で専用 AC アダプタを取り扱わないでください。
[感電のおそれがあります]
- ・専用 Li-ion 電池の電極をショートさせないでください。
- ・専用 Li-ion 電池の充電は専用充電器を使用し、専用充電器は他の電池を充電しないでください。
[感電事故や火災など、安全上重大な影響を及ぼす可能性があります]
- ・定格時間を越えた連続運転を行わないでください。
[片鼻 10 秒まで]
- ・機器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
[破損や変形した場合は使用しないでください]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観形状

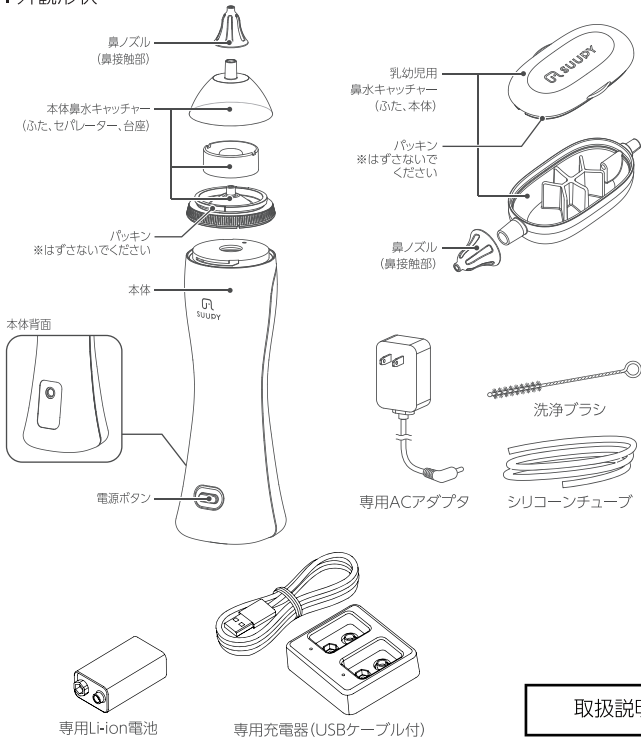

2. 構造、各構成部品及び各部の機能

構成部品名	機能等の説明
本体	内蔵する電動モーターを使用したポンプによって陰圧を発生させる。
本体鼻水キャッチャー	吸引された鼻水を溜める。
鼻ノズル	鼻腔内に挿入する。M サイズ及び L サイズがあり鼻腔の大きさに応じて選択する。
電源ボタン	電源 ON/OFF 用スイッチ。
乳幼児用鼻水キャッチャー	吸引された鼻水を溜める。(推奨 0 歳児)
専用 AC アダプタ	本体に電源を供給する。
洗浄ブラシ	鼻水キャッチャー、鼻ノズルを洗浄する際に使用する。
シリコンチューブ	本体によって発生した陰圧を乳幼児用鼻水キャッチャーへ伝える。
専用 Li-ion 電池	本体に電源を供給する。(内部電源)
専用充電器 (USB ケーブル付)	専用 Li-ion 電池を充電する。

3. 原理

SUUPY 本体に内蔵された電動モーターでポンプが作動し、作り出した流体の流れにより、本体鼻水キャッチャー内が陰圧となる。これにより、鼻ノズルから鼻水が吸引されて本体鼻水キャッチャー内のセパレーターに貯留される。乳幼児用キットを使用する場合は、本体鼻水キャッチャーに接続したシリコンチューブ内が陰圧となり、これにより、乳幼児用鼻ノズルから鼻水が吸引されて乳幼児用鼻水キャッチャーに貯留される。

4. 性能及び仕様

吸引圧力	-50kPa±15%
ポンプ排気流量	14L/min±15%
電撃に対する保護の形式による分類	クラス II 機器（専用 AC アダプタ使用時） 内部電源機器（電池使用時）
電撃に対する保護の程度	B 型装着部
電源	専用 AC アダプタ、専用 Li-ion 電池 または 6LR61(006P 形 9V 乾電池)
専用 AC アダプタ	入力 AC100V 50/60Hz 0.5A Max. 出力 DC 7.5V 1.6A
専用 Li-ion 電池	出力 DC 9V 500mAh (006P 形 9V Li-ion 電池)

5. 原材料

鼻ノズル：シリコンゴム

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用目的又は効果】

鼻腔内の分泌物、粘液(鼻水)の吸引に用いること。

【使用方法等】

1.使用前の準備

- 1)本体鼻水キャッチャーを組立て、本体に接続する。乳幼児に対して使用する場合は、乳幼児用鼻水キャッチャー、シリコンチューブを組立て、本体鼻水キャッチャーに接続する。
- 2)商用電源で使用する場合は、専用ACアダプタを商用電源に接続し、DCプラグを本体に接続する。内部電源で使用する場合は、006P形9V電池を電池ケースに配置する。

2.使用中の操作

- 1)患者の鼻に鼻ノズルを挿入する。
- 2)スイッチを押して吸引を開始する。1回の吸引は10秒以内を目安とし、数回に分けて行う。

3.使用後の処置

- 1)専用ACアダプタを本体から取り外す。
- 2)本体鼻水キャッチャー、鼻ノズル又は乳幼児用鼻水キャッチャー、鼻ノズルを本体から取り外す。
- 3)本体の洗浄・消毒はできない。乾いた布で清拭し、汚れがひどい場合は、希釈した中性洗剤を含ませた布をかたく絞り拭き取る。
- 4)取り外した各パーツは、中性洗剤でよく洗い乾燥させる。シリコンチューブに鼻水が侵入した場合も、同様に洗浄して乾燥させる。
- 5)各パーツは必要に応じて以下の方法で消毒を行う。
 - ・哺乳びん等の消毒液を用いる。(消毒液は本品に含まない)
 - ・多めの水を入れた大きめの鍋等に浸漬して、3～5分間煮沸する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1.機器使用の際の基本的注意事項

- ・機器の操作は必ず取扱説明書に従い、正しく使用してください。
- ・乳幼児の手が届くところや、不安定な場所には保管しないでください。
- ・各鼻水キャッチャーには必ず鼻ノズルを装着した状態で使用してください。
- ・安定した場所で使用してください。
- ・直射日光の当たる場所や、高温、高湿になる場所に保管しないでください。
- ・機器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品の付属品及び本製品の別売品以外は使用しないでください。
- ・必ず専用ACアダプタ、専用Li-ion電池または指定の乾電池を使用してください。
- ・濡れた手で専用ACアダプタの挿し込みプラグを抜いたり挿したりしないでください。
- ・本体と専用ACアダプタは防水ではありません。水や液体がかからないようにしてください。
- ・006P形9V電池は正しい極性でセットしてください。
- ・電池の液が皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- ・専用Li-ion電池、専用充電器の端子が汚れていたら乾いた柔らかな布できれいに拭いてから使用してください。
- ・定格時間を越えた連続運転を行わないでください。(片鼻10秒まで)
- ・機器はシンナー、ベンジン、アルコールなどで拭かないでください。
- ・機器を長期間使用しなかった場合は、使用前に必ず清掃、点検をしてから使用してください。

2.機器使用中の基本的注意事項

- ・機器の使用中は利用者の様子を常に監視し、異常や不安を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- ・機器を使用中に何らかの症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、医療従事者等に相談してください。
- ・1回あたり、片鼻10秒を超える吸引を行わないでください。
- ・専用ACアダプタのコードやシリコンチューブが首などにからまないように注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・鼻ノズルは誤食しないように、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・使用後は洗浄、消毒を行い、清潔な状態にしてから保管してください。
- ・保管環境温湿度:-25℃～+75℃、湿度15%～90%(結露が無い状態)
- ・耐用期間3年[自己認証(当社データによる)]

【保守・点検に係る事項】

1.使用者による保守点検(日常点検)

- ・安全にお使いいただくため、日常点検(使用前点検)を行ってください。

<専用ACアダプタ>

- ・専用ACアダプタの破損やコード、プラグに変形やキズ、断線がないことを確認してください。

<専用Li-ion電池>

- ・専用Li-ion電池から液漏れしていたり、変色、変形が無いことを確認してください。

<鼻ノズル、シリコンチューブ>

- ・各部に折れ、ヒビ割れ、汚れ、裂けがないか確認してください。
- ・ヒビ割れや裂けがあった場合は交換してください。

<本体鼻水キャッチャー、乳幼児用鼻水キャッチャー>

- ・各鼻水キャッチャーに汚れ、キズ、ヒビ割れがないか確認してください。
- ・汚れがある場合には洗浄してください。キズ、ヒビ割れがある場合は交換してください。
- ・各キャッチャーにはパッキンが装着されています。パッキンがしっかりとめ込まれていることを確認してください。

<本体>

- ・外観を確認し、大きなキズや変形がないことを確認してください。
- ・スイッチにしっかりとしたクリック感があることを確認してください。
- ・専用ACアダプタを本体に接続し、電源ボタンを操作して電源ON/OFFが確実に行えることを確認してください。
- ・電源ONし、本体上部の吸気口を指で塞ぎ、吸引が行われていることを確認します。
- ・本体を軽く揺すり、内部から異音がしないことを確認してください。
- ・本体の背面や底面のシールが剥がれていないことを確認してください。

<各種パーツ>

- ・各種パーツが破損したり紛失した場合は、お買い上げの販売店または当社のカスタマーセンターにお問合せください。

2.機器の清浄化、洗浄、消毒方法

機器の使用後は取扱説明書の「使用後の処置」をよく読み、推奨される手順で洗浄、消毒を行ってください。洗浄、消毒後は「組み立て方」を参照して元の状態に戻してください。

<鼻ノズル、本体鼻水キャッチャー、乳幼児用鼻水キャッチャーの洗浄及び消毒>

「購入直後又は長期保管後に使用する場合」
鼻ノズル、各キャッチャーは中性洗剤でよく洗ってから使用してください。

「使用後」

使用後はぬるま湯につけ、中性洗剤と付属の洗浄ブラシを使ってよく洗います。洗浄後、必要に応じて消毒を行います。

「使用前」

鼻ノズル、各キャッチャーは中性洗剤でよく洗ってから使用してください。

<本体、専用ACアダプタの清掃>

乾いた柔らかな布で汚れを拭き取ります。汚れが落とすきれない場合は、うすめた中性洗剤を含ませた布をかたくしぼり、汚れを拭きとります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元、発売元: 株式会社TOKIO Lab
住所:〒183-0033 東京都府中市分梅町3-61-7
電話番号:042-319-0281

【お問い合わせ】

カスタマーセンター:0120-102-227(お客様相談)
受付時間:10時～16時(土・日・祝を除く)

取扱説明書を必ずご参照ください。