

機械器具 32 医療用吸引器
管理医療機器 電動式可搬型吸引器（コード：36616030）

電動鼻水吸引器 SUUPY Pro

【警告】


- ・機器の操作は必ず取扱説明書に従い、正しく使用してください。
- ・吸引がうまく行えない場合は、医療従事者等の指導に従ってください。
- ・乳幼児の手の届くところに保管しないでください。
- ・鼻ノズルの誤飲や誤食にはくれぐれもご注意ください。
- ・専用充電器のコードやシリコンチューブが首などにかからないようにしてください。
- ・使用後は取扱説明書に従い、必ず洗浄と消毒を行ってください。
- ・使用中に異常や不安を感じた場合は、直ちに使用を中止し、スイッチを切りください。
- ・破損した専用充電器は使用しないでください。
- ・専用充電器は、必ず取扱説明書に従い、正しく使用してください。
- ・火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しないでください。
- ・本体内部に水が入らないように注意して使用してください。

【禁忌・禁止】

- ・機器は本書に記載されている使用目的以外の用途では、絶対に使用しないでください。
- ・鼻ノズルが接触する部分に傷口や出血がある場合は、使用しないでください。
〔症状が悪化する恐れがあります〕
- ・本体や専用充電器は絶対に分解しないでください。
〔感電事故や火災など、安全上重大な影響を及ぼす可能性があります〕
- ・濡れた手で専用充電器を取り扱わないでください。
〔感電のおそれがあります〕
- ・本体の充電は必ず専用充電器を使用してください。
〔感電事故や火災など、安全上重大な影響を及ぼす可能性があります〕
- ・定格時間を越えた連続運転を行わないでください。
〔片鼻 10 秒まで〕
- ・機器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
〔破損や変形した場合は使用しないでください〕

【形状・構造及び原理等】

1. 外観形状

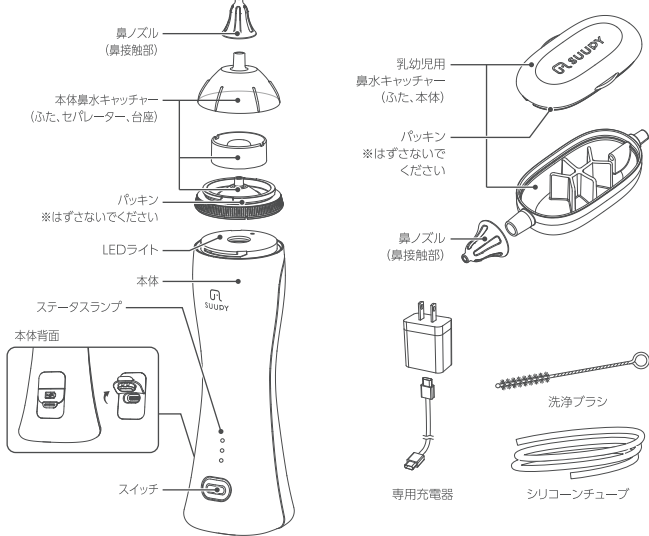

2. 構造、各構成部品及び各部の機能

構成部品名	機能等の説明
本体	内蔵する電動モーターを使用したポンプによって陰圧を発生させる。
本体鼻水キャッチャー	吸引された鼻水を溜める。
鼻ノズル (M/L)	鼻腔内に挿入する。M サイズ及び L サイズがあり鼻腔の大きさに応じて選択する。
スイッチ	電源 ON/OFF 及び吸引レベル (弱・中・強) を段階的に調節する。 スイッチの長押しで LED ライトを ON/OFF する。
乳幼児用鼻水キャッチャー	吸引された鼻水を溜める。(推奨 0 歳児)
リチウムイオン電池	本体に電源を供給する。
LED ライト	本体の先端を LED ライトで照らす。
専用充電器	リチウムイオン電池を充電する。
洗浄ブラシ	鼻水キャッチャー、鼻ノズルを洗浄する際に使用する。
シリコンチューブ	本体によって発生した陰圧を乳幼児用鼻水キャッチャーへ伝える。
ステータスランプ	電源 ON/OFF 及び吸引レベルの状態やリチウムイオン電池の電池残量及び充電状態を表示する。 吸引レベル：緑色表示 電池状態：赤色表示

3. 原理

SUUPY Pro 本体に内蔵された電動モーターでポンプが作動し、作り出した流体の流れにより、本体鼻水キャッチャー内が陰圧となる。これにより、鼻ノズルから鼻水が吸引されて本体鼻水キャッチャーアセンブリ内のセパレーターに貯留される。乳幼児用キットを使用する場合は、本体鼻水キャッチャーアセンブリのコネクタに接続したシリコンチューブ内が陰圧となり、これにより、鼻ノズルから鼻水が吸引されて乳幼児用鼻水キャッチャーに貯留される。

取扱説明書を必ずご参照ください。

4. 性能及び仕様

吸引圧力	－50kPa±15%
ポンプ排気流量	14L/min±15%
電撃に対する保護の形式 による分類	クラスⅡ 機器及び内部電源機器
電撃に対する保護の程度	B 型装着部
吸引流量調整	あり (3 段階)
使用電池	リチウムイオン電池 (DC7.4V)
専用充電器	入力 AC100V 50/60Hz 0.8A Max. 出力 DC9.0V 3.0A
バッテリー充電時間	約 3 時間 (満充電まで)
バッテリー駆動時間	約 30 分 (満充電で吸引レベル強設定時)

5. 原材料

鼻ノズル：シリコーンゴム

【使用目的又は効果】

鼻腔内の分泌物、粘液(鼻水)の吸引に用いること。

【使用方法等】

1.使用前の準備

- 1) 本体鼻水キャッチャーアッセンブリを組み立て、本体に接続する。乳幼児に対して使用する場合は、乳幼児用鼻水キャッチャー、シリコーンチューブを組み立て、本体鼻水キャッチャーのコネクタに接続する。
- 2) 専用充電器を商用電源に接続し、USB PD プラグを本体に接続して内部電源を満充電になるまで充電する。

2.使用中の操作

- 1) 患者の鼻に鼻ノズルを挿入する。
- 2) スイッチを押して吸引を開始する。1回の吸引は10秒以内を目安とし、数回に分けて行う。
- 3) 吸引レベルを調整する。

3.使用後の処置

- 1) 本体鼻水キャッチャー、鼻ノズル又は乳幼児用鼻水キャッチャー、鼻ノズルを本体から取り外す。
- 2) 本体の電動部は洗浄・消毒はできない。乾いた布で清拭し、汚れがひどい場合は、希釈した中性洗剤を含ませた布をかたく絞り拭き取る。
- 3) 取り外した各パーツは、中性洗剤でよく洗い乾燥させる。シリコーンチューブに鼻水が侵入した場合も、同様に洗浄して乾燥させる。
- 4) 各パーツは必要に応じて以下の方法で消毒を行う。
 - ・哺乳びん等の消毒液を用いる。(消毒液は本品に含まない)
 - ・多めの水を入れた大きめの鍋等に浸漬して、3～5分間煮沸する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・機器の操作は必ず取扱説明書に従い、正しく使用してください。
- ・乳幼児の手が届くところや、不安定な場所には保管しないでください。
- ・各鼻水キャッチャーには必ず鼻ノズルを装着した状態で使用してください。
- ・安定した場所で使用してください。
- ・直射日光の当たる場所や、高温、高湿になる場所に保管しないでください。
- ・機器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品の付属品及び本製品の別売品以外は使用しないでください。
- ・必ず専用充電器を使用してください。
- ・濡れた手で専用充電器を取り扱わないでください。
- ・本体と専用充電器は防水ではありません。水や液体がかからないようにしてください。
- ・定格時間を越えた連続運転を行わないでください。(片鼻10秒まで)
- ・機器はシンナー、ベンジン、アルコールなどで拭かないでください。
- ・機器を長期間使用しなかった場合は、使用前に必ず清掃、点検をしてから使用してください。
- ・機器の使用中は利用者の様子を常に監視し、異常や不安を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- ・機器を使用中に何らかの症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、医療従事者等に相談してください。
- ・1回あたり、片鼻10秒を超える吸引を行わないでください。
- ・専用充電器のコードやシリコーンチューブが首などにからまないように注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- ・鼻ノズルは誤食しないように、乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- ・使用後は洗浄、消毒を行い、清潔な状態にしてから保管してください。
- ・保管環境温湿度:温度-25℃～+75℃、湿度15%～90%(結露が無い状態)
- ・耐用期間3年[自己認証(当社データによる)]

【保守・点検に係る事項】

1.使用者による保守点検(日常点検)

- ・安全にお使いいただくため、日常点検(使用前点検)を行ってください。

<専用充電器>

- ・専用充電器の破損やコード、プラグに変形やキズ、断線がないことを確認してください。

<鼻ノズル、シリコーンチューブ>

- ・各部に折れ、ヒビ割れ、汚れ、裂けがないか確認してください。
- ・ヒビ割れや裂けがあった場合は交換してください。

<本体鼻水キャッチャー、乳幼児用鼻水キャッチャー>

- ・各鼻水キャッチャーに汚れ、キズ、ヒビ割れがないか確認してください。汚れがある場合には洗浄してください。キズ、ヒビ割れがある場合は交換してください。
- ・各鼻水キャッチャーにはパッキンが装着されています。パッキンがしっかりとめ込まれていることを確認してください。

<本体>

- ・外観を確認し、大きなキズや変形がないことを確認してください。
- ・スイッチにしっかりとしたクリック感があることを確認してください。
- ・電源ONし、本体上部の吸気口を指で塞ぎ、吸引が行われていることを確認してください。
- ・軽く揺すり、内部から異音がないことを確認してください。
- ・背面や底面のシールが剥がれていないことを確認してください。

<各種パーツ>

- ・各種パーツが破損したり紛失した場合は、お買い上げの販売店または当社のカスタマーセンターにお問合せください。

2.機器の清浄化、洗浄、消毒方法

機器の使用後は取扱説明書の「使用後の処置」をよく読み、推奨される手順で洗浄、消毒を行ってください。洗浄、消毒後は「組み立て方」を参照して元の状態に戻してください。

<鼻ノズル、本体鼻水キャッチャー、乳幼児用鼻水キャッチャーの洗浄及び消毒>

「購入直後又は長期保管後に使用する場合」
鼻ノズル、各鼻水キャッチャーは中性洗剤でよく洗ってから使用してください。

「使用後」

使用後はぬるま湯につけ、中性洗剤と付属の洗浄ブラシを使ってよく洗ってください。洗浄後、必要に応じて消毒をしてください。

「使用前」

鼻ノズル、各鼻水キャッチャーは中性洗剤でよく洗ってから使用してください。

<本体、専用充電器の清掃>

乾いた柔らかな布で汚れを拭き取ってください。汚れが落としきれない場合は、うすめた中性洗剤を含ませた布をかたくしぼり、汚れを拭き取ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元、発売元: 株式会社TOKIO Lab
住所:〒183-0033 東京都府中市分梅町3-61-7
電話番号:042-319-0281

【お問い合わせ】

カスタマーセンター:0120-102-227(お客様相談)
受付時間:10時～12時、13時～16時(土・日・祝を除く)

取扱説明書を必ずご参照ください。