

類別：機械器具 77 バイブレーター

管理医療機器 一般的名称：家庭用電気マッサージ器（JMDN コード 34662000）

ヘルスピットマッサージチェア J C - 1 1 0

【警告】

使用前には、必ず背もたれ部のカバーが破れていないか確認する。

またその他の部分にも破れがないか確認する。（どんな小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理依頼をしてください。）

カバーが破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

【警告】

人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容

●下記の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。

・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医療電気器を使用している人

・悪性腫瘍のある人

・心臓に障害のある人

・妊娠中や出産直後の人

・糖尿病などの高度な末梢循環障害による知覚障害のある人

・皮膚に創傷のある人

・安静を必要とする人

・温度感覚喪失が認められる人

・体温 38 度以上（有熱期）の人

（例 1：急性炎症症状の強い人（倦怠感、悪寒、血圧変動など）

例 2：衰弱しているとき）

・骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性疼痛性疾患の人

・背骨（脊髄）に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人

・使用しても効果が現れない場合は医師に相談すること

・現在、医療機関で治療中の人

●医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。症状が悪化するおそれがあります。

●使用前には、必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認してください。また、その他の部分にも破れがないか確認してください。どんなに小さな破れでも、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き修理を依頼してください。

けがや感電のおそれがあります。

●湿気の多い場所や濡れた身体で使用しないでください。故障や感電の原因となります。

●使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。埃や湿気で絶縁劣化による漏電火災の原因となります。

●お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電や火傷の原因となります。

●絶対に分解や修理、改造をしないでください。発火や異常動作によるけがをするおそれがあります。

【禁忌・禁止】

●マッサージの以外の目的で使用しないでください。また、頭、胸腹、骨部（ひじ、ひざなど）へは使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。

●子供や自分で操作ができない人に使用させないでください。本体の上で遊ばせないでください。




また、幼児の手が届く範囲では使用をしないでください。

●本体の上に立って使用しないでください。転倒による事故やけがのおそれがあります。

●素肌のままで使用しないでください。けがのおそれがあります。

【形状・構造及び原理等】


治療器本体

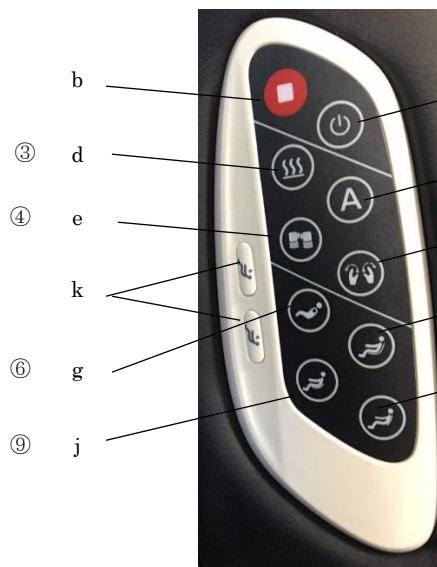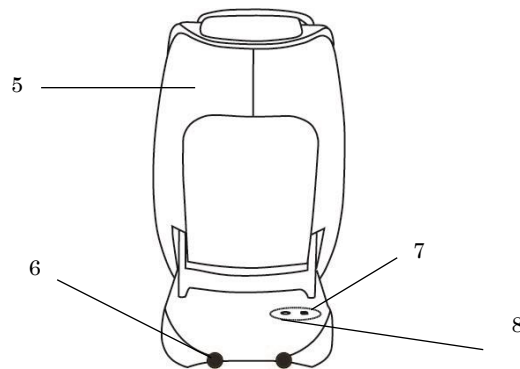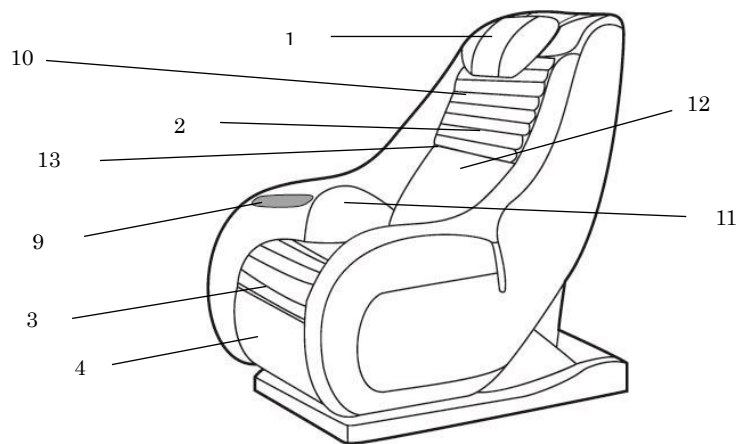

- a.電源ON/OFFボタン
- b.急停止ボタン
- c.自動プログラムボタン
- d.ヒーターボタン
- e.タキマッサージボタン
- f.もみマッサージボタン
- g.リヒートマッサージボタン
- h.全身もみマッサージボタン
- i.下半身もみマッサージボタン
- j.上半身もみマッサージボタン
- k.リクライニング角度調整ボタン

- 1. 枕
- 2. 背もたれ
- 3. 座面クッション
- 4. フットレスト
- 5. バックカバー
- 6. キャスター
- 7. 電源メインスイッチ
- 8. 電源インレット
- 9. 操作パネル
- 10. もみ玉
- 11. エアバック（左右）
- 12. 背もたれ部
- 13. ヒーター（左右）

- ①. 電源ON/OFF表示ランプ
- ②. 自動プログラム表示ランプ
- ③. ヒーター表示ランプ
- ④. タキマッサージ表示ランプ
- ⑤. もみマッサージ表示ランプ
- ⑥. リヒートマッサージ表示ランプ
- ⑦. 全身もみマッサージ表示ランプ
- ⑧. 下半身もみマッサージ表示ランプ
- ⑨. 上半身もみマッサージ表示ランプ

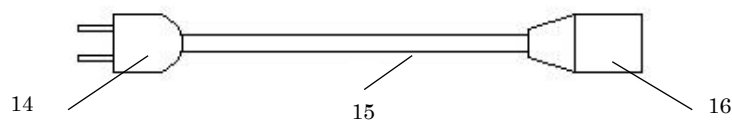

- 14. 電源プラグ
- 15. 電源コード
- 16. 電源コネクター

1. 構成

本器は、次のものから構成されている。

① 本体（操作パネルを含む）

② 電源コード

2. 本製品は、電動機によるもみ機能とたたき機能、施療部移動機能、空気圧で作動するエアバッグによる圧迫機能を組み込んだ AC100V50/60Hz 商用電源用の「家庭用電気マッサージ器」で、治療器本体に腰かけ、マッサージを行う機器である。

治療方法は、あらかじめ定められた手順と組み合わせに従いマッサージを行う「自動プログラム」、使用者の設定により任意の組み合わせでマッサージを行う「手動」の 2 種がある。

操作は操作パネルで行い、実装している各表示ランプに情報が表示される。

3.仕様

(1)電氣的定格

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力	70W
	(ヒーター：24W)
定格時間	15 分

(2)機器の分類

感電に対する保護の形式	形式：クラスⅡ 機器
-------------	------------

4. 性能

(1)もみ機能

38 回/分±10%

(2)たたき機能

672 回/分±10%

(3)圧迫機能

最大 80 k Pa

(4)施療部移動機能

1.64cm/秒±10%

【使用目的又は効果】

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用するこ

【使用方法等】

1. 使用方法

1.使用前

1.1 取扱説明書の注意事項などを確認する。

1.2 各部布地が破れていないことを確認する。

1.3 電源プラグを差し込む。

2.使用中

2.1 電源メインスイッチをオ

2.2 「電源オフボタン」をオにする。

2.3 「リクライニング角度調整ボタン」で任意の位置に調整し「自動プログラムボタン」又は任意のマッサージボタンを押して、マッサージを開始する。

2.4 緊急時にマッサージ動作を止める際には、「急停止ボタン」を押すとマッサージ動作がすべて停止する。

3.使用后

3.1 「電源オフボタン」をオにする。

3.2 電源メインスイッチをオにする。

3.3 電源プラグをコンセントから抜く。

【使用上の注意】

(1) 使用上の注意の詳細は、取扱説明書の「使用上のご注意」を参照してください。

(2)交流 100V 以外の電源は使用しないでください。

(3)使用時間は 1 日 30 分程度にしてください。

逆効果やけがのおそれがあります。

(4)使用中に身体に異常を感じた時はただちに使用を中止し、医師に相談してください。

事故や体調不良を起こすおそれがあります。

(5)電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。感電やショートのおそれがあります。 (6)故障が発見された場合は使用をただちに中止し電源を切り、お買い上げ販売店またはお客様相談室に点検、修理を依頼してください。感電やショート、火災の原因になります。 (7)次のようなときは使用しないでください。 ・疲労が激しいとき ・酒に酔っているとき ・湿疹が生じているとき 体調不良をおこすおそれがあります。 (8)強く押しつけて使用しないでください。皮膚や筋肉を痛める原因になります。 (9)布団や毛布をかぶせて使用しないでください。火災やモーターの温度上昇の原因になります。 (10)食前、食後の1時間は使用しないでください。体調不良を起こすおそれがあります。 素肌のままで使用しないでください。けがのおそれがあります。 他の治療器具との同時使用はしないでください。体調不良を起こすおそれがあります。 電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。感電やショート、火災の原因になります。 アクセサリなどの硬いものをつけて使用しないでください。機構部に接触してけがのおそれがあります。 本体に2人以上乗らないでください。故障やけがのおそれがあります。 停電のときは電源プラグをコンセントから抜いてください。停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。 【取扱い上の注意】 (1)機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店またはお客様相談室に連絡してください。 (2)機器は改造しないでください。 (3)本体を倒したり、強い衝撃を与えないでください。	【保管方法及び有効期間等】 汚れやホリを取った後、温度・湿気・ホリなどの悪影響が少ないところに保管してください。 長い間使用されない場合は、カバーなどをかけてホリがつかないようにしてください。 【保守・点検に係る事項】 〈清拭の方法〉 1)お手入れは乾いた布で汚れをふき取ってください。 2)お手入れの際にはシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。 〈使用者による保守点検事項(日常点検)〉 1) 製品を正しく使用するために下記項目について使用前点検を必ず行ってください。なお、詳細については取扱説明書をご確認ください。 <table><tr><th>項目</th><th>内容</th></tr><tr><td>外観</td><td>マッサージ機構部の張地が破れていないか確認してください。また、その他の部分にも破れがないか確認してください。</td></tr><tr><td>付属品</td><td>断線、キズや汚れなどが無いこと。</td></tr><tr><td>電源</td><td>正常に電源が入ること。AC電源を接続して電源が入ること。</td></tr><tr><td>機能・動作</td><td>リモコンの表示やボタン動作が正しく動作すること。</td></tr></table> 2) 定期点検についても、取扱説明書を参照して頂くか、弊社お客様相談室にご相談ください。 3)故障が発見された場合はお買い上げ販売店又はお客様相談室に点検、修理を依頼してください。 4)分解や改造をしないでください。 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 製造業者：NINGBO BEYOND ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD（中華人民共和国） 製造販売業者：トクヨバイオテック株式会社群馬事業所 電話：027-212-5848	項目	内容	外観	マッサージ機構部の張地が破れていないか確認してください。また、その他の部分にも破れがないか確認してください。	付属品	断線、キズや汚れなどが無いこと。	電源	正常に電源が入ること。AC電源を接続して電源が入ること。	機能・動作	リモコンの表示やボタン動作が正しく動作すること。
項目	内容										
外観	マッサージ機構部の張地が破れていないか確認してください。また、その他の部分にも破れがないか確認してください。										
付属品	断線、キズや汚れなどが無いこと。										
電源	正常に電源が入ること。AC電源を接続して電源が入ること。										
機能・動作	リモコンの表示やボタン動作が正しく動作すること。										