

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器
電動式内視鏡レンズ洗浄器
JMDN コード：70466000

OPLYS ディスポーザブルセット

再使用禁止


【禁忌・禁止】

使用方法

- ・再使用禁止 [交差感染のおそれ]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

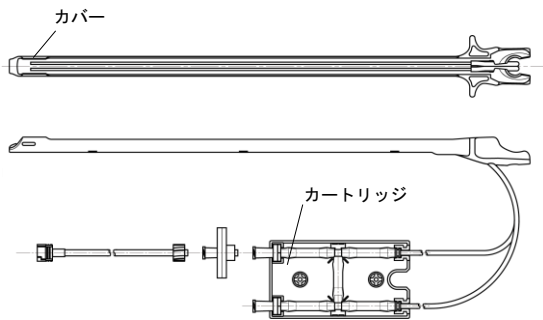

2. 原材料

(メタ) アクリレート系樹脂、ポリカーボネート、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、シリコン

3. 原理

加圧された洗浄液（生理食塩水）及び CO₂ ガスをアタッチメント先端部の噴射口より内視鏡のレンズ面に吹き付け、術中の内視鏡レンズの汚れを洗浄する。

【使用目的又は効果】

硬性内視鏡を使用した外科的手術で硬性内視鏡レンズ表面に付着した血液、ガス等の汚れを生理食塩水と二酸化炭素（CO₂）ガスの誘導により除去、洗浄する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 包装及び内容物に傷や汚れ等の異常がないこと確認して開封する。
- 2) アタッチメントを内視鏡に装着する。
- 3) カートリッジをカートリッジドックに取り付ける。
- 4) コントロールユニットの使用 방법에従い使用する。
- 5) 使用後は施設の手順に従って廃棄する。

2. 組み合わせて使用する医療機器

本品と組み合わせて使用する医療機器は以下のとおりである。

販売名（一般的名称）	医療機器届出番号
OPLYS コントロールユニット （電動式内視鏡レンズ洗浄器）	44B3X10002000003

本品の装着が可能な内視鏡は以下のとおりである。

販売名：KARL STORZ テレスコープシステム I
一般的名称：内視鏡用テレスコープ
医療機器認証番号：222AKBZX000470
型式番号：26003BA
製造販売業者：カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社

販売名：高解像硬性腹腔・胸腔鏡
一般的名称：硬性腹腔鏡
医療機器認証番号：227ABBZX00065000
型式番号：WA4KL130
製造販売業者：オリンパスメディカルシステムズ株式会社

販売名：Precision IE ラパロスコープ
一般的名称：硬性腹腔鏡
医療機器認証番号：227AFBZX00119000
型式番号：0502103030
製造販売業者：日本ストライカー株式会社

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本品は外径 10mm、先端レンズ角度 30°の内視鏡用であるため、サイズの異なる内視鏡に使用しないこと。[使用中に脱落するおそれ]
- ・アタッチメントを内視鏡に装着する際は、向きに注意すること。
[充分な洗浄ができないおそれ]
- ・使用前に各接続部に緩みがないことを確認すること。また、使用中は破損、接続部の緩み、液漏れ等が無い事を定期的に確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光を避け、室温で保管すること

有効期限

滅菌後 1 年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社トライテック
TEL：097-578-6156