

類別：機械器具（02）医療用照明器
一般医療機器：診療用照明器 JMDN12276000

咽喉鏡


【禁忌・禁止】

- (1) 本器を滅菌しないこと。[変形や故障する可能性があるため。]
- (2) 高酸素濃度雰囲気および引火ガス、粉塵のそばで使用しないこと。[引火、爆発の恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- (1) 咽喉鏡 α -No. 5（以下、本体）・・・・・・・・・・・・・1
- (2) 電球 L-06・・・・・・・・・・・・・1

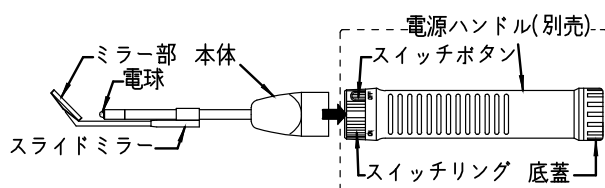

＜ 寸法・質量 ＞ : $\phi 22 \times 135 \sim 160\text{mm}$ （突起含まず）
: 45g

2. 構造

本体および電源ハンドルは着脱できる構造になっており、以下の製品に取り付け可能な複数の電源ハンドルと互換性がある。

- (1) 販売名：ナイツハロゲン検眼鏡 BX α
届出番号：13B2X00131107517
- (2) 販売名：ナイツストリークレチノスコープ RX
届出番号：13B2X00131108941
- (3) 販売名：ナイツスポットレチノスコープ RX-SP
届出番号：13B2X00131109111
- (4) 販売名：ファイバー耳鼻鏡ヘッド F0-H（アダプタ付き）
届出番号：13B2X00131122003

3. 仕様

- (1) 電球光源 : L-06（3V、0.9W）
- (2) ミラースライド量：25mm
- (3) 動作保証条件 : 温度 10～35℃
: 湿度 30～90%（結露なきこと）

4. 作動・動作原理

本器電球光源の電源は、本体に接続した電源ハンドルから供給される。電球光源からの光は、ミラーで反射され咽喉部を明るく照明する。

【使用目的又は効果】

患者の診療及び治療時に用いる照明器であり、咽喉部を照明することで目視検査ができる。

【使用方法等】

電源ハンドルに接続し、スイッチボタンを押しながらスイッチリングを回すことで電球が点灯する。必要に応じ、スライドミラーのミラー部をスライドさせることができる

※ 詳細については、附属の取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

＜ 重要な基本的注意 ＞

- (1) 使用する電池は、本体に接続する電源ハンドルに対応した

電池のみとし、その他の電池・充電池などは使用しないこと。[点灯時間が短くなるなど、本来の性能が発揮されなくなるため。]

- (2) 電球定格が合わないため、充電池柄は使用しないこと。
- (3) 照明を点灯させたまま放置したり、袋や布を被せるなど放熱を妨げるような使用をしないこと。[電球周辺部が高温になり、故障や火災、火傷する可能性があるため。]
- (4) 消灯直後の電球は高温のため素手では触らないこと。また、電球交換の際は消灯後、温度が下がってから実施すること。[火傷の原因となるため。]
- (5) ミラー部は毎回の使用前後に消毒すること。[感染防止のため。]

【保管方法及び有効期間等】

＜ 保管方法 ＞

- (1) 保管時温度：-10～55℃
- (2) 保管時湿度：10～95%（結露なきこと）

＜ 耐用期間 ＞

本器の耐用期間は、附属の取扱説明書に基づく使用で 8 年間とする。[自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係わる事項】

＜ 清拭・消毒の方法 ＞

本器が汚れた場合、取扱説明書に記載の手順にしたがって清拭や消毒をすること。

＜ 使用者による保守点検事項 ＞

- (1) 乾電池が切れた際には、底蓋を着脱し電池交換をすること。
- (2) 点灯しない場合、フィラメントが切れた可能性があるため確認をし、切れていた際には新しい電球に交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名称：株式会社ナイツ

取扱説明書を必ず参照してください。