

類別：機械器具（22）検眼用器具
一般医療機器：単眼倒像検眼鏡 JMDN35216000

「充電式ブライトスコープ BS-Ⅲ LED」の附属品

側視鏡（右）、（左）


* 補正レンズ+1D、+2D、+3D

イエローフィルタ


双眼アタッチメント BS-Ⅱ-BA

【形状・構造及び原理等】

* 下記①～⑤について、それぞれ固定具が 1 つ附属する。補正レンズにおいては、+1D / +2D / +3D の 3 種類から選択できる。

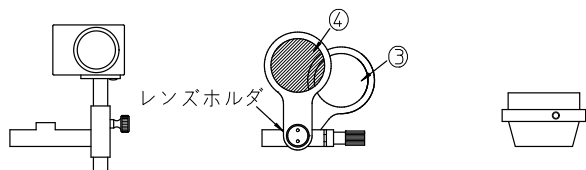

① 側視鏡（右） ③ 補正レンズ 固定具
② 側視鏡（左） ④ イエローフィルタ

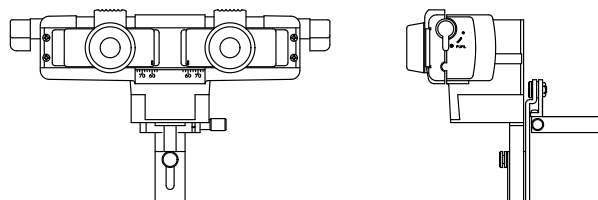

⑤ 双眼アタッチメント BS-Ⅱ-BA 側面図

＜ 保管方法 ＞

- (1) 保管時温度：-20～60℃
- (2) 直射日光や多湿環境下では保管しないこと。

＜ 耐用期間 ＞

本器の耐用期間は、添付文書の記載内容に基づく使用で 8 年間とする。[自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係わる事項】

＜ 清拭・消毒の方法 ＞

本器が汚れた場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き、ひどい汚れには薄めた中性洗剤をつけて拭き上げ、そのあと乾いた柔らかい布などで乾拭きすること。

ガラス部については、市販のレンズクリーナーを塗布した柔らかい布などで軽く拭くこと。また、クリーニング時にガラス部を強く押さないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名称：株式会社ナイツ

【使用目的又は効果】

単眼倒像検眼鏡に上記①～⑤を取り付けることで、様々な機能を付加することができる。

※ 詳細については、各々の取扱説明書を参照のこと。

【使用方法等】

＜ 使用方法 ＞

本器は、下記に示すナイツ単眼倒像検眼鏡シリーズに取り付け使用する。

(1) 販売名：充電式ブライトスコープ BS-Ⅲ LED

届出番号：13B2X00131125401

(2) 販売名：ナイツブライトスコープ BS-Ⅱ LED

届出番号：13B2X00131126601

＜ 取付方法 ＞

単眼倒像検眼鏡に固定具をセットしてから（BS-Ⅱ LED には掛け式用リングがあるため不要）、①～⑤いずれかの附属品を取り付ける。

* 補正レンズおよびイエローフィルタは、レンズホルダにセットすることで、それぞれ組み合わせて使用できる。

※ 詳細については、併せて単眼倒像検眼鏡に附属の取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

＜ 重要な基本的注意 ＞

滅菌する場合は、本器の安全のため 40℃または 40℃に限りなく近い温度での EOG（エチレンオキシドガス）滅菌を実施し、EOG 滅菌以外は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

取扱説明書を必ず参照してください。