

機械器具 25 医療用鏡 顕微鏡付属品 (37294000)
一般医療機器 特定保守管理医療機器

手術顕微鏡取付アダプター

【警告】

ご使用前に確認すること。

- ・ 本製品のご使用前には必ず警告マークの付いているネジが確実に締め付けられていることを確認すること。
(本製品の落下・破損の恐れがあります。)
- ・ アームの隙間に、指や器具等を挟まないように注意すること。


【禁忌・禁止】

- ・ 取付アダプターを分解、改造しないこと。
(故障の原因になります。)
- ・ 本製品には、弊社指定製品以外の機器、機材を取り付けないこと。
(事故又はケガの原因となります。)

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

本製品の形状、構造は以下の通り。

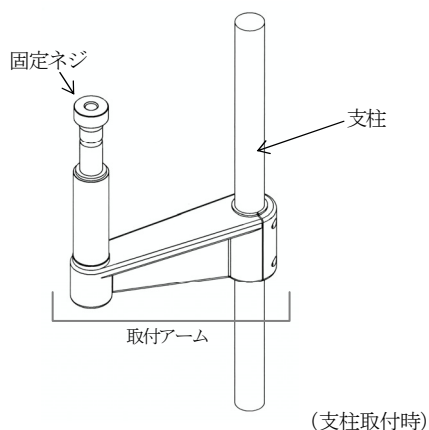

2. 原理

カールツァイスメディテック株式の「手術顕微鏡 OPMI pico」を支柱に取り付けるための、アダプター。

3. 寸法及び質量 (*³)

寸法 W90×D390×H450 (mm)
質量 約 7kg

【使用目的又は効果】(*³)

1. 使用目的

本製品は、手術顕微鏡の種類及び型式に関係なく、機能的には手術顕微鏡を支持することを目的とした機器で、可搬式スタンド等の支柱に取り付け手術顕微鏡を支持するものである。(顕微鏡の機能を追加することを目的とした機器)

【使用方法等】(*³)

1. 本製品は、顕微鏡を取り付けることで、ご使用が可能です。取り付け方法は、取付手順書を必ず読み、正しく取り付けのこと。
2. ご使用前には必ず顕微鏡が、確実に装着されているか確認すること。
3. 顕微鏡の操作方法等については、顕微鏡の附属の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

その他の注意

- ・ 本製品をご使用するにあたり、添付文書を熟読し、本製品を使用するための訓練を受けた者が使用すること。また、訓練された者に指示された者が使用すること。
- ・ アームの隙間に、指や器具等を挟まないように注意すること。
- ・ 使用・移動の際は、顕微鏡との固定ネジをしっかりと締めておくこと。
- ・ 本製品に衝撃を与えないこと。

【保管方法及び有効期間等】(*³)

1. 貯蔵・保管方法

- ・ 本製品を使用しない場合の保管は、顕微鏡との固定ネジをしっかりと締めて保管しておくこと。
- ・ 高温、多湿、ほこり、直射日光、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響を及ぼす恐れのない場所に保管すること。
- ・ 傾斜、振動、衝撃(移動時を含む)などを避け、安定状態に注意すること。
- ・ 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所には保管しないこと。

2. 有効使用期間 (耐用期間)(*²)

使用開始から 5 年とする。(自己認証による)

【保守・点検に係る事項】(*³)

- ・ ご使用前や点検時には必ず、本製品の取り付けやネジの締め込みを確認すること。
- ・ アダプターの清掃は、定期的に行うこと。
- ・ 上記の点検を行っても改善がなされなかった場合や、本製品に何らかの異常や故障が生じた場合は、直ちに使用を中止し、適切な表示を行い、弊社又は弊社指定の代理店まで連絡すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】(*³)

製造販売業者



永島医科器械株式会社

TEL.03-3812-1271

製造業者

永島医科器械株式会社 第二工場