

機械器具 55 医療用洗浄器・骨粉収集器 (17131000)
一般医療機器

骨片コレクター

【警告】


- ・ 本製品は、未滅菌品です。使用には必ず洗浄・滅菌を行なうこと。
組合せ製品に関しては必ず分解して洗浄・滅菌を行うこと。
[洗浄・滅菌効果が損なわれ、尚且つ破損の原因となります]
- ・ 製品の使用にあたっては、使用上の性能・性質をご理解の上、不適当な目的に使用しないこと。
[人体への影響および製品の劣化・破損の原因になります]
- ・ 樹脂及びゴム類はどの滅菌方法においても、使用方法／使用頻度／使用薬液等で必ず劣化が起こります。

【禁忌・禁止】

- ・ 本製品の加工、改造等は絶対行わないこと。製品に衝撃を加えたり、変形させたり、加工・打刻等の二次加工は行わないこと。
[製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因になります]
- ・ 洗浄前の一次消毒は行わないこと。
[付着物の変性固着により洗浄・滅菌効果が損なわれます]
- ・ 酸・アルカリ・塩素系の強い洗浄剤および消毒液は使用しないこと。
[製品の劣化・腐食を促進させることになります]
- ・ 洗浄後、水・蒸留水等のついた状態で長時間放置しないこと。
[骨片スクリーンの腐食・変色・シミの原因になります]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

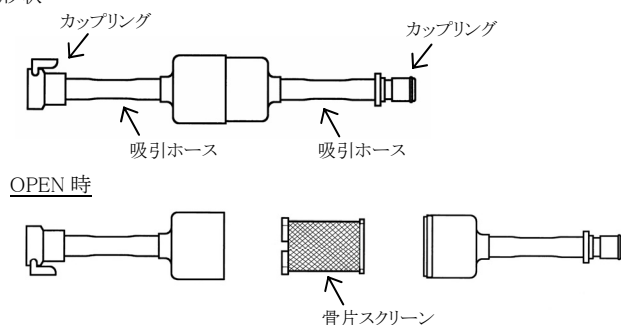

2. 構造

本装置は、吸引ホース、骨片スクリーン、カップリングで構成されている。

3. 原理

接続されている吸引用器具から送られてくる切除物や液体から、ある程度の固形物(骨片)を網の目状の膜で濾し取り確保し、その他の液体等は分離され排出される設計となっている。

【使用目的又は効果】(※²)

1. 使用目的

外科手術・治療時などの際、鋸引き・リーミング・穿孔・ラッピング等により生じた骨片を収集するために用いる容器をいう。

【使用方法等】(※²)

1. カップリングで切除した対象物や吸引する液体等を吸い取る器具へつなぐ。
2. 吸引後、本器内部にある骨片スクリーンを取り出し、骨片などを採取する。

注意: カップリングはポリセタール製のため熱耐性が低いため、高圧蒸気滅菌できません。消毒の際には熱を伴わない消毒を行うこと。

【使用上の注意】

- ・ 使用目的以外の目的で使用しないこと。製品の使用に際しては、手技にかなう知識・技術を必要とします。使用方法を熟知し、通常慣例として使用している医師、または医師の指導のもとでご使用ください。
- ・ 使用前に必ず、チューブの破損や切れ目などないか確認してください。
- ・ 本製品は、未滅菌品です。使用には適切な条件で必ず洗浄・滅菌をしてご使用ください。(保守・点検に係る事項参照)
- ・ 使用後は付着した血液・体液・組織及び薬液等が乾燥する前に速やかに洗浄してください。

【保管方法及び有効期間等】(※²)

貯蔵・保管は洗浄をした後、金属部分の腐食・変色・シミを防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥させること。また、滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染の防ぐためにも清潔な場所に保管し、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 器具の取扱いについて、粗雑な扱いは避けてください。
- ・ 洗浄に使用する洗剤は医療用洗剤を使用してください。また、洗浄には pH が中性に近い(≒pH6~8)洗剤を使用してください。
- ・ 洗浄装置(超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクター等)で使用する水は、蒸留水や脱イオン水をご使用ください。水道水の中には含まれる残留塩素及び有機物質が腐食・変色・シミの原因となります。また、洗剤の残留がないよう十分すすぎを行ってください。
- ・ 洗浄後は直ちに滅菌を行うか、または直ちに乾燥させてください。滅菌前には、汚れ・損傷等が無い点検してください。点検後、適切な条件で必ず滅菌行ってください。
- ・ 本製品は下記滅菌が可能です。組合せ製品の場合は必ず分解してから滅菌行ってください。
 - ◇高圧蒸気滅菌(カップリングは除く)
 - ◇プラズマ滅菌
 - ◇EOG 滅菌
- ・ **カップリング**は消毒を行ってください。使用する消毒液は、消毒液メーカーへご確認ください。
- ・ 本状の他に別途情報提供文書等が同封されている場合にはその指示にも従ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者



永島医科器械株式会社

TEL.03-3812-1271

製造業者

永島医科器械株式会社 第二工場