

額 帯 反 射 鏡

【警告】


- ・ 本製品は取扱いに注意し、衝撃を加えたり、曲げる様なことはしないでください。
(故障の原因になります。)

【禁忌・禁止】

- ・ 高圧蒸気滅菌は行わないこと。
(故障の原因になります。)
- ・ 本製品に落下等の衝撃を与えないこと。また、無理な力で操作を行わないこと。
(故障の原因になります。)

【形状・構造及び原理等】

形状：

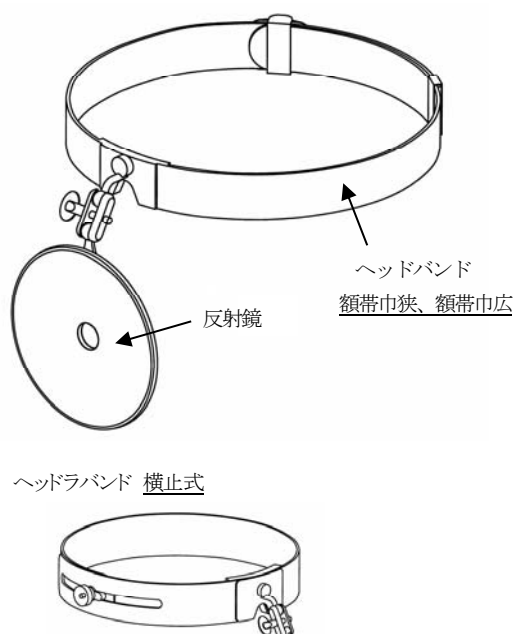

寸法及び質量 (*³)

寸法	ヘッドバンド部： 額帯巾狭、額帯巾広 最大周約 600mm 横止式 最大周約 600mm、最小周約 540mm
重量	約 100g(額帯巾狭総重量) 約 118g(額帯巾広総重量) 約 114g(横止式総重量) 約 48g(反射鏡のみ)

【使用目的又は効果】(*³)

診察の目的で鼻又は喉頭等の腔に光束を投射するために用いるヘッドバンドに円形凹面鏡を取り付けた器具をいう。

【使用方法等】(*³)

耳鼻咽喉科において診察の目的で使用し、円形の鏡面に光をあて、光束を患部や診察・観察したい部位に投射するために用いる。ヘッドバンドと反射鏡を好みに合わせて取り付け使用する。

【使用上の注意】

- ・ 使用前には、汚れや傷、先端の損傷などの異常がないか、必ず点検すること。
- ・ 額帯部に必要以上の力を加えたり、曲げたりしないこと。
- ・ 使用目的以外の目的で使用しないこと。
- ・ 使用後に、血液や体液、組織及び薬品などが付着した場合は、乾燥しないよう、直ちに消毒液等で拭き取る。
- ・ 本製品は、医師又は医師の監督下での医療従事者が使用するものであり、十分な研修を受けた者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】(*³)

- ・ 高温・多湿・ほこり・直射日光・風通し・イオウ分などを含んだ空気等により、悪影響を及ぼす恐れのない場所に保管すること。
- ・ 傾斜・振動・衝撃(移動時を含む)など、安定状態に注意を払うこと。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には、本製品を保管しないこと。
- ・ 本装置を修理その他の理由で輸送する時は、取扱いに注意し、納入時に使用した梱包材または同等の梱包材を使用してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 高圧蒸気滅菌は行わないこと。
- ・ 使用後はできるだけ早く、アルコール等の消毒液で本器具を拭き、血液や体液・組織及び薬品などが残らないよう除去すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*³)

製造販売業者



製造業者

永島医科器械株式会社

TEL.03-3812-1271

永島医科器械株式会社 第三工場