

機械器具 43 医療用つち 木製つち (11947020)

一般医療機器

木製槌

【警告】


- ・ 本製品は取扱いに注意し、変形させる様なことはしないでください。
[人体への影響および製品の劣化・破損の原因になります]
- ・ 製品のご使用にあたっては、使用上の性能・性質をご理解の上、不適当な目的に使用しないでください。製品の劣化・破損の原因になります。
[人体への影響および製品の劣化・破損の原因になります]

【禁忌・禁止】

- ・ 本製品の加工、改造等は絶対行わないでください。変形させたり、切削等の二次加工は製品を著しく劣化・消耗させ、破損の原因になります。
[製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因になります]
- ・ 水・蒸留水等への付け置きや水分が付いた状態で長時間放置しないでください。
[製品のカビ・膨張の原因になります。]

【形状・構造及び原理等】

形状:種類(木製、九大型)

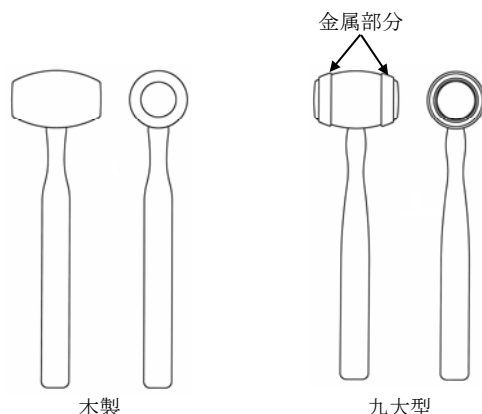

材質:木材、真鍮(九大型金属部分)

表面処理:クロムメッキ(九大型金属部分)

【使用目的又は効果】(*³)

木製ハンマーをいう。本品は再使用可能である。

【使用方法等】(*³)

耳鼻咽喉科にて使用し、のみを使う際に叩くハンマーとして使用する。本製品は木製である。

【使用上の注意】

- ・ 使用目的以外の目的で使用しないこと。製品の使用に際しては、手技にかなう知識・技術を必要とします。使用方法を熟知し、通常慣例として使用している医師、または医師の指導のもとでご使用ください。
- ・ 変形やキズをつけるなど粗雑な取扱いは製品の寿命を著しく低下させます。
- ・ 使用後、血液・体液・組織及び薬品等が付着した場合、乾燥しないよう直ちに汚れを拭き取ってください。

【保管方法及び有効期間等】(*³)

汚れの拭き取り・消毒をした後、貯蔵・保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 器具の取扱いについて、粗雑な扱いは避け、損耗が生じないように注意してください。取扱中に破損したり、それによって思わぬケガしたりする場合がありますので十分注意してください。
- ・ 使用後、汚れなどは布で拭き取ってください。
- ・ 汚れを取り除いた後、消毒液を布に含ませて拭き取り消毒を行ってください。
- ・ 本製品の過度な水分と乾燥は製品の品質を劣化させます。
- ・ 本製品の滅菌を実施したい場合は EOG 滅菌が可能です。
- ・ 本状の他に別途情報提供文書等が同封されている場合にはその指示にも従ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*³)

製造販売業者

永島医科器械株式会社



TEL.03-3812-1271

製造業者

永島医科器械株式会社 第三工場