

機械器具 50 開創及び開孔用器具 開孔器（35517000）  
一般医療機器

咽喉頭直達鏡

【警告】


- ・ 本製品は取扱いに注意し、不用意に衝撃を加えたり、不必要に曲げる様なことはしないでください。
- ・ 本製品は、未滅菌品です。使用には必ず滅菌を行ってください。人体への影響及び製品の劣化・破損をおこす原因になります。
- ・ 製品のご使用にあたっては、使用上の性能・性質をご理解の上、不適当な目的に使用しないでください。製品の劣化・破損の原因になります。

【禁忌・禁止】

- ・ 本製品の加工、改造等は絶対行わないでください。製品に衝撃を加えたり、振動・切削・打刻等の二次加工は製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因になります。
- ・ 滅菌前の洗浄及び滅菌に際しては、酸・アルカリの強い洗浄剤及び滅菌にそぐわない洗浄剤を使用しないでください。また、目の粗い磨き粉や金属ウールで器具の表面を磨くことはやめてください。製品表面の腐食・サビの原因になります。
- ・ 洗浄後、水・蒸留水等のついた状態で長時間放置しないでください。製品表面の腐食・サビの原因になります。

【形状・構造及び原理等】

形 状： 佐藤式 彎曲型

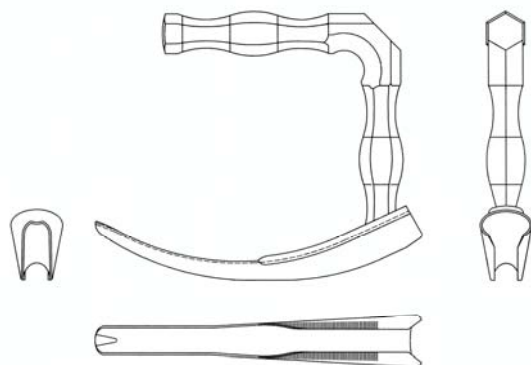

材 質： ステンレス

【使用目的又は効果】（\*<sup>6</sup>）

様々なサイズ、形状及び輪郭のものがあり、遠位端は丸く、挿入して開孔するときに内腔、身体開口部又は管を拡張又は伸張することができる手術器具をいう。検査又は他の器具の挿入時に用いる。

【使用方法等】（\*<sup>6</sup>）

患者へ歯プロテクターの装着及び舌圧子挿入後、ホルダーに固定した本製品を舌圧子に沿って挿入し、声帯の手前の部位に本製品の先端を当て固定させ、術視野を広げる。

【使用上の注意】

- ・ 使用目的以外の目的で使用しないこと。製品の使用に際しては、手技にかなう知識・技術を必要とします。使用方法を熟知し、通常慣例として使用している医師、または医師の指導のもとでご使用ください。
- ・ 本製品を使用する際、本製品底面部に設けている凸凹部分を「歯プロテクター」に当て、ホルダーに固定した本製品がずれ込まないように固定してください。

- ・ 本製品挿入時には、必ず内視鏡で確認をしながら、歯・舌・唇・咽頭・喉頭・声帯等を傷つけないように注意してください。また、先に挿入している内視鏡に損傷等与えないよう慎重に挿入すること。
- ・ 本製品は、未滅菌品です。使用には適切な条件で必ず洗浄、滅菌をしてご使用ください。（保守・点検に係る事項参照）
- ・ 鋼製器具は使用目的にあわせ、繊細かつ精巧に作られていますので、変形やキズをつけるなど粗雑な取扱いは製品の寿命を著しく低下させます。
- ・ 使用後は付着した血液・体液・組織及び薬品等が乾燥しないよう直ちに洗浄すること。

【保管方法及び有効期間等】（\*<sup>6</sup>）

貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐蝕を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥させること。また、滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染の防ぐためにも清潔な場所に保管し、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 器具の取扱いについて、粗雑な扱いは避け、先端等の重要な部分に無理な力や、衝撃・干渉により双方に損耗が生じないように注意してください。取扱中に破損したり、それによって思わぬケガをする場合が考えられますので十分注意してください。
- ・ 洗浄に使用する洗剤は医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないでください。また、洗浄には pH が中性に近い（≒pH6～8）洗剤を使用してください。
- ・ 洗浄装置（超音波洗浄装置・ウォッシャーディスインフェクター等）を使用するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意しバケットに収納して洗浄してください。
- ・ 洗浄及び滅菌に使用する水は、蒸留水や脱イオン水をご使用ください。水道水の中には含まれる残留塩素及び有機物質がシミや錆発生の原因となります。また、洗剤の残留がないよう十分すすぎを行ってください。
- ・ 洗浄後は直ちに乾燥させること。湿った状態で長時間放置すると器具表面へのシミ・錆発生の原因となりますので避けてください。
- ・ 洗浄・消毒後、器具類が常温になってから取り扱ってください。金属は温まると膨張し、冷やさぬまま動作を繰り返す傷を増やすこととなります。また使用不能の原因になります。そのような場合は速やかにメーカーへ修理を依頼してください。
- ・ 滅菌前には、汚れ・損傷等が無いか点検してください。点検後、セット・包装し、適切な条件で必ず滅菌行ってください。
- ・ 本製品は下記滅菌が可能です。組合せ製品の場合は必ず分解してから滅菌を行ってください。  
◇高圧蒸気滅菌 ◇プラズマ滅菌 ◇EOG 滅菌
- ・ 本状の他に別途情報提供文書等が同封されている場合にはその指示に従ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（\*<sup>6</sup>）

製造販売業者



製造業者

永島医科器械株式会社

TEL.03-3812-1271

永島医科器械株式会社 第三工場