

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器  
管理医療機器 歯科用根管拡大装置 70705000

特定保守管理医療機器 エンド用コントラ MPAS

**\*\*【禁忌・禁止】**


＜使用方法＞

- ・回転中プッシュボタンを押さないこと。特に頬側部での使用の際は注意すること。[発熱によるやけどや早期故障のおそれ]
  - ・次のようなファイルを使用しないこと。
    - － 曲がり、傷、変形がみられるもの。
    - － JIS規格外のもの。
- [破損によるけがのおそれ]

**\*\*【形状・構造及び原理等】**

1) 構造

MPAS-F16R(代表モデル)

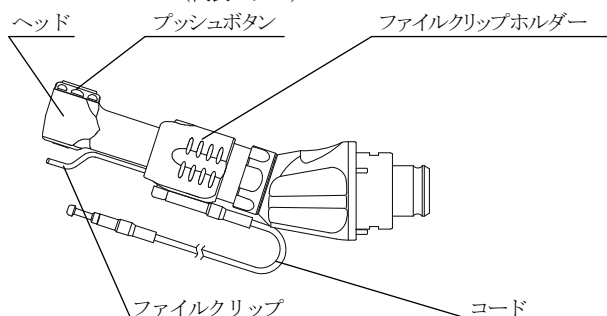

| 種類名    | 減速比  | 使用可能なファイル                    |
|--------|------|------------------------------|
| F10R   | 10:1 | φ 2. 35エンジン用<br>ショートシャंकファイル |
| F16R   | 16:1 |                              |
| F20R   | 20:1 |                              |
| MPAS-Y | 1:1  |                              |

**\*\*【使用目的又は効果】**

φ 2. 35エンジン用ショートシャंकファイルを取り付け、根管拡大作業を行う。

**\*\*【使用方法等】**

1) 使用前準備

- ① 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に記載の方法に従い、洗浄、注油、滅菌を行う。
- ② サヤのジョイント形状に合ったマイクロモータ及びエアモータを本品へ取り付ける。
- ③ コードの先端を根管長測定器のクリップにはさんで接続する。
- ④ ファイルの切り欠きと軸の形状を合わせてファイルを押し込みファイルを取り付け、ファイルとファイルクリップを接触させる。
- ⑤ 【保守・点検に係る事項】に記載の方法に従い、使用前点検を行う。

2) 使用方法

モータを回転させ使用する。

3) 使用后

- ① 本品からモータ、ファイル、根管長測定器を取り外す。
- ② 【保守・点検に係る事項】に記載の方法に従い、洗浄、注油、滅菌を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・本品やファイルの着脱はモータの回転が完全に停止してから行うこと。
- ・ファイルの製造販売業者が指定する許容最高回転速度を超えて使用しないこと。
- ・ファイルを取り付けた時、必ずファイルを軽く引いて確実に装着されていることを確認してから使用すること。
- ・使用時、又は点検時にガタ、振動、音、温度(発熱)等の異常を感じた場合、使用を中止し、取扱説明書に記載の方法に従い、対処すること。

- ・根管長測定器を使用する場合は、本品を口腔内に接触させないように注意すること。[正確な測定ができないおそれ]
- ・モーターハンドピースに取り付ける際は、ヘッドにオイルが残留していないことを確認してから取り付けること。オイルが残留している場合は、適当な所に立てかける等してオイルを抜くこと。[モーターハンドピースが故障するおそれ]

**\*\*【使用上の注意】**

1) 重要な基本的注意

- ・本品を取り扱う時は保護眼鏡、マスク等を着用すること。
- ・酸化電位水(強酸性水、超酸性水)、強酸、強アルカリ性の薬剤、塩素含有の溶液、ベンジン、シンナー等の溶剤による洗浄、浸漬、拭き取りをしないこと。
- ・ファイルはシャंकがきれいなものを使用すること。

2) その他の注意

- ・落下させるなど強い衝撃を与えないこと。

**\*\*【保管方法及び有効期間等】**

＜耐用期間＞

製造の日から、正規の保守点検(消耗部品の交換)を行った場合に限り7年間[自己認証(当社データ)による]とする。

**\*\*【保守・点検に係る事項】**

1) 洗浄・注油・滅菌

- ① 本品表面の汚れをブラシ(金属製は不可)等で払い落とし、消毒用アルコールを含ませた綿などで拭き取る。
- ② 製造販売業者指定のスプレー(以降はスプレーという)を本品の後部に差し込み、約2秒間注油を行う。
- ③ 滅菌パックに入れて135℃までの温度でオートクレーブ滅菌を行い、使用する時まで滅菌パックに入れたまま、清潔な状態を保てる場所に保管する。

【推奨する滅菌条件】

高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)

| 温度   | 時間   |
|------|------|
| 121℃ | 20分間 |
| 132℃ | 15分間 |

・注油に関する注意

- － 注油する際、スプレーの圧力により、本品が飛び出さないよう確実に押さえること。

・滅菌に関する注意

- － 滅菌直後は高温となっているため、取り扱いに注意すること。

2) 使用者による保守点検事項

＜使用前点検＞

- － 本品にファイルを取り付け、ガタつきを確認する。(毎回)
- － ファイルの許容最高回転速度に回転数を合わせて本品を作動させ、ファイルの振れ、振動、音、発熱等の異常がないことを確認する。(毎回)

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社ナカニシ

ナカニシお客様相談窓口

0120-7242-56

受付時間 9:00～17:00(土日・祝祭日を除く)

TEL：0289-64-3380

FAX：0289-62-5636