

**2024 年 10 月改訂（第 5 版）

*2021 年 7 月改訂（第 4 版）

機械器具 (06) 呼吸補助器

高度管理医療機器 再使用可能な手動式肺人工蘇生器（JMDN：17591000）

特定保守管理医療機器 シリコンレサシバッグ

ピープバルブ **ID-2413

ピープバルブ用アダプタ **ID-2001

【警告】

- ・ 本品は、弊社取り扱いの、販売名「シリコンレサシバッグ」以外に接続して使用しないこと。
- ・ 本品の使用中は、常に患者を監視すること。もし、異常が生じたときは適切な措置を講ずること。

*【使用目的又は効果】

■使用目的


シリコンレサシバッグに接続し、呼気時の端末に陽圧を維持させることによって、蘇生における呼吸の補助または改善を行います。

*【使用方法等】

■使用方法

シリコンレサシバッグ

1. ピープバルブとピープバルブ用アダプタを接続し、これをシリコンレサシバッグの呼気弁部の下部に接続してください。

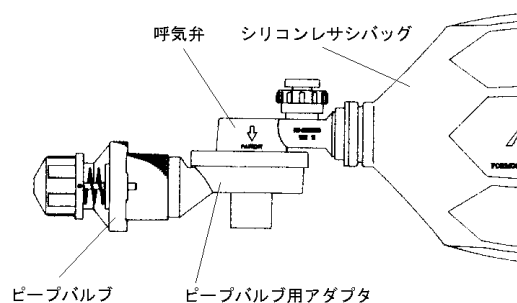

2. ピープバルブの調節ノブを回し、陽圧を任意に設定します。

【使用上の注意】

1. 本品は未滅菌品です。
2. 使用前、各部品に破損がないことを確認してください。
3. 分解・洗浄を行なったとき、各部にキズ等の不具合がないことを確認し正しく組立ててください。
4. 本品を改造しないでください。

【保管方法及び有効期間等】


■保管方法

1. 浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。
2. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所は避けて保管してください。
3. $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ の環境で保管してください。


**【形状・構造及び原理等】

■形状

・ ピープバルブ

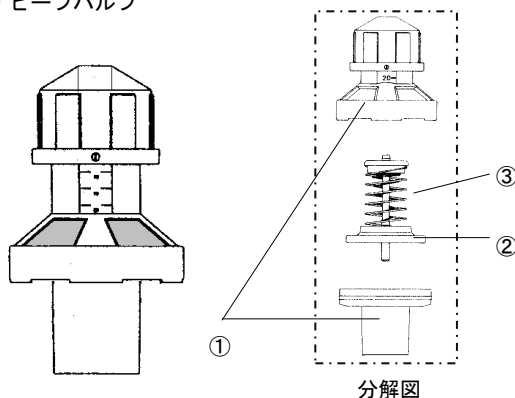

・ ピープバルブ用アダプタ (呼気弁接続アダプタ)

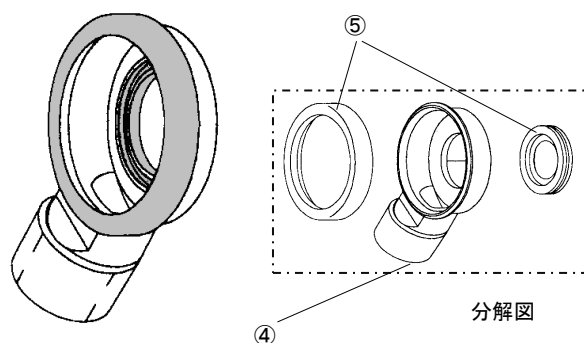

■組成

番号	商品コード	部品名	組成
①	ID-2413	ハウジング	ポリサルフォン樹脂
②		呼気弁	シリコンゴム
③		パネ	ステンレス鋼
④	ID-2001	ハウジング	ポリサルフォン樹脂
⑤		シーリング弁	シリコンゴム

■作動・動作原理

シリコンレサシバッグに接続し、調節ノブにより呼気ガスの排出をコントロールし、気道及び肺胞内に陽圧を残し維持する。

■使用期限

製造後5年以内（使用期限内であっても、破損・変色等が発生した時点で廃棄してください）

【保守・点検に係わる事項】

■消毒・滅菌方法

1. 使用後は、前項「形状」の分解図のように分解し、各構成部品を水又は温水で洗浄した後、薬液消毒（例：グルコン酸クロルヘキシジン液 0.1～0.5%溶液水）又はオートクレーブ滅菌（134℃まで）を行ってください。
2. 滅菌又は消毒後は、十分に乾燥させてから各構成部品を組み立ててください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社

製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch