

機械器具 (06) 呼吸補助器

高度管理医療機器 再使用可能な手動式肺人工蘇生器 (JMDN:17591000)

特定保守管理医療機器 シリコンレサシバッグ

リザーバーバッグ **ID-1860/ID-1865 リザーバーバルブ **ID-1850

【警告】


- ・ 本品は弊社取り扱いの、販売名「シリコンレサシバッグ」以外に接続して使用しないこと。
- ・ 本品の使用中は、常に患者を監視すること。もし、異常が生じたときは適切な措置を講ずること。

【禁忌・禁止】

- ・ 高濃度酸素の使用中は、火気の取扱いに注意すること。

**【形状・構造及び原理等】

■形状

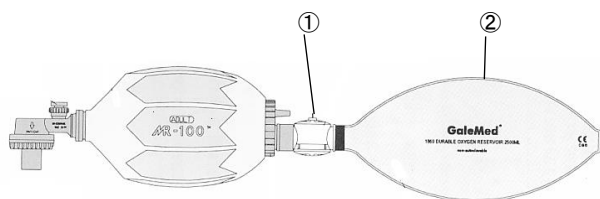

■組成

番号	商品コード	商品名	組 成
①	ID-1850	リザーバーバルブ	ポリサルフォン樹脂 シリコンゴム
②	ID-1860 ID-1865	リザーバーバッグ	ポリサルフォン樹脂 ポリ塩化ビニル

■種類

商品コード	商品名	バッグ容量	対応シリコンレサシバッグ
ID-1850	リザーバーバルブ	—	ID-101,102,103MR
ID-1860	リザーバーバッグ	2500ml	ID-101,102MR
ID-1865	リザーバーバッグ	600ml	ID-103MR

■作動・動作原理

酸素の貯留


【使用目的又は効果】

■使用目的

再使用可能な手動式肺人工蘇生器(シリコンレサシバッグ)に高濃度酸素を供給するためにバルブとバッグを組み合わせ使用します。

*【使用方法等】

1. シリコンレサシバッグにリザーバーバルブ及びリザーバーバッグを接続し、酸素チューブをシリコンレサシバッグの吸入弁部酸素チューブ接続口に取り付けます。(下図参照)
2. 送気バッグの圧迫を緩めるとバッグの復元によりリザーバーバッグに貯留された酸素ガスが送気バッグ内に取り込まれ、これを患者に高濃度酸素として供給します。
3. 使用後は、バルブとバッグを分離し、それぞれ薬液消毒（バルブはオートクレーブ可）した後、充分乾燥させてください。

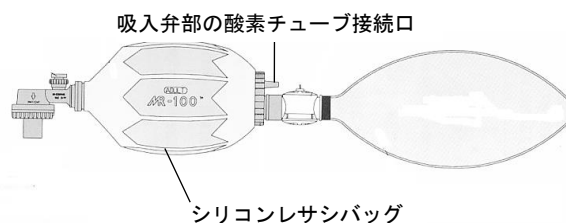

【取扱上の注意】

1. 本品は未滅菌品です。
2. 使用前にバッグに破損等がないことを確認してください。
3. 酸素使用中は、発火物を近づけないでください。(引火、爆発のおそれがあります)

【保管方法及び有効期間等】

■保管条件

1. 浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。
2. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所は避けて保管してください。
3. 保管環境は-40℃～+60℃です。

■使用期限

製造後 5 年以内（使用期限内であっても破損・変色等が発生した時点で廃棄してください）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社

製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch