

**2024 年 10 月改訂（第 4 版）
*2021 年 7 月改訂（第 3 版）

機械器具(06)呼吸補助器
高度管理医療機器 再使用可能な手動式肺人工蘇生器（JMDN:17591000）

特定保守管理医療機器 シリコンレサシバッグ


シリコンリザーバーバッグ **ID-70147/ID-70148/ID-70149

【警告】

1. 使用前に本品の接続に誤りがないか、各接続部が機密で
確実であり、接続部からの漏れがないことを確認すること。
[適切な機能が得られないおそれがあります。]

**【形状・構造及び原理等】

■形状

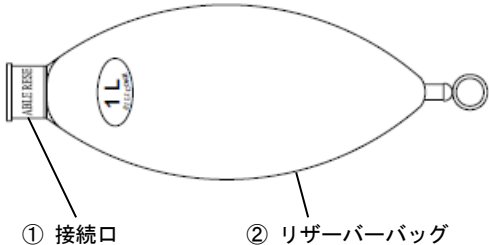

■組成

①	接続口	ポリサルフォン樹脂
②	リザーバーバッグ	シリコンゴム

■種類・組成

商品コード	バッグ容量
ID-70147	500ml
ID-70148	1000ml
ID-70149	2000ml

■作動原理

酸素の貯留

【使用目的又は効果】

■使用目的

再使用可能な手動式蘇生器(シリコンレサシバッグ)に
接続し、高濃度酸素を供給する。

*【使用方法等】

1. 使用前

- 対象患者に適したサイズのリザーバーバッグを選択してください。
- リザーバーバッグの破損（破れ等）がないことを確認してください。
- シリコンレサシバッグに接続し、漏れのないことを確認してください。
- 表示に従い、最大使用期限内であるかを確認の上で使用してください。

2. 使用中

- シリコンレサシバッグを加圧する際は、患者の肺容積に留意してください。

- バッグの使用中は接続口などの接続部に緩みがないことを確認してください。

3. 使用後

- 取り外す際には、接続口部を持って外してください。
- 必要に応じて水洗いし、滅菌処理を行ってください。
- 亀裂の発生・柔軟性の低下などの劣化、又は黄ばみなどの変色が見られたら廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

■貯蔵・保管方法

浸水に注意し、高温多湿、直射日光を避けて保管すること。
保管環境は－4 0℃～＋6 0℃です。

■使用期限

製造後5年以内（使用期限内であっても亀裂の発生・柔軟性の劣化、又は黄ばみなどの変色が発生した時点で廃棄してください）

【取扱上の注意】

- シリコンレサシバッグに接続する時は、安全性を十分に確認してください。
- 酸素の供給中は火気の取り扱いに注意してください。

【保守・点検に係る事項】

■洗浄と消毒・滅菌

必要に応じて水洗いし、滅菌処理を行ってください。
推奨滅菌方法
オートクレーブ：134℃（最大）
滅菌後は、滅菌済パックなどに収納し、次回の使用に備えてください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社
製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch