

機械器具(06)呼吸補助器
管理医療機器 空気・酸素マスク (JMDN: 35171000)

ソフト酸素フェースマスク

再使用禁止


**ID-3634, ID-3635, ID-3636/ID-3687, ID-3688, ID-3689

【禁忌・禁止】

本品は 1 患者専用のディスポーザブル製品です。
再使用はしないこと。

**【形状・構造及び原理等】

■形状・組成

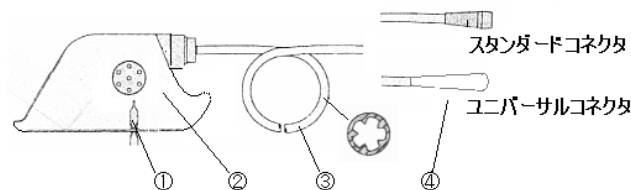

番号	部 品 名	組 成
①	ス ト ラ ッ プ	ポリエステル ファイバー
②	マ ス ク 本 体	医療用ポリ塩化ビニル
③	酸 素 チ ュ ー プ	医療用ポリ塩化ビニル
④	コ ネ ク タ	医療用ポリ塩化ビニル

■種類

商品コード	サイズ	酸素チューブ
ID-3634	乳児用	チューブ長: 2m
ID-3635	小児用	チューブ断面: ノンキック型
ID-3636	成人用	コネクタ: スタンダード
ID-3687	乳児用	チューブ長: 2m
ID-3688	小児用	チューブ断面: ノンキック型
ID-3689	成人用	コネクタ: ユニバーサル

■作動・動作原理

マスクで患者の鼻と口を被覆し、酸素チューブを介して酸素を供給します。

*【使用目的又は効果】

■使用目的


本品は患者の気道内に酸素を供給し、酸素投与療法に使用します。

*【使用方法等】

■使用方法

1. 本品をビニル袋から取り出し、ゴミ・汚れ・損傷等がないことを確認してください。
2. 酸素チューブのコネクタの一端を酸素流量計の加湿瓶等に、他端をマスクにそれぞれ確実に接続してください。

3. マスクを装着し、ストラップを後頭部にかけてください。
4. 必要に応じてストラップの両端を引いてマスクを固定させます。

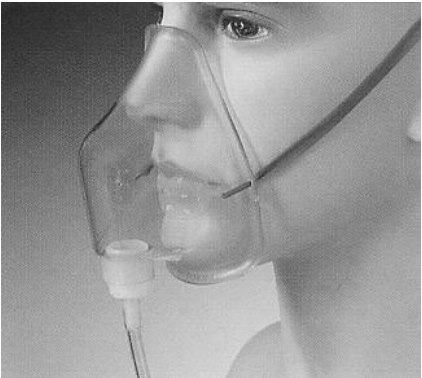

ソフト酸素フェースマスク装着図

酸素流量及び FiO₂ のめやす

FiO ₂ \ 酸素流量(L/分)	4L/分	5L/分	6L/分	7L/分	8L/分
成人用 (20bpm/600ml)	36%	41%	45%	47%	49%
小児用 (20bpm/300ml)	36%	39%	42%	46%	49%
乳児用 (60bpm/20ml)	40%	42%	45%	49%	52%

FiO₂ (吸入酸素濃度 %) は、呼吸量によっても異なります。

*【使用上の注意】

1. 本品は未滅菌品です。滅菌して使用する場合には、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等、材質に影響をおよぼすおそれのある滅菌又は消毒を行わないでください。
2. 本品は 1 患者専用です。患者毎に交換してください。
3. 使用前に本品を酸素流量計の加湿瓶等に接続し、器具又は酸素チューブ接続部からの漏れがなく、マスクから酸素が流出することを必ず確認してください。
4. 酸素チューブを折り曲げたり、ねじったりしないでください。
5. 本品使用中は、発火物を近づけないでください。(引火、爆発のおそれがあります)
6. 本品を加湿器等から外す場合、チューブを持たずコネクタを持って取り外してください。
7. チューブ内に結露した水分が溜まる場合がありますので注意してください。
8. 長期にわたり使用する場合は、衛生管理に注意してください。

い。変質・硬化したものは使用しないでください。

9. 本品の使用中に発疹等が生じた場合、直ちに使用を中止し
医師の指示に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

■貯蔵・保管方法

浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。

■使用期限

製造後3年以内（使用期限内であっても破損・変色等が発生した時点で廃棄してください）

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社

製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch