

機械器具（06）呼吸補助器

管理医療機器 空気・酸素マスク（JMDN:35171000）

ソフト酸素フェースマスク


酸素フェースマスク

再使用禁止 **ソフト・クリア酸素チューブ **ID-31290, ID-31313／グリーン酸素チューブ**ID-34502**

【禁忌・禁止】

本品は 1 患者専用のディスポーザブル製品です。
再使用はしないこと。

**【形状・構造及び原理等】

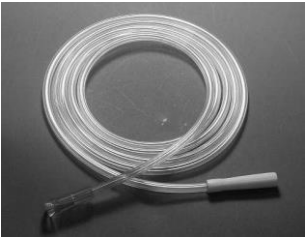

ID-31290

承認番号：21900BZX00647000



ID-31313

承認番号：21900BZX00647000



ID-34502

承認番号：21900BZX00646000

■組成

医療用ポリ塩化ビニル（全商品とも）

■種類

接続コネクタの形状がそれぞれ異なりますので、使用する加湿器等に応じて 3 種類から選択してください。

チューブの断面形状は、すべてノンキंक型です。

商品コード	商 品 名	コネクタの形状
ID-31290	ソフト・クリア酸素チューブ	ユニバーサル/ スタンダード
ID-31313	ソフト・クリア酸素チューブ	スタンダード/ スタンダード
ID-34502	グリーン酸素チューブ	スタンダード/ スタンダード

【使用目的又は効果】

■使用目的
酸素フェースマスク用酸素供給チューブ

*【使用方法等】

1. 本品をビニル袋から取り出し、ゴミ・汚れ・破損等がないことを確認してください。
2. 本品の一端をマスクに、他端を酸素流量計の加湿瓶等に接続してください。

*【使用上の注意】

1. 本品は 1 患者専用です。患者毎に交換してください。
2. 本品は未滅菌品です。滅菌して使用する場合には、オートクレーブ滅菌及び乾熱滅菌等、材質に影響をおよぼすおそれのある滅菌又は消毒を行わないでください。
3. 本品の一端をマスクに、他端を加湿瓶等に接続し、器具あるいは接続部より漏れがなく、マスクから酸素が流出することを確認してから患者に装着してください。
4. 本品を曲げたり、ねじったりしないでください。閉塞の原因となります。
5. 酸素使用中は、発火物を近づけないでください。（引火、爆発のおそれがあります）
6. 本品をマスク・加湿瓶等から外す場合は、酸素チューブを持たずコネクタを持って取り外してください。
7. 酸素チューブ内に結露した水分が溜まることがありますので注意してください。
8. 長期にわたり使用する場合、衛生管理に注意してください。変質・硬化したものは使用しないでください。

*【保管方法及び有効期間等】

■貯蔵・保管方法
浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。

■使用期限
製造後 3 年以内（使用期限内であっても破損・変色等が発生した時点で廃棄してください）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社
製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch