

機械器具 (06) 呼吸補助器

管理医療機器 空気・酸素非再呼吸式マスク (JMDN:35173000)

クリア高濃度酸素フェースマスク

再使用禁止

****ID-3675, ID-3678, ID-3692, ID-3693**

【禁忌・禁止】


本品は 1 患者専用のディスポーザブル製品です。
再使用はしないこと。

*【使用目的又は効果】

本品は、患者の肺胞内に空気と混合した高濃度の酸素を供給するために用います。

**【形状・構造及び原理等】

■形状

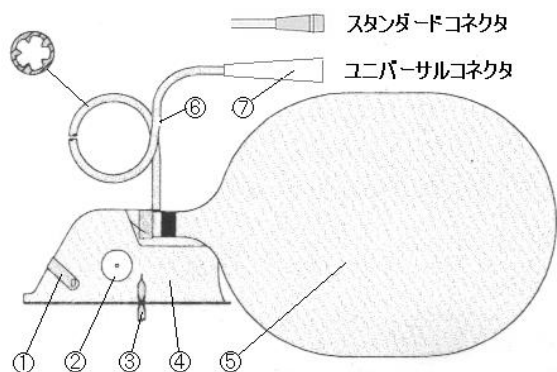

*【使用方法等】

■使用方法

1. 本品をビニル袋から取り出し、ゴミ・汚れ・損傷等がないことを確認してください。
2. 酸素チューブのユニバーサル又はスタンダードコネクタを酸素流量計の加湿瓶等に確実に接続してください。酸素チューブの他端は、リザーババッグの接続口に確実に接続してください。
3. マスクを患者の顔面に当て、ストラップを後頭部にかけてください。
4. 必要に応じて、ストラップの両端を引いてマスクを固定させます。
5. ノーズクリップをつまみ、顔面により確実に固定させることでマスクのズレを防ぐことができます。

■組成

番号	部 品 名	材 質
①	ノーズクリップ	アルミニウム
②	サイド弁	シリコンゴム
③	ストラップ	ポリエステル ファイバー
④	マスク本体	医療用ポリ塩化ビニル
⑤	リザーババッグ	ポリエチレン樹脂
⑥	酸素チューブ	医療用ポリ塩化ビニル
⑦	ユニバーサル/スタンダードコネクタ	医療用ポリ塩化ビニル



クリア高濃度酸素フェースマスク装着図

酸素流量及び FiO₂ の目安

■種類

商品コード	サイズ	酸素チューブ
ID-3678	小児用	チューブ全長: 2m チューブ断面: ノンキンク型 コネクタ: ユニバーサル
ID-3675	成人用	
ID-3693	小児用	チューブ全長: 2m チューブ断面: ノンキンク型 コネクタ: スタンダード
ID-3692	成人用	

FiO ₂ \ 酸素流量(毎分)	12L	13L	14L	15L
成人用 (20bpm/600ml)	93%	94%	95%	97%

FiO ₂ \ 酸素流量(毎分)	8L	9L	10L	11L	12L
小児用 (20bpm/300ml)	91%	92%	93%	94%	95%

(FiO₂ (吸入酸素濃度) は、呼吸量によっても異なります。)

■作動・動作原理

常にリザーババッグが膨らんだ状態になるように酸素の流量調節を行うことで、高濃度の酸素を供給することができます。

***【使用上の注意】**

1. 本品は1患者専用です。患者毎に交換してください。
2. 本品は未滅菌品です。滅菌して使用する場合には、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等、材質に影響をおよぼすおそれのある滅菌又は消毒を行わないでください。
3. 患者に装着する前に本品を加湿瓶等に接続し、器具又は接続部からの漏れがなくマスクから酸素が流出することを必ず確認してください。
4. 酸素チューブは折り曲げたり、ねじったりしないでください。同様に、リザーバーバッグが折れたりねじれたりしないよう注意してください。
5. 吸気時にリザーバーバッグがしぼまないように、酸素の流量調節をしてください。
6. 本品使用中は、発火物を近づけないでください。（引火、爆発のおそれがあります）
7. 本品を加湿瓶等から外す場合、チューブを持たずコネクタを持って取り外してください。
8. チューブ内に結露した水分が溜まることがありますので注意してください。
9. 本品の使用中に発疹等が生じた場合、直ちに使用を中止し医師の指示に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

■貯蔵・保管方法

浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。

■使用期限

製造後3年以内（使用期限内でも破損、変色等が発生した時点で廃棄してください）

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社

製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch