

機械器具(06)呼吸補助器
管理医療機器 エアロゾル気管切開用マスク (JMDN：35179000)

トラキアマスク(気管切開用マスク)

再使用禁止**ID-5201, ID-5202

【警告】

患者の体動や固定状態などにより本品の装着位置にずれが生じた場合、気管切開チューブのコネクタ口を塞ぎ、呼吸困難となるおそれがあるため注意するとともに、リスクを考慮して本品の使用を検討すること。


また、本品を使用する際は、患者の状態に応じて生体情報モニタを併用すること。

【禁忌・禁止】

本品は1患者専用のディスポーザブル製品です。
再使用はしないこと。

**【形状・構造及び原理等】

■形状・組成

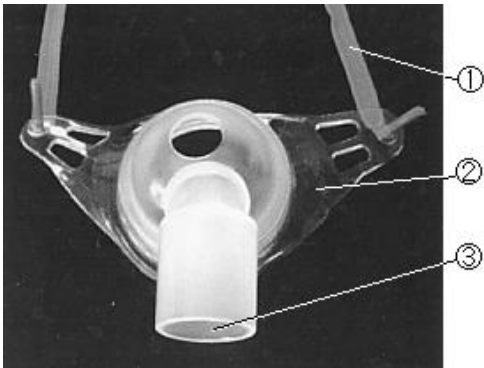

番号	部 品 名	組 成
①	ス ト ラ ッ プ	ポリエステルファイバー
②	マ ス ク 本 体	医療用ポリ塩化ビニル
③	エルボーコネクタ (蛇 腹 管 接 続 口)	ポリプロピレン樹脂

■種類

商品コード	サイズ	蛇腹管接続口
ID-5202	成人用	外径φ22mm
ID-5201	小児用	

■作動・動作原理

本品で患者の気管切開部を被覆し、エルボーコネクタ(蛇腹管接続口)に接続した蛇腹管を介してエアロゾルを患者に供給します。

*【使用目的又は効果】


■使用目的

本品は気管切開チューブ又はホルダーが留置されている患者に使用するためのエアロゾル吸入療法用のマスクです。

【使用方法等】

■使用方法

1. 本品をビニル袋から取り出し、ゴミ・汚れ・損傷等がないことを確認してください。
2. 気管切開部を塞がないようにマスクを装着し、ストラップを首の後ろにまわします。
3. ストラップの両端を引いてマスクを固定します。
4. エルボーコネクタ(蛇腹管接続口)に、別途用意するネブライザーからの蛇腹管(内径φ22mm)を確実に接続してください。(エルボーコネクタは水平方向に回転させることができます)

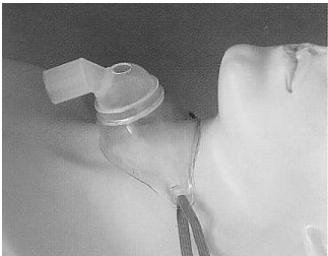

トラキアマスクを装着した図

【使用上の注意】

1. 本品は1患者専用です。患者毎に交換してください。
2. 本品は未滅菌品です。滅菌して使用する場合には、オートクレーブ滅菌及び乾熱滅菌等、材質に影響をおよぼすおそれのある滅菌又は消毒を行わないでください。
3. 接続した蛇腹管を折り曲げたり、ねじったりしないでください。
4. 長時間にわたり使用する場合、衛生管理に注意してください。変質・硬化したものは使用しないでください。
5. 本品使用中は、発火物を近づけないでください。(引火、爆発のおそれがあります。)
6. 本品の使用、発疹等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指示に従ってください。
7. ネブライザーの取扱方法は、別途ネブライザーの取扱説明書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

■貯蔵・保管方法

浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。

■使用期限

製造後３年以内（使用期限内であっても破損・変色等が発生した時点で廃棄してください）

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社

製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch