

機械器具(06)呼吸補助器
管理医療機器 エアロゾル気管切開用マスク（JMDN：35179000）

ベンチュリートラキアマスク

再使用禁止


**ID-3715

【禁忌・禁止】

本品は 1 患者専用のディスポーザブル製品です。
再使用はしないこと。

**【形状・構造及び原理等】

■形状・組成

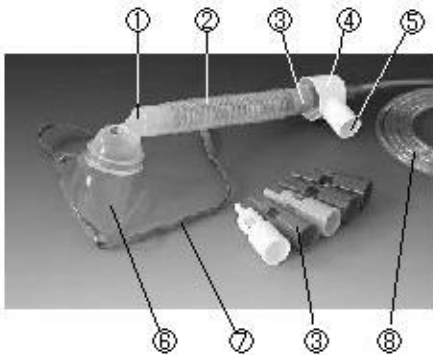

番号	部 品 名	組 成
①	接続部(エルボコネクタ)	ポリプロピレン樹脂
②	蛇腹管	エチレン酢酸ビニルアセテート (EVA) 樹脂
③	酸素濃度調節器 (ダイリュータ)	ポリプロピレン樹脂
④	ネブライザー用フード	ポリプロピレン樹脂
⑤	ネブライザー用蛇腹管接続部	ポリプロピレン樹脂
⑥	マスク本体	医療用ポリ塩化ビニル
⑦	ストラップ	ポリエステルファイバー
⑧	酸素チューブ	医療用ポリ塩化ビニル

■種類

商品コード	サイズ	酸素チューブ
I D-3 7 1 5	成人用	チューブの長さ：2m チューブ断面：ノンキンク型 コネクタ：スタンダード

■作動・動作原理

ベンチュリーの原理を用いたダイリュータ（空気を混合させる酸素濃度調節器）を使用して、一定流量の酸素を流すことにより希望の酸素濃度患者の気道内に酸素を供給します。


*【使用目的又は効果】

■使用目的

ベンチュリーの原理を用いたダイリュータ（空気を混合させる酸素濃度調節器）を使用して、一定流量の酸素を患者の気道内に供給する低圧酸素吸入療法による気管切開用マスクです。
ネブライザー用フードを使用し酸素濃度及び加湿濃度を調節することで、患者の気道内に高流量又は一定の流量で酸素投与療法を行いながら高湿度のエアロゾル吸入療法ができます。

*【使用方法等】

1. 本品をビニル袋から取り出し、ゴミ・汚れ・損傷等がないことを確認してください。

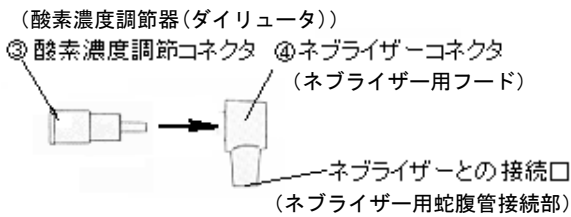

2. 使用する酸素濃度調節器を 6 種類から選択してください。
ネブライザー用フードに使用するダイリュータ（酸素濃度調節器）を上図のようにカチッと音がするまで挿入します。

ダイリュータ（酸素濃度調節器）と酸素濃度・総酸素流量の関係

コネクタ色	酸素濃度（％）	酸素流量（L/分）
橙 色	5 0	1 2
赤 色	4 0	8
緑 色	3 5	6
白 色	3 1	4
黄 色	2 8	3
青 色	2 4	2

3. 蛇腹管(②)と酸素濃度調節器(③)を左上図のように接続してください。なお、蛇腹管はマスクとの接続部(①エルボコネクタ)を中心に360度水平回転させることができます。
4. 酸素チューブの一端を酸素濃度調節器に、他端を酸素流量計の加湿器瓶等にそれぞれ確実に接続してください。
さらに、ネブライザーからの蛇腹管は、ネブライザー用フードの接続口(⑤)に接続して併用することができます。
5. 気管切開部を塞がないようにマスクを装着し、ストラップを首の後ろにまわします。

6. ストラップの両端を引いてマスクを固定させます。

【使用上の注意】

1. 本品は未滅菌品です。滅菌して使用する場合には、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等、材質に影響をおよぼすおそれのある滅菌又は消毒を行わないでください。
2. 1患者専用です。患者毎に交換してください。
3. 患者に装着する前に、加湿瓶等に接続しマスクから酸素が漏れなく流出することを必ず確認してください。
4. 酸素チューブは確実に接続してください。折り曲げたり、ねじったりしないでください。
5. 本品使用中は、発火物を近づけないでください。（引火、爆発のおそれがあります）
6. 酸素チューブを加湿瓶等から外す場合は、コネクタを持って取り外してください。
7. 蛇腹管等に結露した水分が溜まる場合がありますので注意してください。
8. 長期にわたり使用する場合は、衛生管理に注意してください。変質・硬化したものは使用しないでください。
9. 本品の使用中に発疹等が生じた場合、直ちに使用を中止し医師の指示に従ってください。
10. ネブライザーの取扱方法は、別途ネブライザーの取扱説明書等を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

■保存・保管方法

浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。

■使用期限

製造後3年以内（使用期限内であっても破損・変色等が発生した時点で廃棄してください）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社

製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch