


類別:機械器具 81 磁気治療器
管理医療機器 一般名称:家庭用永久磁石磁気治療器 (71016000)

中山式腰椎コルセット磁石付

【禁忌・禁止】

- ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内埋込み型医用電気機器を使用している方は使用しないでください。
- 脳せき(脊)髄液短絡術圧可変式シントなどの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人は使用しないでください。

【形状・構造等】

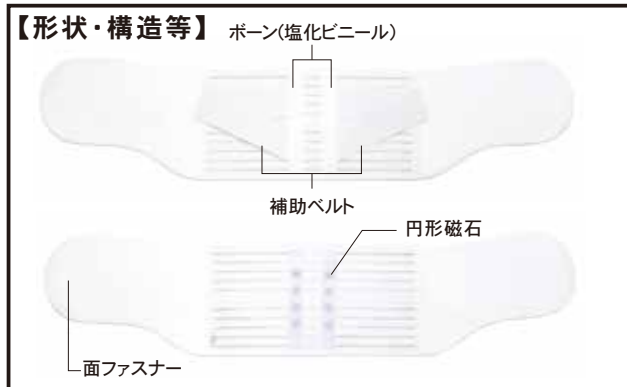

1. 構成

- ・本体……………1

2. 動作原理

本製品は、磁気サポーターとして用いる磁気治療器であり、永久磁石から出た磁力により血行を促進しコリの緩和に用いるものです。

【使用目的又は効果】

- ・装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用する。

【使用方法等】

ご使用に当たっては、使用方法、使用上の注意をよくお読みになってご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. 使用方法 ※肌着の上から着用してください。

- 装着前にコルセットの上下、表裏をお確かめください。
- 2本のボーンで腰椎をはさむように腰にあて、コルセットの両端を持ち、腰部を覆うようにします。締め加減を調整しながら、腹部側で面ファスナーを留めてください。
- 補助ベルトでご自分に合った固定力に調節してください。

【使用上の注意】

- 医師の治療を受けている人や下記の人には必ず医師と相談のうえご使用ください。
 - 悪性腫瘍のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 皮膚に感染症及び／又は創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温38℃以上(有熱期)の人
例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感, 悪寒, 血圧変動など]の強い時期。
例2. 衰弱しているとき
 - ねんざ(捻挫), 肉離れなどの急性[とう(疼)痛性]疾患の人

- 他の治療器と同時に使用しないでください。

- 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。

- 頭部への使用はおやめください。

- 使用する前には次のことにご注意ください。

- 時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- 縫製品破れの有無の点検及び磁石の入っている部分を含め繊維部分に破れ等故障がある場合は使用しないで下さい。
- しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。

- 使用中には次のことにご注意ください。

- 製品に不具合などが発見された時は、使用を直ちに中止してください。
- 身体に異常を感じた時は、使用を直ちに中止してください。
- 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた時は、使用を直ちに中止して、専門医にご相談下さい。
- 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける人は、検査の前に使用を中止してください。
- 長時間ご使用になる際は適度に脱着を行ってください。
- アレルギー体質、湿疹生、汗でかぶれやすい方のご使用はお避け下さい。

【取扱い上の注意】

製品の故障及び取扱いには次のことにご注意ください。

- 製品は、改造しないで下さい。
- 製品の故障時は、勝手に修理等せずお客様がご購入された場所にご連絡ください。
- 本来の目的以外にはご使用にならないでください。

【保守・点検に係る事項】

使用後、保管には次のことにご注意ください。

- 製品を破棄する時には、お住いの市町村の廃棄方法に従ってください。
- 万一磁石が取れてしまった場合、その磁石を誤って飲むと窒息・内臓疾患の恐れがあるので、小さい子供の手の届くところに製品を置かないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 : 中山式産業株式会社
住所 : 〒116-0003東京都荒川区南千住6-56-10
電話 : 0120-03-1848