

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器

内視鏡・関節鏡用接続チューブ

70267000

イリゲーションセット

再使用禁止


【禁忌・禁止】

●再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は、内視鏡や関節鏡に接続して用いるチューブであり、薬液等のボトルから落差で薬液等を供給する。
2. 本品は主にポリ塩化ビニル(可塑剤フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用。
3. 滅菌済品は開封後直ちに使用できる。
4. 未滅菌品は、使用前に滅菌する必要がある。

<構造図>

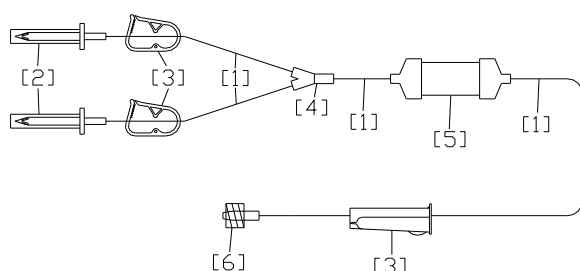

- [1]:チューブ
[2]:導入針
[3]:クランプ
[4]:Y字管
[5]:チャンバ
[6]:ルアーコネクタ

【使用目的又は効果】

本品は、鏡視下手術及び検査時に内視鏡や関節鏡に接続するチューブであり、薬液等を供給する目的に使用する。

【使用方法等】

使用方法

1. すべてのクランプを閉じ、スタンド等に吊り下げた生理食塩水容器等の栓に導入針を穿刺する。
2. 容器側のピンチクランプを開放し、空気が残らないよう注意しながらチューブ内を液で満たす。
3. ローラークランプを開放し、チューブ内を洗浄する。
4. すべてのクランプを閉じ、ルアーコネクタを内視鏡又は関節鏡に接続する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の使用に際しては、前もって十分な予備知識をもち、かつ使用説明書を熟読した後使用すること。
- (2) 関連機器の使用については、その機器の添付文書に従うこと。
- (3) 包装や本体に破損などの異常が認められる場合、使用期限内でない場合は使用しないこと。
- (4) 本品が汚染されないように取り出し、開封後は直ちに使用すること。
- (5) 導入針を薬液ボトル栓等に穿刺する際、まっすぐに刺すこと。
- (6) ルアーコネクタを接続する際、回路のねじれに注意すること。
- (7) 回路を併用医療機器にセットする際、回路を破損しないように注意すること。
- (8) 接続部が確実に接続されていることを確認すること。
- (9) 回路は併用医療機器に正しく装着すること。

- (10) チューブを鉗子等で閉塞する場合、必ずあごの滑らかな鉗子を使用し、チューブを傷つけないよう注意すること。鉗子の先端や根元で閉塞すると、チューブを損傷する可能性がある。
- また、チューブを閉塞する際は、各回路部品から1 cm以上離れた箇所での閉塞すること。部品の際に閉塞すると、チューブを損傷する可能性がある。
- 万一損傷した場合は、回路交換等適切な処置を行うこと。
- (11) 本品などが破損する場合があるので、化学薬品などは使用しないこと。
- (12) アルコールを含む薬液、油圧の薬液、脂肪乳剤等を使用する場合は、コネクタ部にひび割れの危険性があるので注意すること。
- (13) 可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する恐れがあるため、注意すること。
- (14) 使用後は医療廃棄物として適切に廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光・紫外線・高温多湿・水漏れを避け、清潔な場所にて室温保管すること。

2. 有効期間

滅菌年月日より3年[自己認証(当社データ)による]

【取扱い上の注意】

本品はプラスチック製品であるので、運搬・保管時には衝撃を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

浪華ゴム工業株式会社

*TEL : 0745-52-5681