

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 70962001

機械器具 36 医療用ピンセット
(一般医療機器 ピンセット 35079001)

NRS 骨手術器械

*【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・他メーカーのインプラント材料と併用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】


1. 組成

ステンレス鋼

2. 形状・構造

本添付文書に該当する製品の製品名、カタログ番号、サイズ等については、包装表示ラベル又は製品の記載を確認すること。

ピンセット

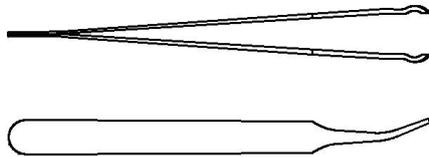

カタログ番号 NRS-M-011

【使用目的又は効果】

スクリュー等の把持を行う。

【使用方法等】

先端部(挟部)を操作して、ケースに収納されているスクリュー・ワッシャー等を把持し、取り出す。

【使用上の注意】

1. 使用前

本品は未滅菌であるので日本薬局方に定める高圧蒸気滅菌法により滅菌を行って使用すること。

2. 使用注意

- ・先端を硬いものに接触させたりすると変形や損傷が生じると、器具・器械の寿命を著しく低下させます。
- ・使用時に必要以上の力を加えないこと。[折損、曲がり等の原因となる]

3. 相互作用

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の 名称等	臨床症状 措置方法	機序・危険因子
・他メーカーの インプラント及 び器具	・インプラント及び器 具の破損の危険性が 高まる恐れがある。	・サイズが正確に適合 せず、正しく器具が 使用できない。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 洗浄後、高温、多湿、直射日光をさけ常温で保管

*【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄、消毒すること。
2. 洗浄、消毒、殺菌等に用いる洗剤は、医療用などの洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
3. 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、本品を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
4. 金属たわし、クレンザー(磨き粉)は、本品の表面が損傷するので、付着物除去及び洗浄時に使用しないこと。
5. 洗浄装置(超音波洗浄装置等)を使用するときは、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
6. 超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱説明書を遵守し、器具の隙間部に異物がないことを確認できるまで洗浄すること。
7. 中空構造部分がある器具は、中空部に異物がないことを確認すること。
8. 洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥すること。
9. 使用後には必ず点検を実施し、傷及び変形等の異常を発見した際には、必ず《本品の問い合わせ先》へその旨を連絡し、その指示に従うこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》

 **メイラ** 株式会社

TEL 0575-24-7059

《製造業者》

メイラ株式会社

《本品の問い合わせ先》

メイラ株式会社 メディカル事業部 業務グループ

TEL 052-459-1277 (直通) / FAX 052-459-1282