

機械器具 12 理学診療用器具
 一般的名称：弾性ストッキング (31724000)
 一般医療機器 (クラス I)
 販売名：Venotrainシリーズ

【警告】

1. 適用対象

- (1) 深部静脈血栓症の患者であり、本品を装着すると肺血栓塞栓症を起こすおそれのある患者。
- (2) 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症性疾患、化膿性疾患、創傷のある患者。
[圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。]
- (3) 装着部位に神経障害のある患者。
[血行障害を起こしても認識できないおそれがあるため。]
- (4) 糖尿病患者。
[無症状の神経障害や血行障害を併発している可能性があり、痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。]
- (5) 繊維に対して過敏症のある患者。
[接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。]

2. 使用方法

医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないこと。
 [臥位になることで静脈還流等に変化が起り、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため。]

【禁忌・禁止】

1. 重度の血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者
[圧迫により症状を悪化させるおそれがあるため。]
2. 感染性静脈炎の患者。
[菌血症や敗血症を発生、増悪させるおそれがあるため。]
3. 装着部位に極度の変形を有する患者。
[適切な圧迫力が得られないため。]

【形状、構造及び原理等】

本品には以下のシリーズがある。

シリーズ名	原材料
ディスクレシオン	ポリアミド、エラストン
ルック	ポリアミド、エラストン
マイクロ	ポリアミド、エラストン
ビジネス	ポリアミド、エラストン、コットン
ソフト	ポリアミド、エラストン
ソフト S	ポリアミド、エラストン
ソフト アーム	ポリアミド、エラストン
ピュア	ポリアミド、エラストン
コクーン	ポリアミド、エラストン、コットン、セルロース
インパルス	ポリアミド、エラストン
アルサーテック	ポリアミド、エラストン
デライト	ポリアミド、エラストン
クラフロー	ポリアミド、エラストン

1. 形状

(1) 下肢

ハイソックス、ストッキング、片脚ストッキング(左右有)、パンティストッキング(腹部加圧 無/有)、マニティパニティストッキング、片脚パニティストッキング(左右有)、メンズレオタード
 ※患者の体型に合わせたオーダーメイドが有る。

(2) 上肢

スリーブ、ミトン付スリーブ、ミトン、グローブ
 ※患者の体型に合わせたオーダーメイドが有る。

2. サイズ表記

XS~XXL または I~VI

※患者の体型に合わせたオーダーメイドが有る。

原理

末梢から中枢に向かい各部位で漸減的に圧迫を加える。

圧迫圧 (mmHg)

シリーズ名	圧迫圧 (mmHg)
ディスクレシオン	10-15, 15-20
上記以外のシリーズ	18-21, 23-32, 34-46, 49-

【使用目的又は効果】

- ・ 静脈血のうっ帯を軽減・予防
- ・ リンパ液のうっ帯を軽減・予防
- ・ 静脈還流の促進
- ・ 漸減的圧迫
- ・ 血流、血行の促進
- ・ むくみ及び浮腫の軽減

【使用方法等】

装着部の周径にあったサイズを使用してください。


*使用方法

1. ストッキング装着時の注意点

- ・ 爪や指輪などで引っ掛けたりしないようご注意ください。ゴム手袋等を使うと引き上げが容易になり、また、ストッキングを無理なくのばすことができます。
- ・ 着用のコツをつかむとスムーズに履けるようになります。コツは引き上げの力加減です。上へいくほど力を弱めて着用してください。


2. ストッキング【つま先有の場合】

- ①ストッキングの上部をあらかじめかかとの縫い合わせ部分まで中表(裏返し下図①参照)にし、つま先からかかとまで履きます。
- ②足の甲の部分のシワやたるみがないことを確認し、ストッキングを指先でつまみ広げかぶせるように履いてください。
- ③裏返した部分を少しずつ引き上げ、ゆっくりと均等に全体的にシワ、たるみができないよう伸ばしてください。

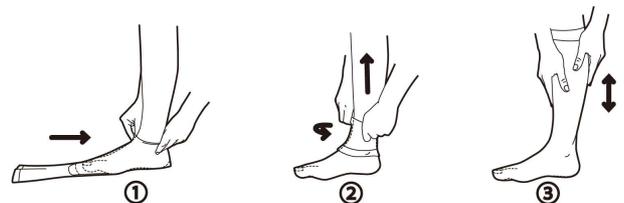


3. ストッキング【つま先無の場合】

- ①装着補助具の中に足を入れます。(下図①参照)
- ②ストッキングの上部をあらかじめかかとの縫い合わせ部分まで中表(裏返し下図②参照)にし、つま先からかかとまで履きます。
- ③足の甲の部分のシワやたるみがないことを確認し、ストッキングを指先でつまみ広げかぶせるように履いてください。裏返した部分を少しずつ引き上げ、ゆっくりと均等に全体的にシワ、たるみができないよう伸ばしてください。
- ④つま先から装着補助具を引き抜いてください。

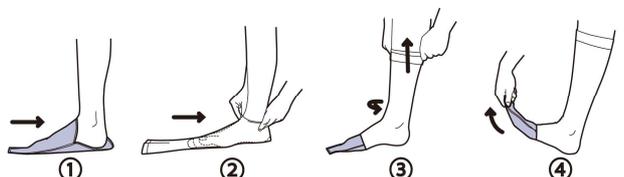

4. スリーブ

- ①スリーブの上部をあらかじめ手首の部分まで中表に裏返してください。爪や指輪などでスリーブを引っ掛けないよう注意し、スリーブに手を入れてください。
- ②裏返した部分を少しずつ引き上げてください。ゴム手袋等を使うとスリーブが引き上げやすくなります。
- ③スリーブを腕全体に均等に伸ばし、シワ、たるみ、よじれができないように注意しながら、最終的にわきの下まで引き上げて装着してください。

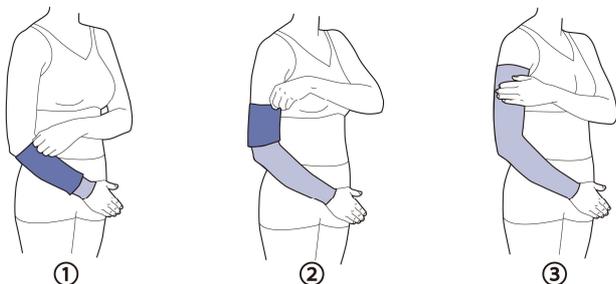

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - (1) 術後等患者の意識レベルが低い場合及び患者との意思疎通が困難な場合には患者の状態をよく観察して使用してください。
 - (2) ギプス、外傷等による長時間の四肢可動不能状態の患者は潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため注意して使用してください。
 - (3) 本品の使用により、疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
[動脈および静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがあるため。]
2. 重要な基本的注意
 - (1) 正しい圧迫圧を得るため、装着部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズの本品を選択してください。またサイズ適応外の場合には使用しないでください。
 - (2) 本品を折り返して使用しないでください。
[血行障害や神経障害を引き起こすおそれがあります。]
 - (3) 圧迫力の過不足を防ぐため、たるみやシワのないように装着してください。本品が装着中にたるんだり、シワが寄ったり、ずれ落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着しなおしてください。
[適正な圧迫力が得られず、また血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあります。]
 - (4) 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周径が変わった場合は、適切なサイズに変更してください。
 - (5) 本品に破損がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないで下さい。
 - (6) 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損することがありますので注意してください。
 - ①無理な引っ張り状態での装着
 - ②鋭利なものへの接触
 - (7) 本品をはさみで切るなど加工、修理を行わないでください。
 - (8) 本品は弾性ストッキングに精通した術者が、必ず装着者に使用方法を説明し、正しい装着手順で使用を開始してください。又患者との意思疎通が困難な場合には、介助者に使用方法を説明してください。
 - (9) 他の圧迫療法との併用又は重ね履きは、本品単独装着時より圧迫圧が強くなったり、本品にシワ、ずれ等が発生するので注意し、適宜本品及び皮膚の状態を確認してください。
 - (10) 軟膏などの薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化しますので付着しないよう注意してください。

3. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下の有害事象がおこる可能性があります。

(1) 重大な有害事象

- ①血行障害
チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感などの循環障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
- ②神経障害
神経麻痺等の神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
- ③皮膚障害
ア 本品のずれ、圧迫等により、皮膚潰瘍の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
イ ショック等末梢循環が不安定な患者に使用した場合、装着部位に血行障害が発生し壊疽などの皮膚障害が起こる可能性があるため四肢の血流に注意してください。

(2) その他の有害事象

本品装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれなどの皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。本品を脱いだ後で皮膚障害が現れる場合もありますので、同様に適切な処置を行ってください。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿の場所での保管はしないでください。

【保守・点検に係る事項】

* 洗濯時の注意事項

- ・ 液温は品質表示の限度とし、中性洗剤で洗濯（ソフト洗い・洗濯ネット使用）、または手で押し洗いしてください。
- ・ よくすすいだ後、すぐ洗濯機から取り出し、弱く脱水して陰干しにしてください。
- ・ 乾燥機の使用、直射日光は生地を傷めることがありますので避けてください。
- ・ 柔軟仕上げ剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロン仕上げはしないでください。
- ・ 洗濯時に多少脱色・色移りすることがありますので、他の洗濯物との混入はお避けください。
- ・ 着用後は、都度洗濯してください。
- ・ ベルクロテープ（面ファスナー）加工された製品の場合は留めた状態で洗濯してください。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者
ナック商会株式会社
電話：06-6599-9000

製造業者
Bauerfeind AG（ドイツ）