

機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 脊椎手術用器械 70963001

LEAFAN ケージシステムMIS用手術器械

【警告】

- 本品の使用にあたりこの添付文書を事前に十分理解すること。
また患者の安全に細心の注意をはらい添付文書に従って使用すること。
- 【重篤な不具合、有害事象が発現するおそれがある。】
- 本品は脊椎手術等に習熟し、かつ製品特性や手術手技を十分に理解した医師が使用すること。
- 【重篤な不具合、有害事象が発現するおそれがある。】

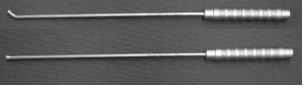
【禁忌・禁止】

- インプラントとしての使用は絶対に行わないこと。
- 本品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)を行うことは、折損などの原因となるので行わないこと。
- 弊社が指定した製品以外との併用はしないこと。
【相互作用の項参照。】
- 使用中に手術器械が破損・変形したときは、使用を中止すること。

【形状、構造及び原理等】

- 製品外観と製品名
製品名、サイズ等については本体の記載もしくは製品に同梱される一覧表をご確認下さい。
- 材質: ステンレス鋼、樹脂

※写真は代表例

クレセントケージホルダー (ロング)	
クレセントインパクター 最終打込器(ロング)	
クレセントMISトライアル	
クレセントMISスターター	
クレセントMISキュレット	
クレセントMISラスパトリー	
クレセントMIS椎間シェーパー	
クレセントMIS移植骨用台	
クレセントボーングラフトインパクター	
クレセントMISボーンファンネル	

【使用目的又は効果】

販売名「LEAFAN ケージシステム」をMIS(最小侵襲手術)で取り扱う脊椎手術に使用することを目的とする手動式手術器械で、再使用可能である。

【使用方法等】

1.使用前

本器械は未滅菌であるので、使用前に必ず洗浄を行い、以下の条件の高圧蒸気滅菌又は各医療機関により検証され確認された滅菌条件により滅菌を行う。

滅菌方法: 高圧蒸気滅菌

滅菌条件:

温度	時間
115~118℃	30分
121~124℃	15分
126~129℃	10分

2.使用方法

手術方法の一例

- 挿入する椎間レベルを確認しながら、MIS(最小侵襲手術)で腰椎へアプローチする。
- インプラントを挿入するためには部分的に椎弓切除をしなければならない。
- 神経根レトラクター(本届出外)で神経根及び硬膜をよける。
- メスで繊維輪を切開した後、変性した椎間板をクレセントMISキュレットおよびクレセントMIS椎間シェーパーで注意深く取り除く。
- 椎体面の皮質骨切除はクレセントMISラスパトリーで仕上げる。
- 椎体間の準備が出来たらクレセントMISトライアル又はクレセントMISスターターを用いてサイズの確認を行う。
- 外科用X線装置を用いて、サイズと位置が正しいか確認する。挿入するインプラントをクレセントケージホルダー(ロング)に装着する。この時、インプラントがしっかり固定されているか確認する。
- 移植骨は、インプラント内にクレセントインパクターを使ってしっかりと詰め込む。
- 神経根レトラクターで神経根を保護した状態で、インプラントを椎体間に挿入する。この時、上下椎体面の皮質骨を損傷しないよう注意する。
- クレセントインパクター 最終打込器(ロング)とハンマーを用いて椎体内の正しい位置にインプラントを設置する。必要に応じてクレセントボーングラフトインパクター、クレセントMISボーンファンネルを用いて椎間の移植骨を押し込み整える。
- 外科用X線装置を用いて、インプラントが椎体内の正しい位置に設置されているか確認する。
- 2個目も同じ手順で設置する。

※その他の器械[クレセントMIS移植骨用台]

ケージに移植骨を充填する際の台として使用する。

3.使用方法に関連する使用上の注意

(使用前の注意事項)

- 必要なインプラント及び手術器械が揃っているか確認すること。
- 術中にインプラントと手術器械の組み合わせを再確認すること。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 衝撃や表面損傷が原因で破損することがあるので、丁寧に扱うこと。
- 本器械は過度で異常なストレスに耐えることはできない。
- 本器械はインプラントではないので術後、体内に埋没させないこと。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織等の汚物を直ちに除去し、洗浄、消毒、乾燥させること。
- 本品がハイスコク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

2.相互作用

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定していない製品	不具合が発生する危険性が高まるおそれがある。	インプラントの構造やサイズが正確に適合せず、インプラントが正しく設置されないことがある。

3.不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

(1)その他の不具合

- ①手術器械の破損、変形
- ②インプラントの破損、緩みや変形

(2)その他の有害事象

- ①外科的侵襲、本器械の不適切な使用又は破損による神経組織の損傷、麻痺、軟部組織の損傷、圧迫、疼痛、周辺臓器の損傷
- ②骨の亀裂、骨折、穿孔
- ③本器械の破損、滑りによる患者及び手術従事者の負傷
- ④破損片等の体内遺残

不具合・有害事象は上記に限定されない。これらの不具合・有害事象の治療のため再手術が必要な場合もある。

4.高齢者への適用

高齢者は、一般的に骨量・骨質が十分でないことが多いので、手術器械でもって術中に過度の力を加えることにより骨折する可能性があるので慎重に使用し、術後の経過にも十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1)保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず乾燥を行うこと。
[保管中は、器械が損傷しないように十分注意して下さい。]
- (2)滅菌済のものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

- (1)使用前に、損傷、腐食、汚染、接合不良等、異常がないか外観検査を実施すること。
- (2)使用後は、洗浄、すすぎ等により汚染除去を行った後、血液、組織等が付着していないことを確認し、滅菌を行った後保管すること。
- (3)汚染除去には、必ず医療用洗剤等を適正な濃度で使用する。
- (4)洗剤の残留がないよう十分すすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水(ろ過、蒸留、脱イオン化等)を用いることを推奨する。
- (5)洗浄装置(超音波洗浄器等)で洗浄するときは、鋭利な器具と接触して損傷することがないように注意すること。また、器具の隙間や接続部に異物等が付着・残存していないことを確認すること。
- (6)ボックスロック(合わせ部、交差部)のある器具は開く・分解するなどすること。
- (7)強アルカリ・強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。
- (8)金属ブラシ類、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- (9)複雑な構造の器具は隙間部や嵌合部は柔らかいブラシ等で特に入念に異物除去を行うこと。
- (10)中空状の器具は、棒状のクリーナーを用いて中に入った組織片、残り屑を除去してから洗浄すること。
- (11)洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

帝人ナカシマメディカル株式会社
TEL. 086-279-6278(代表)

・製造業者

帝人ナカシマメディカル株式会社